


NextSeq 550Dx

Guia de preparação do local do instrumento

Introdução	3
Entrega e instalação	4
Requisitos do laboratório	4
Requisitos elétricos	7
No-break	8
Considerações ambientais	8
Segurança dos computadores e da rede	9
Considerações sobre a rede	10
Materiais de consumo e equipamentos fornecidos pelo usuário	15
Histórico de revisões	17
Assistência técnica	

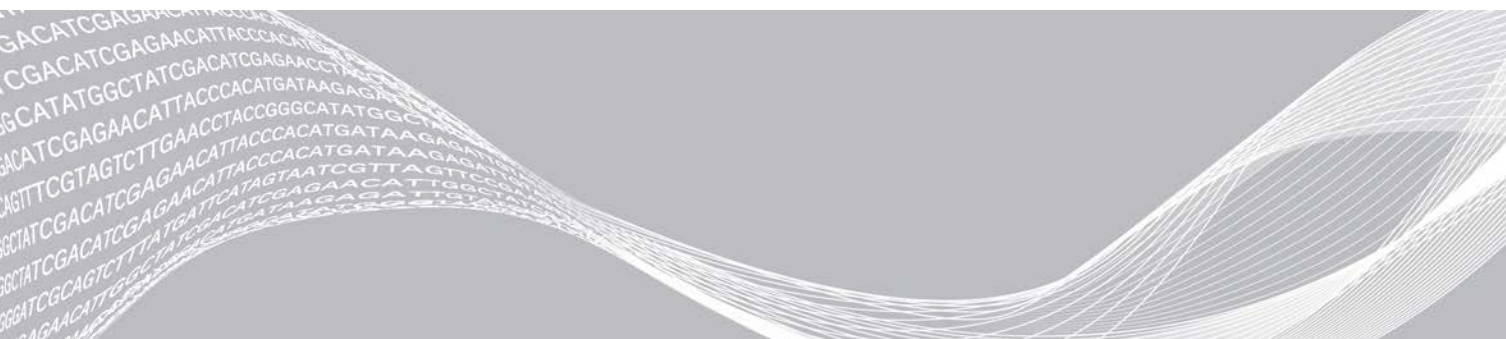

Este documento e seu conteúdo são de propriedade da Illumina, Inc. e de suas afiliadas (“Illumina”) e destinam-se exclusivamente ao uso contratual de seu cliente com relação ao uso dos produtos descritos neste documento e para nenhuma outra finalidade. Este documento e seu conteúdo não devem ser usados ou distribuídos para nenhuma outra finalidade nem comunicados, divulgados ou reproduzidos de nenhuma forma sem o consentimento prévio por escrito da Illumina. A Illumina não concede nenhuma licença sob seus direitos de patente, marca comercial, direitos autorais ou lei comum, nem direitos semelhantes de terceiros por meio deste documento.

As instruções neste documento devem ser estrita e explicitamente seguidas por pessoal devidamente treinado e qualificado para garantir o uso adequado e seguro dos produtos descritos neste documento. Todo o conteúdo deste documento deve ser lido e compreendido por completo antes da utilização de tais produtos.

NÃO LER COMPLETAMENTE E NÃO SEGUIR EXPLICITAMENTE TODAS AS INSTRUÇÕES AQUI CONTIDAS PODE RESULTAR EM DANOS AO(S) PRODUTO(S), FERIMENTOS A PESSOAS, INCLUSIVE USUÁRIOS OU OUTROS, E DANOS A OUTROS BENS, ANULANDO TODA GARANTIA APLICÁVEL AO(S) PRODUTO(S).

A ILLUMINA NÃO SE RESPONSABILIZA POR QUALQUER PROBLEMA CAUSADO PELO USO INDEVIDO DO(S) PRODUTO(S) MENCIONADO(S) ACIMA (INCLUINDO PARTES SEPARADAS OU O SOFTWARE).

© 2021 Illumina, Inc. Todos os direitos reservados.

Todas as marcas comerciais pertencem à Illumina, Inc. ou aos respectivos proprietários. Para obter informações específicas sobre marcas comerciais, consulte www.illumina.com/company/legal.html.

Introdução

Este guia fornece especificações e orientações para a preparação de seu local para a instalação e operação do instrumento NextSeq™ 550Dx da Illumina®.

- ▶ Requisitos para a área do laboratório
- ▶ Requisitos elétricos
- ▶ Restrições ambientais
- ▶ Requisitos de computação
- ▶ Materiais de consumo e equipamentos fornecidos pelo usuário

Considerações de segurança

Consulte o *Guia de conformidade e segurança do instrumento NextSeq 550Dx (documento n.º 100000009868)* para obter informações importantes sobre considerações de segurança.

Recursos adicionais

A documentação a seguir está disponível para download no site da Illumina.

Recurso	Descrição
<i>Guia de conformidade e segurança do instrumento NextSeq 550Dx (documento n.º 100000009868)</i>	Fornecer informações sobre considerações de segurança operacional, declarações de conformidade e rotulagem de instrumentos.
<i>Guia de conformidade do leitor RFID (documento n.º 1000000030332)</i>	Fornecer informações sobre o leitor RFID no instrumento, certificações de conformidade e considerações de segurança.
<i>Guia de referência do instrumento NextSeq 550Dx no modo de pesquisa (documento n.º 1000000041922)</i>	Fornecer instruções de operação do instrumento e procedimentos de solução de problemas. Para uso na operação do instrumento NextSeq 550Dx no modo de pesquisa com o NextSeq Control Software (NCS) v3.0.
<i>Guia do sistema NextSeq 550 (documento n.º 15069765)</i>	Fornecer instruções de operação do instrumento e procedimentos de solução de problemas. Para uso na operação do instrumento NextSeq 550Dx no modo de pesquisa com o NextSeq Control Software (NCS) v4.0 ou posterior.
<i>Guia de referência do instrumento NextSeq 550Dx (documento n.º 100000009513)</i>	Fornecer uma visão geral dos componentes do instrumento, instruções de operação do instrumento e procedimentos de manutenção e de solução de problemas.
<i>Ajuda do BaseSpace (help.basempace.illumina.com)</i>	Fornecer informações sobre o uso do BaseSpace™ Sequence Hub e de opções de análise disponíveis.

Visite as [páginas de suporte do NextSeq 550Dx](#) no site da Illumina para acessar a documentação, downloads de software, treinamentos on-line e perguntas frequentes.

Entrega e instalação

Um prestador de serviços autorizado entrega o instrumento, remove os componentes da caixa e coloca o instrumento na bancada do laboratório. Certifique-se de que a área do laboratório e a bancada estejam preparadas antes da entrega.

O acesso às portas USB do instrumento é necessário para a instalação, manutenção e serviço.



CUIDADO

Somente o pessoal autorizado pode desencaixotar, instalar ou mover o instrumento. O manuseio incorreto do instrumento pode afetar o alinhamento ou danificar os componentes.

Um representante da Illumina instala e prepara o instrumento. Ao conectar o instrumento a um sistema de gestão de dados ou a um local de rede remoto, certifique-se de que o caminho para o armazenamento de dados seja selecionado antes da data da instalação. O representante da Illumina pode testar o processo de transferência de dados durante a instalação.



CUIDADO

Depois que o representante da Illumina fizer a instalação e a preparação, **não** mude o instrumento de lugar. Mover o instrumento de maneira inadequada pode afetar o alinhamento óptico e comprometer a integridade dos dados. Se for necessário mudar o instrumento de lugar, entre em contato com um representante da Illumina.

Conteúdo e dimensões da caixa

O instrumento NextSeq 550Dx é transportado em uma caixa. Use as dimensões a seguir para determinar a largura mínima de porta necessária para acomodar o receptáculo de transporte.

Medida	Dimensões da caixa
Altura	97 cm (38 pol.)
Largura	90 cm (35,5 pol.)
Profundidade	94 cm (37 pol.)
Peso	165 kg (364 lb)


A caixa contém o instrumento e os seguintes componentes:

- ▶ Frasco de reagentes usados
- ▶ Cartucho de limpeza de reagente e cartucho de limpeza da solução tampão
- ▶ Adaptador BeadChip
- ▶ Cabo de alimentação
- ▶ Kit de acessórios, que contém os seguintes componentes:
 - ▶ Teclado e mouse
 - ▶ *Folheto informativo do produto do instrumento NextSeq 550Dx (documento n.º 1000000041523)*

Requisitos do laboratório

Esta seção fornece especificações e requisitos para configuração da área do laboratório. Para obter mais informações, consulte *Considerações ambientais* na página 8.

Dimensões do instrumento

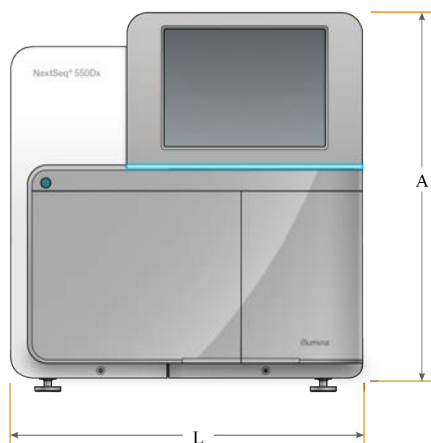

Medida	Dimensões do instrumento (instalado)
Altura	58,5 cm (23 pol.)
Largura	54 cm (21 pol.)
Profundidade	69 cm (27 pol.)
Peso	84 kg (186 lb)

Requisitos de posicionamento

Posicione o instrumento para permitir uma ventilação adequada, acesso ao interruptor de alimentação e à tomada e acesso para manutenção do instrumento.

- ▶ Certifique-se de que você consegue alcançar o lado esquerdo do instrumento para acessar o interruptor de alimentação no painel traseiro.
- ▶ Posicione o instrumento de modo que o pessoal autorizado possa desconectar rapidamente o cabo de alimentação da tomada.
- ▶ Certifique-se de que o instrumento esteja acessível por todos os lados.

Acesso	Distância mínima
Laterais	Deixe pelo menos 61 cm (24 pol.) de distância de cada lado do instrumento.
Parte traseira	Deixe pelo menos 10,2 cm (4 pol.) de distância atrás do instrumento.
Parte superior	Deixe pelo menos 61 cm (24 pol.) de distância acima do instrumento.



CUIDADO

Mover o instrumento de maneira inadequada pode afetar o alinhamento óptico e comprometer a integridade dos dados. Se for necessário mudar o instrumento de lugar, entre em contato com um representante da Illumina.

Orientações para a bancada do laboratório

O instrumento inclui elementos ópticos de precisão. Coloque o instrumento em uma bancada de laboratório resistente e longe de fontes de vibração.

Largura	Altura	Profundidade	Rodízios
122 cm (48 pol.)	91,4 cm (36 pol.)	76,2 cm (30 pol.)	Opcional

Orientações sobre vibração

Mantenha o nível de vibração do piso do laboratório no padrão VC-A de 50 µm/s para frequências de 1/3 de banda de oitava de 8–80 Hz ou menor. Esse nível é típico para os laboratórios. Não exceda o padrão para salas de operações (linha de base) de acordo com a ISO de 100 µm/s para frequências de 1/3 de banda de oitava de 8 a 80 Hz.

Durante as execuções de sequenciamento, use as seguintes práticas recomendadas para minimizar as vibrações e garantir o melhor desempenho:

- ▶ Coloque o instrumento em uma superfície plana e sólida e mantenha a área livre organizada.
- ▶ Não coloque teclados, materiais de consumo usados ou outros objetos em cima do instrumento.
- ▶ Não instale o instrumento próximo de fontes de vibração que ultrapassem o padrão para salas de operação de acordo com a ISO. Por exemplo:
 - ▶ Motores, bombas, testadores de agitação, testadores de queda e fluxos de ar pesados no laboratório.
 - ▶ Pisos diretamente acima ou abaixo de controladores e ventiladores de HVAC e helipontos.
 - ▶ Trabalhos de construção ou de reparação no mesmo andar do instrumento.
- ▶ Mantenha fontes de vibração, como itens largados e movimentação de equipamentos pesados, a pelo menos 100 cm (39,4 polegadas) do instrumento.
- ▶ Utilize apenas a tela sensível ao toque, o teclado e o mouse para interagir com o instrumento. Não bata diretamente nas superfícies do instrumento durante a operação.

Configuração do laboratório para procedimentos de PCR

Alguns métodos de preparação da biblioteca requerem o processo de reação em cadeia da polimerase (PCR).

Antes de começar a trabalhar no laboratório, estabeleça áreas e procedimentos laboratoriais exclusivos para evitar a contaminação de produtos PCR. Os produtos PCR podem contaminar reagentes, instrumentos e amostras, causando resultados imprecisos e atrasos em operações normais.

Áreas pré-PCR e pós-PCR

- ▶ Estabeleça uma área pré-PCR para processos pré-PCR.
- ▶ Estabeleça uma área pós-PCR para o processamento de produtos PCR.
- ▶ Não utilize a mesma pia para limpar materiais pré-PCR e pós-PCR.
- ▶ Não use o mesmo sistema de purificação de água para as áreas pré-PCR e pós-PCR.
- ▶ Armazene os suprimentos usados nos protocolos pré-PCR na área pré-PCR e transfira-os para a área pós-PCR conforme necessário.

Equipamentos e suprimentos exclusivos

- ▶ Não compartilhe equipamentos nem suprimentos entre processos pré-PCR e pós-PCR. Destine um conjunto separado de equipamentos e suprimentos a cada área.
- ▶ Estabeleça áreas de armazenamento exclusivas para os materiais de consumo usados em cada área.

Armazenamento necessário para materiais de consumo de sequenciamento

Item (1 por execução)	Requisito de armazenamento
Solução tampão de diluição da biblioteca	-25 °C a -15 °C
Cartucho de reagente	-25 °C a -15 °C
Cartucho de solução tampão	15 °C a 30 °C
Cartucho da lâmina de fluxo	2 °C a 8 °C

Requisitos elétricos

Especificações de energia

Tipo	Especificação
Tensão de linha	100–240 Volts CA @ 50/60 Hz
Classificação da fonte de alimentação	600 Watts, no máximo

Tomadas

Sua instalação deve conter os seguintes equipamentos:

- ▶ **Para 100 a 120 Volts CA** — É necessária uma linha dedicada de 15 A aterrada, com tensão e aterramento elétrico adequados. América do Norte e Japão — tomada: NEMA 5-15.
- ▶ **Para 220 a 240 Volts CA** — É necessária uma linha de 10 A aterrada, com tensão e aterramento elétrico adequados. Se a tensão oscilar mais de 10%, será necessário um regulador da linha de alimentação.

Terra de proteção



O instrumento tem uma ligação a um terra de proteção por meio de seu compartimento. O aterramento de segurança no cabo de alimentação retorna o terra de proteção para uma referência segura. A conexão do terra de proteção no cabo de alimentação deve estar em boas condições durante o uso do dispositivo.

Cabos de alimentação

O instrumento é fornecido com uma tomada padrão internacional IEC 60320 C20 e com um cabo de alimentação específico da região.

As tensões perigosas são removidas do instrumento somente quando o cabo de alimentação é desconectado da fonte de alimentação CA.

Para obter tomadas ou cabos de alimentação equivalentes que estejam em conformidade com as normas locais, consulte um fornecedor externo, como a Interpower Corporation (www.interpower.com).



CUIDADO

Nunca use um cabo de extensão para ligar o instrumento a uma fonte de alimentação.

Fusíveis

O instrumento não contém fusíveis que podem ser substituídos pelo usuário.

No-break

O uso de uma fonte de alimentação ininterrupta (no-break) fornecida pelo usuário é altamente recomendado. A Illumina não se responsabiliza por execuções afetadas por interrupções na alimentação, independentemente de o instrumento estar conectado a um no-break. A energia fornecida por geradores padrão geralmente *não* é ininterrupta e é normal que haja uma breve queda de energia antes de o fornecimento reiniciar.

A tabela a seguir enumera recomendações específicas por região.

Especificação	APC Smart UPS 2200 VA LCD 120 V (América do Norte)	APC Smart UPS 1500 VA LCD 100 V (Japão)	APC Smart UPS 2200 VA LCD 230 V (Internacional)
Potência máxima	1920 W	980 W	1980 W
Tensão de entrada (nominal)	100 a 120 VCA	100 VCA	220 a 240 VCA
Frequência de entrada	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Conexão de entrada	NEMA 5-20P	NEMA 5-15P	IEC-320 C20
Tempo normal de execução (300 W)	90 minutos	51 minutos	90 minutos
Tempo normal de execução (600 W)	40 minutos	17 minutos	40 minutos

Para obter um no-break equivalente em conformidade com as normas locais para instalações fora das regiões mencionadas, consulte um fornecedor externo, como a Interpower Corporation (www.interpower.com).

Considerações ambientais

Elemento	Especificação
Temperatura	Transporte e armazenamento: -10 °C a 50 °C (14 °F a 122 °F). Condições de operação: mantenha a temperatura do laboratório entre 19 °C e 25 °C (22 °C ±3 °C). Essa é a temperatura de operação do instrumento. Durante uma execução, não permita que a temperatura ambiente varie mais do que ±2 °C.
Umidade	Transporte e armazenamento: umidade não condensada entre 15% e 80%. Condições de operação: mantenha uma umidade relativa não condensada entre 20% e 80%.
Elevação	Posicione o instrumento a uma altitude abaixo de 2.000 metros (6.500 pés).
Qualidade do ar	Opere o instrumento em um ambiente com grau de poluição II ou melhor. Um ambiente com grau de poluição II é definido como um ambiente que normalmente contém apenas poluentes não condutores.

Elemento	Especificação
Ventilação	Consulte o departamento adequado em suas instalações para saber quais são os requisitos de ventilação com base nas especificações de saída de calor do instrumento.
Vibração	Limite a vibração contínua do piso do laboratório ao nível de escritório indicado pela ISO. Durante uma execução de sequenciamento, não exceda os limites indicados pela ISO referentes a salas de operação. Evite choques ou perturbações intermitentes perto do instrumento.

Saída de calor

Potência medida	Saída térmica
600 Watts	2.048 BTU/hora

Saída de ruído

Saída de ruído (dB)	Distância do instrumento
<70 dB	1 metro (3,3 pés)

Uma medida de <70 dB está no mesmo nível de uma conversa normal a uma distância de cerca de 1 metro (3,3 pés).

Segurança dos computadores e da rede

A seção a seguir fornece orientações para a manutenção da segurança da rede e dos computadores. Para obter informações sobre configurações recomendadas, consulte *Configurações do sistema operacional* na página 13.

Software antivírus

Um software antivírus de sua escolha é altamente recomendado para proteger o computador de controle do instrumento contra vírus.

Para evitar perda de dados ou interrupções, configure o software antivírus da seguinte forma:

- ▶ Configure-o para realizar verificações manuais. Não habilite verificações automáticas.
- ▶ Execute verificações manuais apenas quando o instrumento não estiver em uso.
- ▶ Configure as atualizações para que sejam baixadas sem a autorização do usuário, mas não instaladas.
- ▶ Não faça atualizações durante a operação do instrumento. Faça atualizações somente quando o instrumento não estiver em execução e quando for seguro reiniciar o computador do instrumento.
- ▶ Não reinicie automaticamente o computador após as atualizações.
- ▶ Exclua o diretório do aplicativo e a unidade de dados de qualquer proteção de sistema de arquivos em tempo real. Aplique essa configuração ao diretório C:\Illumina e à unidade D:\.
- ▶ O Windows Defender está desabilitado por padrão. Mantenha-o desabilitado. Esse produto Windows pode afetar os recursos do computador utilizados pelo software da Illumina.

Considerações sobre a rede

O instrumento NextSeq 550Dx foi projetado para uso com uma rede, sem levar em consideração se as execuções no modo RUO estão conectadas ao BaseSpace ou se são realizadas no modo independente.

Realizar uma execução no modo manual requer uma conexão de rede para transferir os dados da execução para um local de rede. O instrumento precisa estar em modo de pesquisa para ser executado em modo manual. Não salve os dados da execução no disco rígido local do instrumento NextSeq 550Dx. O disco rígido é destinado ao armazenamento temporário antes que os dados sejam transferidos automaticamente. Dados salvos no disco rígido além dos dados da execução atual preenchem o disco rígido e impedem que execuções posteriores sejam realizadas até que o espaço seja disponibilizado.

Uma conexão com a internet é necessária para as seguintes operações:

- ▶ Conexão ao BaseSpace Sequence Hub da Illumina.
- ▶ Instalar atualizações no software operacional NextSeq 550Dx (NOS) da interface do instrumento.
- ▶ [Opcional] Atualizar dados de desempenho do instrumento.
- ▶ [Opcional] Assistência remota do suporte técnico da Illumina.

Conexões de rede

Use as seguintes recomendações para instalar e configurar uma conexão de rede:

- ▶ Use uma conexão exclusiva de 1 Gb entre o instrumento e seu sistema de gestão de dados. Essa conexão pode ser feita diretamente ou por meio de um interruptor de rede.
- ▶ A largura de banda necessária para uma conexão é de:
 - ▶ 50 Mb/s por instrumento para transferências na rede interna.
 - ▶ [Opcional] 50 Mb/s por instrumento para uploads da rede do BaseSpace Sequence Hub.
 - ▶ [Opcional] 5 Mb/s por instrumento para uploads de dados de desempenho.
- ▶ Os interruptores devem ser gerenciados.
- ▶ Equipamentos de rede, como os interruptores, devem ter um mínimo de 1 Gb/s.
- ▶ Calcule a capacidade total da carga de trabalho em cada interruptor de rede. O número de instrumentos conectados e equipamentos auxiliares, como impressoras, pode afetar a capacidade.

Use as seguintes recomendações para instalar e configurar uma conexão de rede:

- ▶ Se possível, separe o tráfego de sequenciamento de outro tráfego de rede.
- ▶ Os cabos devem ser CAT 5e ou superior. Um cabo de rede CAT 5e blindado de 3 metros (9,8 pés) de comprimento é fornecido com o instrumento para conexões de rede.
- ▶ Configure as atualizações do Windows para que não haja atualizações automáticas.
- ▶ Se você estiver usando o BaseSpace, use uma conexão de rede de, no mínimo, 10 Mb/s.

Domínios do BaseSpace Sequence Hub

Os seguintes domínios fornecem acesso do Serviço de cópia universal ao BaseSpace Sequence Hub e ao Illumina Proactive. Alguns endereços corporativos contêm um campo de domínio definido pelo usuário. Esse campo personalizado está reservado com {domain}.

Ocorrência	Endereço
US Enterprise	{domain}.basespace.illumina.com
	{domain}.api.basespace.illumina.com
	basespace-data-east.s3-external-1.amazonaws.com
	basespace-data-east.s3.amazonaws.com
	instruments.sh.basespace.illumina.com
UE Enterprise	{domain}.euc1.sh.basespace.illumina.com
	{domain}.api.euc1.sh.basespace.illumina.com
	euc1-prd-seq-hub-data-bucket.s3.eu-central-1.amazonaws.com
	instruments.sh.basespace.illumina.com
AUS Enterprise	{domain}.aps2.sh.basespace.illumina.com
	{domain}.api.aps2.sh.basespace.illumina.com
	instruments.sh.basespace.illumina.com
	aps2-sh-prd-seq-hub-data-bucket.s3.ap-southeast-2.amazonaws.com
US Basic and Professional	basespace.illumina.com
	api.basespace.illumina.com
	basespace-data-east.s3-external-1.amazonaws.com
	basespace-data-east.s3.amazonaws.com
	instruments.sh.basespace.illumina.com
EU Basic and Professional	euc1.sh.basespace.illumina.com
	api.euc1.sh.basespace.illumina.com
	euc1-prd-seq-hub-data-bucket.s3.eu-central-1.amazonaws.com
	instruments.sh.basespace.illumina.com
AUS Basic and Professional	aps2.sh.basespace.illumina.com
	api.aps2.sh.basespace.illumina.com
	instruments.sh.basespace.illumina.com
	aps2-sh-prd-seq-hub-data-bucket.s3.ap-southeast-2.amazonaws.com
GC Basic and Professional	cnn1.sh.basespace.illumina.com.cn
	api.cnn1.sh.basespace.illumina.com.cn
	instruments.sh.basespace.illumina.com.cn
	cn-sh-cnn1-prod-seq-hub-data-bucket.s3.cn-north-1.amazonaws.com.cn

Suporte de rede

A Illumina não instala nem oferece suporte técnico a conexões de rede.

Reveja as atividades de manutenção de rede quanto a riscos potenciais de compatibilidade com o instrumento Illumina, inclusive os seguintes riscos:

- ▶ **Remoção dos GPOs (Group Policy Objects, objetos de política de grupo):** os GPOs podem afetar o sistema operacional (SO) dos recursos conectados da Illumina. Alterações no SO podem interromper o software proprietário nos sistemas da Illumina. Os instrumentos Illumina foram testados e verificados quanto à operação correta. Após a conexão com GPOs do domínio, algumas configurações podem afetar o software do instrumento. Se o software do instrumento operar de maneira incorreta, consulte o administrador de TI de sua instalação para verificar se há uma possível interferência de GPO.
- ▶ **Ativação do firewall do Windows e do Windows Defender:** estes produtos do Windows podem afetar os recursos do SO usados pelo software da Illumina. Instale um software antivírus para proteger o computador de controle do instrumento.
- ▶ **Alterações nos privilégios de usuários pré-configurados:** mantenha os privilégios existentes para usuários pré-configurados. Torne os usuários pré-configurados indisponíveis, conforme necessário.
- ▶ **Possíveis conflitos de endereço IP:** o NextSeq 550Dx tem endereços IP internos fixos, o que pode provocar falha no sistema no caso de conflitos.
- ▶ **Compartilhamento de arquivos do Server Message Block (SMB):** o SMB v1 é desabilitado por padrão. Para habilitar, entre em contato com o suporte técnico da Illumina.

Conexões internas

Conexão	Valor	Finalidade
Domínio	localhost:*	Todas as portas para a comunicação de hosts locais com hosts locais, que são necessárias para a comunicação entre processos.
Endereço IP	192.168.113.*:* (ou */*)	Permite todas as portas. Link de comunicação com o firmware na placa de rede. Se estiver usando um servidor proxy, os seguintes endereços IPs deverão ser reservados: 192.168.113.5 e 192.168.113.2. Para obter mais informações, entre em contato com o suporte técnico da Illumina.
Porta	80	Local Run Manager
	443	
	8081	Real-Time Analysis
	8080	Software Operacional NextSeq 550Dx (NOS)
	29644	Serviço de cópia universal (UCS)

Conexões de saída

Conexão	Valor	Finalidade
Domínio	s3-external-1.amazonaws.com s3.amazonaws.com *.basespace.illumina.com	BaseSpace Sequence Hub ou Illumina Proactive
Porta	443	BaseSpace Sequence Hub ou Illumina Proactive
	80	BaseSpace Sequence Hub ou Illumina Proactive
	8080	Atualizações de software

Configurações do sistema operacional

Os instrumentos da Illumina são testados e verificados para operar dentro das especificações antes do envio. Após a instalação, alterações nas configurações podem gerar riscos de desempenho ou segurança.

As seguintes recomendações de configuração reduzem os riscos de segurança e de desempenho no sistema operacional:

- ▶ Configure uma senha com pelo menos 10 caracteres e use as políticas locais de identificação para obter mais orientações. **Guarde sua senha.**
 - ▶ A Illumina não guarda as credenciais de login do cliente e senhas desconhecidas não podem ser redefinidas.
 - ▶ Uma senha desconhecida exige que um representante da Illumina restaure o padrão de fábrica, o que remove todos os dados do sistema e aumenta o tempo necessário de suporte.
- ▶ Ao se conectarem a um domínio com objetos de política de grupo (GPOs), algumas configurações podem afetar o sistema operacional ou o software do instrumento. Se o software do instrumento operar de maneira incorreta, consulte o administrador de TI de sua instalação para verificar se há uma possível interferência de GPO.
- ▶ Use o firewall do Windows ou um firewall de rede (hardware ou software) e desabilite o Remote Desktop Protocol (RDP).
- ▶ Mantenha privilégios administrativos para os usuários. O software do instrumento da Illumina está configurado para habilitar as permissões do usuário quando o instrumento é enviado.
- ▶ O sistema tem endereços IP internos fixos que podem causar falha no sistema quando ocorrem conflitos.
- ▶ O computador de controle é projetado para operar os sistemas de sequenciamento da Illumina. Navegação na Web, verificação de e-mails, revisão de documentos e outras atividades que não são de sequenciamento criam problemas de qualidade e de segurança.

Serviços

O NOS e o software Local Run Manager utilizam os seguintes serviços:

- ▶ Serviço de análise do Local Run Manager da Illumina
- ▶ Serviço de tarefa do Local Run Manager da Illumina
- ▶ Serviço de cópia universal da Illumina

Por padrão, os serviços usam as mesmas credenciais de logon usadas no NextSeq 550Dx. Para alterar as credenciais do Local Run Manager, consulte Especificar configurações da conta de serviço no *Guia de referência do instrumento NextSeq 550Dx (documento n.º 1000000009513)*.

Mapeamento de unidades

Não compartilhe qualquer unidade ou pasta do instrumento.

Mapeie as unidades usando o Server Message Block (SMB) v2 ou posterior ou o Network File System (NFS).

No software operacional, utilize o caminho UNC completo para a saída da execução.

Atualizações do Windows

Para proteger seus dados, é recomendável que todas as atualizações essenciais de segurança do Windows sejam aplicadas regularmente. O instrumento deve estar em modo ocioso quando as atualizações forem aplicadas, já que algumas atualizações exigem uma reinicialização completa do sistema. As atualizações gerais podem colocar o ambiente operacional do sistema em risco e não têm suporte.

Se não for possível fazer atualizações de segurança, estas são alternativas para ativar a Atualização do Windows:

- ▶ Um firewall e isolamento de rede mais robusto (LAN virtual).
- ▶ Isolamento de rede de armazenamento conectado à rede (NAS), que ainda permite que os dados sejam sincronizados com a rede.
- ▶ Armazenamento USB local.
- ▶ Comportamento e gerenciamento do usuário para evitar o uso indevido do computador de controle e garantir os controles adequados baseados em permissão.

Para obter mais informações sobre as alternativas do Windows Update, entre em contato com o suporte técnico da Illumina.

Software de terceiros

A Illumina não fornece suporte a qualquer software além do que é fornecido no momento da instalação. Não instale o Chrome, Java, Box ou qualquer outro software de terceiros que não tenha sido fornecido com o sistema.

Os softwares de terceiros não foram testados e podem interferir no desempenho e na segurança. Por exemplo, o RoboCopy ou outros programas de sincronização e de transmissão podem causar a corrupção ou ausência de dados de sequenciamento, pois interferem na transmissão realizada pela suíte do software de controle.

Comportamento do usuário

O computador de controle do instrumento é projetado para operar os sistemas de sequenciamento da Illumina. Não o considere um computador de uso geral. Por motivos de qualidade e segurança, não use o computador de controle para navegar na Web, verificar e-mails, revisar documentos ou outras atividades desnecessárias. Essas atividades podem prejudicar o desempenho ou provocar a perda de dados.

Requisitos de armazenamento para o BaseSpace Sequence Hub

Com base no tamanho da execução, o BaseSpace Sequence Hub requer o seguinte armazenamento para cada execução:

Tabela 1 Parâmetros de desempenho do sistema NextSeq 550Dx

Configuração de lâmina de fluxo	Comprimento de leitura	Produção	Entrada obrigatória
Lâmina de fluxo de saída elevada, até 400 M de leituras simples e até 800 M leituras tipo paired-end.	2 x 150 bp	100–120 Gb	100 ng–1 µg com kits de preparação de biblioteca do TruSeq
	2 x 75 bp	50-60 Gb	
	1 x 75 bp	25-30 Gb	
Lâmina de fluxo de saída média, até 130 M de leituras simples e até 260 M leituras tipo paired-end.	2 x 150 bp	32-39 Gb	
	2 x 75 bp	16-19 Gb	

Materiais de consumo e equipamentos fornecidos pelo usuário

Os materiais de consumo e equipamentos a seguir são usados no instrumento NextSeq 550Dx. Para obter mais informações, consulte o *Guia de referência do instrumento NextSeq 550Dx* (documento n.º 1000000009513).

Materiais de consumo para sequenciamento

Material de consumo	Fornecedor	Finalidade
Compressa com álcool isopropílico 70% ou etílico 70%	VWR, n.º do catálogo 95041-714 (ou equivalente) Fornecedor de itens de uso comum do laboratório	Limpeza da lâmina de fluxo e uso geral
Lenço para laboratório com poucos fiapos	VWR, n.º do catálogo 21905-026 ou equivalente	Limpeza da lâmina de fluxo e uso geral

Materiais de consumo para manutenção e resolução de problemas

Material de consumo	Fornecedor	Finalidade
NaOCl, 5% (hipoclorito de sódio)	Sigma-Aldrich, n.º do catálogo 239305 (ou equivalente aprovado para uso em laboratório)	Limpar o instrumento usando o material de limpeza manual após a execução; diluído a 0,12%.
Tween 20	Sigma-Aldrich, catálogo n.º P7949	Limpar o instrumento usando opções de limpeza manual; diluído a 0,05%.
Água, aprovada para uso em laboratório	Fornecedor de itens de uso comum do laboratório	Limpar o instrumento (limpeza manual).
Filtro de ar	Illumina, n.º do catálogo 20022240	Limpar o ar que o instrumento recebe para o resfriamento.

Orientações para água aprovada para uso em laboratório

Utilize sempre água aprovada para uso em laboratório ou água deionizada para realizar procedimentos com instrumentos. Nunca use água da torneira. Utilize apenas os seguintes tipos de água ou equivalentes:

- ▶ Água deionizada
- ▶ Illumina PW1
- ▶ Água de 18 Megohm (MΩ)
- ▶ Água Milli-Q
- ▶ Água Super-Q
- ▶ Água para biologia molecular

Equipamento

Item	Origem
Congelador, -25 °C a -15 °C, frost-free	Fornecedor de itens de uso comum do laboratório
Refrigerador, 2 °C a 8 °C	Fornecedor de itens de uso comum do laboratório

Histórico de revisões

Documento	Data	Descrição da alteração
Documento n.º 1000000009869 v06	Agosto de 2021	Atualizado o endereço do Representante autorizado da UE.
Documento n.º 1000000009869 v05	Novembro de 2020	Atualizadas considerações de rede, Suporte de rede, Conexões internas, Conexões de saída, Configurações do SO e as seções de Software antivírus para alterações de compatibilidade do Windows 10, Local Run Manager e BaseSpace Sequence Hub. Atualizados e adicionados domínios BSSH. Adicionados novos Serviços e requisitos de armazenamento na seção BaseSpace Sequence Hub. Adicionadas informações do BaseSpace Sequence Hub ao longo do guia para uso com o modo RUO. Adicionado Elemento de vibração à tabela Considerações ambientais e atualizada a seção Orientações sobre vibração. Removida a referência ao Guia de práticas recomendadas de segurança da Illumina.
Documento n.º 1000000009869 v04	Dezembro de 2019	Atualizado o endereço do Representante autorizado da UE. Atualizado o endereço do Patrocinador australiano.
Documento n.º 1000000009869 v03	Março de 2019	Corrigida a formatação da velocidade de requisito da largura de banda.
Documento n.º 1000000009869 v02	Janeiro de 2019	Adicionadas informações para os Cartuchos de lâmina de fluxo de alta produção NextSeq 550Dx v2.5 (300 ciclos). Atualizadas as instruções de instalação para indicar que o acesso às portas USB é necessário. Corrigidas as especificações de no-breaks para uso no Japão.
Documento n.º 1000000009869 v01	Agosto de 2018	Atualizadas marcações regulatórias.
Documento n.º 1000000009869 v00	Novembro de 2017	Versão inicial.

Assistência técnica

Para obter assistência técnica, entre em contato com o Suporte técnico da Illumina.

Site: www.illumina.com
 E-mail: techsupport@illumina.com

Telefones do suporte ao cliente da Illumina

Região	Ligação gratuita	Regional
América do Norte	+1(800) 809-4566	
Alemanha	+49 8001014940	+49 8938035677
Austrália	1-800-775-688	
Áustria	+43 800006249	+43 19286540
Bélgica	+32 80077160	+32 34002973
China	400.066.5835	
Coreia do Sul	+82 80 234 5300	
Dinamarca	+45 80820183	+45 89871156
Espanha	+34 911899417	+34 800300143
Finlândia	+358 800918363	+358 974790110
França	+33 805102193	+33 170770446
Hong Kong, China	800960230	
Irlanda	+353 1800936608	+353 016950506
Itália	+39 800985513	+39 236003759
Japão	0800-111-5011	
Noruega	+47 800 16836	+47 21939693
Nova Zelândia	0800.451.650	
Países Baixos	+31 8000222493	+31 207132960
Reino Unido	+44 8000126019	+44 2073057197
Singapura	1-800-579-2745	
Suécia	+46 850619671	+46 200883979
Suíça	+41 565800000	+41 800200442
Taiwan, China	00806651752	
Outros países	+44-1799-534000	


Fichas de dados de segurança (SDSs) – Disponíveis no site da Illumina em support.illumina.com/sds.html.

Documentação do produto – Disponível para download em support.illumina.com.



Illumina
5200 Illumina Way
San Diego, Califórnia 92122, EUA.
+1 (800) 809-ILMN (4566)
+1 (858) 202-4566 (fora da América do Norte)
techsupport@illumina.com
www.illumina.com

CE

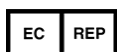

Illumina Netherlands B.V.
Steenoven 19
5626 DK Eindhoven
Países Baixos

Patrocinador australiano

Illumina Australia Pty Ltd
Nursing Association Building
Level 3, 535 Elizabeth Street
Melbourne, VIC 3000
Austrália

PARA UTILIZAÇÃO EM DIAGNÓSTICO IN VITRO

© 2021 Illumina, Inc. Todos os direitos reservados.

illumina®