

Pakuotės lapelis, skirtas prietaisams su 4 v. MOS

NAUDOTI IN VITRO DIAGNOSTIKAI. TIK EKSPORTUI.

Numatytoji paskirtis

„MiSeqDx“ prietaisas skirtas tikslinei DNR bibliotekų, gautų iš žmogaus genomo DNR, išskirtos iš periferinio visos sudėties kraujo arba formalinu fiksuoto, į parafiną įlieto (FFPE) audinio, sekai nustatyti, prietaisu atliekant *in vitro* diagnostikos (IVD) tyrimus. „MiSeqDx“ prietaisas nėra skirtas naudoti atliekant viso genomo ar *de novo* sekos nustatymą. „MiSeqDx“ prietaisą reikia naudoti su registruotais ir nurodytais, leistais naudoti ar patvirtintais IVD reagentais ir analitine programine įranga.

Procedūros principai

„Illumina MiSeqDx“ yra skirtas žmogaus DNR sekai nustatyti tikslingai ir pakartotinai, naudojant „Illumina“ sekos nustatymo eksploatacines medžiagas ir bibliotekas, paruoštas iš žmogaus genomo DNR, išskirtos iš periferinio visos sudėties kraujo arba FFPE audinio, bei naudojant registruotus ir nurodytus, leistus naudoti arba patvirtintus IVD reagentus. Bibliotekos paruošiamos amplifikuojant taikinius ir pridėdant mėginių indeksų bei užfiksuotų sekų. Mėginių bibliotekos užfiksuojamos pratekamojoje kiuvetėje ir prietaise per sekoskaitą sintezės metu (SSM). Taikant SBS chemijos būdą, naudojamas ciklinio grįžtamojo blokavimo metodas siekiant aptikti pavienių nukleotidų bazes, kurios yra įtrauktos į augančias DNR gijas. Analizė realiuoju laiku (RTA) programinė įranga atlieka vaizdo analizę ir bazių priskyrimą bei kiekvienai kiekvieno sekos nustatymo ciklo bazei priskiria kokybės įvertį. Pasibaigus pirminei analizei, atliekant antrinę analizę „MiSeqDx“ prietaise apdorojami bazių priskyrimai.

Paprastai apdorojimas apima išskirstymą, FASTQ failų generavimą, lygiavimą, variantų priskyrimą ir variantų priskyrimo formato (VCF) failų, kuriuose pateikiama informacija apie variantus, randamus konkrečiose referentinio genomo padėtyse, generavimą. „MiSeqDx“ naudoja skirtingus antrinės analizės modulius – tai priklauso nuo darbo eigos.

Dvejopo paleidimo konfigūracija

Dvejopo paleidimo konfigūracija apima aparatinę, programinę įrangą ir diegimo procedūras, kad „MiSeqDx“ prietaisas galėtų vykdyti tiek *in vitro* diagnostikos (IVD), tiek tik moksliniams tyrimams naudojamus (RUO) sekos nustatymo tyrimus. Naudodamas dvejopo paleidimo konfigūraciją, naudotojas gali diagnostinį prietaiso režimą perjungti į mokslinių tyrimų režimą ir atvirkščiai. Ant sekos nustatymo eksploatacinių medžiagų esančios atpažinimo radijo dažniu (RFID) žymenos neleidžia RUO sekos nustatymo reagentų naudoti vykdant diagnostinį sekos nustatymą.

Procedūros apribojimai

- Naudoti *in vitro* diagnostikai.
- Etiketėse pateikiami rezultatai buvo gauti naudojant reprezentatyviojo tyrimo grupes ir periferinį visos sudėties kraują arba ląstelių linijas (gonocitų linijos charakteristikos) ir FFPE audinį arba FFPE ląstelių linijas (somatinių variantų charakteristikos) bei aprašytus reagentus ir programinės įrangos modulius. „Germline“ ir „Somatic“ variantų moduliai sukurti tam, kad veikimo našumą būtų galima įvertinti atliekant reprezentatyvius tyrimus. Veikimo charakteristikos pateikiamos tik informaciniais tikslais. Pateikiami tikrinimo tyrimai tik iliustruoja prietaiso bendrąsias galimybes ir neapibrėžia prietaiso galimybių ar tinkamumo, remiantis konkrečiais teiginiais. Reikia patikrinti visus visų su šiuo instrumentu naudoti sukurtų diagnostinių tyrimų veikimo aspektus.
- Šio gaminio galimybės yra tik tokios, kokios nurodytos toliau:
 - Sekų nustatymo galia ≥ 5 GB, kai nuskaitymo srities ilgis yra 2×150 bp
 - Nuskaitymų praleidimas per filtrą ≥ 15 mln., kai nuskaitymo srities ilgis yra 2×150 bp
 - Bazės, didesnės nei Q30 ≥ 80 %, kai nuskaitymo ilgis 2×150 bp
Ne mažiau kaip 80 % bazių „Phred“ kokybės balai yra daugiau nei 30, o tai nurodo didesnę nei 99,9 % bazių priskyrimo tikslumą.
- „MiSeqDx“ prietaisas patvirtintas tik žmogaus DNR bibliotekų, išskirtų iš periferinio visos sudėties kraujo arba FFPE audinio, sekai nustatyti. Bibliotekų, generuotų iš kitų tipų mėginių, šiame prietaise atliekant *in vitro* diagnostiką naudoti negalima. Šio prietaiso veikimo charakteristikos norint atlikti iš klinikinių mėginių gautų mikrobinių arba virusinių nukleorūgščių sekos nustatymą nenustatytos.
- „MiSeqDx“ yra skirtas *in vitro* diagnostikai, naudojant registruotus ir nurodytus, leistus naudoti arba patvirtintus IVD reagentus ar tyrimus. Reagentų apribojimai ir veikimo charakteristikos, aprašyti šiame pakuotės lapelyje, paremti reprezentatyviaisiais tyrimais ir programinės įrangos moduliais. Norėdami sužinoti IVD tyrimų paskirtį, aptinkamus variantus ir mėginių tipą, žr. konkretaus tyrimo pakuotės lapelį.
- Tyrimo programinė įranga neprilygiuoja intarpų, išskirtų ar jų derinių turinio, kurio ilgis yra didesnis nei 25 bp. Todėl tyrimo programinė įranga neaptinka didesnio nei 25 bp ilgio intarpų / išskirtų.
- Patvirtinta, kad sistema gali aptikti vieno nukleotido variantus (SNV) ir iki 25 bp išskirtas bei 24 bp intarpus, kai naudojama su „Germline“ variantų ir „Somatic“ variantų modulių programine įranga. Atliekant somatinį priskyrimą (taikant 0,05 variantų dažnį), buvo aptikta 25 bp išskirtų ir 18 bp intarpų.
- Tyrimo programinė įranga gali neprilygiuoti amplikonų nuskaitymų, kurių variantų turinys yra itin didelis, todėl sritis gali būti laikoma nemutantinio tipo. Itin didelio turinio pavyzdžiai:
 - nuskaitymai, kuriuose yra daugiau nei trys intarpai / išskirtos.
 - mažiausiai 30 bp ilgio nuskaitymai su SNV turiniu, kurio ilgis yra didesnis nei 4 % viso amplikono tikslinio ilgio (išskyrus zondo sritis).
 - nuskaitymai, kurių ilgis mažesnis nei 30 bp, o SNV turinys didesnis nei 10 % viso amplikonų ilgio (įskaitant zondo sritis).

- Dideli variantai, įskaitant multinukleotidų variantus (MNV) ir didelius intarpus / iškritas, išvestiniame VCF faile gali būti pateikiami kaip atskiri mažesni variantai.
- Iškritų variantai gali būti išfiltruojami arba praleidžiami, kai apimtyje yra išdėstyti du amplikonai, jei iškritas ilgis yra didesnis už persidengimą tarp išdėstytų amplikonų arba lygus jam.
- Sistema negali aptikti intarpų / iškritų, jei jie yra tiesiogiai šalia pradmens ir nėra persidengiančių amplikonų. Sričių, kuriose yra persidengiančių amplikonų, tyrimas negali aptikti iškritų, kai persidengimo sritis yra mažesnė už aptinkamo dydžio iškritą. Pavyzdžiui, jei dviejų gretimų amplikonų persidengimo sritis yra dvi (2) bazės, tyrimas negali aptikti jokių iškritų, apimančių abi šias bazes. Galima aptikti vienos bazės iškritą bet kurioje iš šių bazių.
- Kaip ir bet kokiaje hibridizavimu pagrįstoje bibliotekos paruošimo darbo eigoje, pagrindiniai polimorfizmai, mutacijos, intarpai ar iškritos oligonukleotidus rišančiose srityse gali turėti įtakos zonduojamiems aleliams. Vadinas, paveikiami ir priskyrimai, atliekami sekos nustatymo metu. Pavyzdžiai pateikti toliau:
 - Variantas fazėje gali būti neamplifikuotas su variantu pradmenų srityje, todėl rezultatas gali būti klaidingai neigiamas.
 - Variantai pradmenų srityje gali užkirsti kelią referentinio alelio amplifikacijai, todėl gali įvykti neteisingas homozigotinio varianto priskyrimas.
 - Intarpų / iškritų variantai pradmenų srityje gali sukelti klaidingą teigiamą priskyrimą nuskaitymo pabaigoje šalia pradmens.
- Intarpai / iškritos gali būti filtruojami dėl gijų tendencingumo, jei jie atsiranda ties vieno nuskaitymo pabaiga ir atliekant lygiavimą nėra prilygiuojami, tačiau nepašalinami.
- Maži MNV nepatvirtinti.
- Kopijų skaičiaus variantai ir struktūriniai variantai, pvz., suliejimai ar perkėlimai, nepatvirtinti.
- Specifiniai genocitų linijos apribojimai:
 - „MiSeqDx“ sistema, naudojanti „Germline“ variantų modulį, yra skirta kokybiniam genocitų linijos variantų priskyrimo rezultatams pateikti (t. y. homozigotinio, heterozigotinio, nemutantinio tipo).
 - Naudojant kartu su „Germline Variant“ moduliu, mažiausia reikalinga aprėptis vienam amplikonui, kad būtų tiksliai priskirtas variantas, yra 150x. Mėginių skaičius ir bendras tikslinių bazių skaičius turi įtakos aprėpčiai. GC kiekis ir kitas geno turinys gali turėti įtakos aprėpčiai.
 - Kopijų skaičiaus kitimas gali turėti įtakos tam, ar variantas identifikuojamas kaip homozigotinis, ar heterozigotinis.
 - Variantai tam tikruose pasikartojančiuose kontekstuose yra išfiltruojami VCF failuose. Kartotinis RMxN filtras naudojamas variantams filtruoti, jei visa variantų seka ar jos dalis pakartotinai matoma referenciniame genome šalia varianto padėties. Kai atliekamas genocitų linijos varianto priskyrimas, norint filtruoti variantą, reikia bent 9 referentinio geno pakartojimų, ir tinka tik pakartojimai, ne ilgesni kaip 5 bp (R5x9).
- Somatiniais variantams taikomi apribojimai:

- „MiSeqDx“ sistema, naudojanti „Somatic“ variantų modulį, yra skirta somatinių variantų priskyrimo kokybiniais rezultatais pateikti (t. y. nustatoma, ar yra somatinis variantas, kurio varianto dažnis yra ne mažesnis nei 0,026, o aptikimo riba yra 0,05).
- Naudojant kartu su „Somatic“ variantų moduliui, mažiausia reikalinga aprėptis vienam amplikonui, kad būtų gautas tikslaus varianto priskyrimas, yra 450x vienam oligonukleotidų telkiniui. Mėginių skaičius ir bendras tikslinių bazių skaičius turi įtakos aprėpčiai. GC kiekis ir kitas genomo turinys gali turėti įtakos aprėpčiai.
- Variantai tam tikruose pasikartojančiuose kontekstuose yra išfiltruojami VCF failuose. Kartotinis RMxN filtras naudojamas variantams filtruoti, jei visa variantų seka ar jos dalis pakartotinai matoma referenciniame genome šalia varianto padėties. Kai atliekamas somatinio varianto priskyrimas, norint filtruoti variantą, reikia bent 6 referentinio geno pakartojimų, ir tinka tik tie pakartojimai, kurių ilgis yra iki 3 bp (R3x6).
- „Somatic“ variantų modulis negali atskirti gonocitų linijos ir somatinių variantų. Modulis naudojamas norint aptikti variantus plataus intervalo variantų dažniuose, tačiau varianto dažnis negali būti naudojamas norint atskirti somatinius variantus nuo gonocitų linijos variantų.
- Normalus mėginio audinys turi įtakos variantų aptikimui. Pranešta aptikimo riba yra pagrįsta santykinio varianto dažniu, nustatytu pagal visą DNR, gautą iš naviko ir normalaus audinio.

Gaminio komponentai

„Illumina MiSeqDx“ sudaro:

„MiSeqDx“ prietaisas (Katalogo Nr. DX-410-1001)

Kad „MiSeqDx“ prietaisas veiktų ir būtų galima analizuoti duomenis, reikalingi toliau nurodyti programinės įrangos komponentai:

Programa	Funkcija	Aprašymas
„MiSeq“ operacinė programinė įranga (MOS)	Valdo prietaiso veikimą	MOS programa valdo prietaiso veikimą sekoskaitos metu ir generuoja vaizdus, skirtus naudoti Analizė realiuoju laiku (RTA) programinei įrangai. Daugiau informacijos žr. „MiSeqDx“ prietaiso informacinis vadovas, skirtas 4 v. MOS sistemai (dokumento Nr. 200010452).
Analizė realiuoju laiku (RTA)	Atlieka pirminę analizę	RTA programa kiekvienos išklotinės vaizdus, kuriuos MOS generuoja vieno sekoskaitos serijos ciklo metu, konvertuoja į bazių priskyrimo failus, kurie įvedami į „Local Run Manager“ analizės modulius. RTA programoje nėra naudotojo sąsajos.
„Local Run Manager“	Modulio pasirinkimo sąsaja	„Local Run Manager“ programinė įranga yra į prietaisą integruotas sprendimas, skirtas naudotojams tvarkyti, antrinei analizei vykdyti ir būsenai stebėti. Daugiau informacijos žr. „Local Run Manager“ 4 v. programinės įrangos informacinis vadovas, skirtas „MiSeqDx“ prietaisui (dokumento Nr. 200046657).

Laikymas ir naudojimas

Elementas	Specifikacija
Temperatūra	Gabenimas ir sandėliavimas: nuo –10 °C iki 40 °C (nuo 14 °F iki 104 °F) Naudojimo sąlygos: nuo 19 °C iki 25 °C (nuo 66 °F iki 77 °F)
Drėgnis	Gabenimas ir sandėliavimas: Nekondensuojanti drėgmė Naudojimo sąlygos: 30–75 % santykinis drėgnis (be kondensacijos)

Reikalinga įranga ir medžiagos – nepridėta

Sekos nustatymo eksploatacinės medžiagos

„MiSeqDx“ 3 v. reagentų rinkinys (Katalogo Nr. 20037124)

„MiSeqDx“ reagentų rinkinys „v3 Micro“ (Katalogo Nr. 20063860)

Naudotojo pateikiamos eksploatacinės medžiagos

Prieš pradėdami vykdymą įsitikinkite, kad turite tolesnes naudotojo pateikiamas eksploatacines medžiagas.

Eksploatacinė medžiaga	Paskirtis
Alkoholio servetėlės, 70 % izopropilas arba Etanolis, 70 %	Pratekamosios kiuvetės stiklo ir platformos valymas
Laboratorinis audinys, kurio sudėtyje mažai medvilnės	Pratekamosios kiuvetės platformos valymas
Popierius lėšiams, 4 x 6 col.	Pratekamosios kiuvetės valymas
Tween 20	Prietaiso plovimas
Pincetas, plastikinis, kvadratinio galiuku (papildomas)	Pratekamosios kiuvetės išėmimas iš jos gabenimo taros
Vanduo, laboratorinis	Prietaiso plovimas

Laboratorinio vandens gairės

Prietaiso procedūroms atlikti visada naudokite laboratorinį vandenį arba dejonizuotą vandenį. Niekada nenaudokite vandentiekio vandens.

Naudokite tik toliau nurodytų rūšių vandenį arba jo atitikmenis:

- Dejonizuotas vanduo
- Illumina PW1
- 18 megaomų (MΩ) vanduo
- Milli-Q vanduo
- Super-Q vanduo
- Molekulinės biologijos vanduo

Įspėjimai ir atsargumo priemonės



PERSPĖJIMAS

Šiame reagentų rinkinyje yra galimai pavojingų cheminių medžiagų. Pavojus žmogui kyla, jei pavojingos medžiagos įkvepiamos, nuryjamos, patenka ant odos ir į akis. Dirbant su pavojingomis medžiagomis, esančiomis reagentuose, vėdinimas turi būti tinkamas. Dėvėkite tinkamai nuo pavojaus saugančias apsaugines priemones, įskaitant akių apsaugos priemones, pirštines ir laboratorinį chalata. Su panaudotais reagentais elkitės kaip su cheminėmis atliekomis ir utilizuokite laikydamiesi taikomų regiono, nacionalinių ir vietinių įstatymų bei teisės aktų. Papildomos aplinkosaugos, sveikatos ir saugos informacijos ieškokite saugos duomenų lape adresu support.illumina.com/sds.html.

- Su visais kraujo mėginiais dirbkite, taip, tarytum būtų žinoma, kad jie yra užkrėsti žmogaus imunodeficitu virusu (ŽIV), žmogaus hepatito B virusu (HBV) ir kitais krauju pernešamais patogeniniais agentais (bendros atsargumo priemonės).
- Nesilaikant nurodytų procedūrų, rezultatai gali būti klaidingi arba gali gerokai pablogėti mėginių kokybė.
- Laikykitės įprastų laboratorinių atsargumo priemonių. Nesiurbkite pipetės burna. Darbo vietoje nevalgykite, negerkite ir nerūkykite. Dirbdami su mėginiais ir rinkinių reagentais mūvėkite vienkartinės pirštines bei dėvėkite laboratorinį chalata. Baigę dirbti su mėginiais ir rinkinių reagentais, kruopščiai nusiplaukite rankas.
- Kad PGR produktai neužterštų reagentų, instrumentų ir genomo DNR mėginių, būtina laikytis tinkamos laboratorinės praktikos ir laboratorinės higienos taisyklių. PGR užteršimas gali lemti netikslus ir nepatikimus rezultatus.
- Norėdami išvengti užteršimo užtikrinkite, kad prieš amplifikaciją ir po jos būtų naudojama speciali įranga (pvz., pipetės, pipečių antgaliai, šilumos blokai, maišytuvai ir centrifugos).

- Jei reikia, indekso ir mėginio susiejimas turi tiksliai atitikti atspausdintos plokštelės išdėstymą. Įvedus į modulį, „Local Run Manager“ automatiškai užpildomi su mėginių pavadinimais susiję indekso pradmenys. Naudotojui patariama prieš pradėdant sekos nustatymo vykdymą patikrinti indeksų pradmenis, susietus su mėginiais. Nesutapus mėginių ir plokštelės išdėstymo rezultatams, prarandama teigiamų mėginių identifikacija ir pateikiami neteisingi rezultatai.
- Siekiant kompiuterį apsaugoti nuo virusų, naudotojui primygtinai rekomenduojama įdiegti savo antivirusinę programinę įrangą. Diegimo instrukcijas žr. naudotojo vadove.
- Nenaudokite MiSeqDx, jei nuimtas bet kuris skydelis. Jei prietaisas naudojamas nuėmus bet kokius skydelius, kyla linijos įtampos ir nuolatinės srovės įtampos poveikio pavojus.
- Nelieskite pratekamosios kiuvetės platformos, esančios pratekamosios kiuvetės skyriuje. Šiame skyriuje esančio šildytuvo veikimo temperatūra yra 22–95 °C, todėl jis gali nudeginti.
- Prietaisas sveria apie 57 kg (126 svar.) ir gali sukelti sunkų sužeidimą, jei jis nukristų ar būtų netinkamai naudojamas.
- Apie rimtus incidentus, susijusius su šiuo gaminiu, nedelsdami praneškite „illumina“ bei valstybės narės, kurioje dirba naudotojas ir (arba) gyvena pacientas, kompetentingai institucijai.

Naudojimo instrukcija

Toliau pateiktose „MiSeqDx“ prietaiso naudojimo instrukcijose reikalaujama naudoti „MiSeqDx“ 3 v. reagentų rinkinius“ esančius reagentus.

Sukurti vykdymą su „Local Run Manager“


Išsamias vykdymo kūrimo instrukcijas žr. naudojamo analizės modulio „Local Run Manager“ 4 v. programinės įrangos informacinis vadovas, skirtas „MiSeqDx“ prietaisui (dokumento Nr. 200046657) ir „Local Run Manager“ modulio vadove.

Reagentų kasetės paruošimas

Tolesnėmis instrukcijomis aprašoma, kaip atšildyti reagentus naudojant kambario temperatūros vandens vonelę.

1. Išimkite reagentų kasetę iš saugyklos, kurioje palaikoma nuo –15 iki –25 °C temperatūra.
2. Reagentų kasetę įdėkite į vandens vonelę, kurioje yra pakankamai kambario temperatūros dejonizuoto vandens, kad reagentų kasetės pagrindą būtų galima panardinti iki vandens linijos, atspausdintos ant reagentų kasetės. Neleiskite, kad vanduo pakiltų aukščiau maksimalios vandens linijos.

pav. 1 Maksimali vandens linija

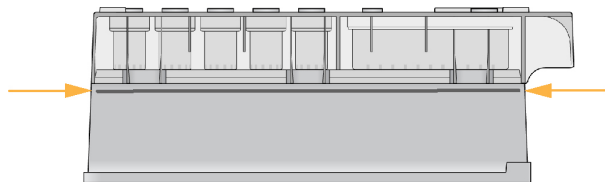

3. Leiskite reagentų kasetei atšilti kambario temperatūros vandens vonelėje maždaug 60–90 minučių arba tol, kol visiškai atšils.
4. Išimkite kasetę iš vandens vonelės ir švelniai pabaksnokite ant stalo, kad pašalintumėte vandenį nuo kasetės pagrindo. Kasetės pagrindą nusauskite. Įsitinkite, kad vandens neužtiško ant reagentų kasetės viršaus.

Reagentų kasetės patikra

1. Dešimt kartų apverskite reagentų kasetę, kad sumaišytumėte atšildytus reagentus, tada patikrinkite, ar visos padėtyse yra atšildytos.
2. Patikrinkite 1, 2 ir 4 padėtyse esančius reagentus ir įsitinkite, kad jie yra visiškai sumaišyti ir juose nėra nuosėdų.

PASTABA Siekiant užtikrinti tinkamą sekos nustatymą, labai svarbu, kad kasetėje esantys reagentai būtų visiškai atšildyti ir sumaišyti.

3. Švelniai pabaksnokite kasetę ant stalo, kad reagentuose sumažėtų oro burbuliukų.

PASTABA „MiSeqDx“ siurbtukų vamzdeliai nuleidžiami į kiekvieno rezervuaro apačią, kad įsiurbtų reagentų, todėl svarbu, kad rezervuaruose nebūtų oro burbuliukų.

4. Iki tol, kai būsite pasiruošę nustatyti vykdymą, reagentų kasetę padėkite ant ledo arba laikykite 2–8 °C temperatūroje (iki šešių valandų). Norėdami geriausių rezultatų, iš karto įdėkite mėginį ir nustatykite seriją.

Mėginių paruošimas sekai nustatyti

Nurodymus, kaip mėginio bibliotekas paruošti sekai nustatyti, įskaitant bibliotekos skiedimą ir telkimą, žr. bibliotekos paruošimo pakuotės lapelio dalyje „Naudojimo instrukcijos“.

Mėginio bibliotekų skiedimas priklauso nuo oligonukleotidų telkinių kompleksavimo. „MiSeqDx“ prietaise reikia optimizuoti sancaupų tankį, o optimalus sancaupų tankis skiriasi ir priklauso nuo konkretaus bibliotekų paruošimo tyrimo.

Mėginių bibliotekų įdėjimas į kasetę


Kai reagentų kasetė yra visiškai atšildyta ir paruošta naudoti, esate pasiruošę į kasetę dėti mėginius.

1. Naudodami atskirą, švarią ir tuščią 1 ml pipetę, pradurkite folijos plėvelę, dengiančią reagentų kasetės, pažymėtos **Load Samples** (įdėti mėginius), rezervuarą.

PASTABA Nepradurkite jokių kitų reagentų padėčių. Kitos reagentų padėtys praduriamos automatiškai vykdymo metu.

2. Pipete įlašinkite 600 µl skiestų amplikonų bibliotekos (DAL) mėginių bibliotekų į rezervuarą **Load Samples** (įdėti mėginius). Stenkitės neliesti folijos plėvelės.
3. Įdėję mėginį, patikrinkite, ar rezervuare nėra oro burbuliukų. Jei burbuliukų yra, kasetę švelniai pabaksnokite ant stalo, kad burbuliukus pašalintumėte.

pav. 2 Bibliotekų įkėlimas

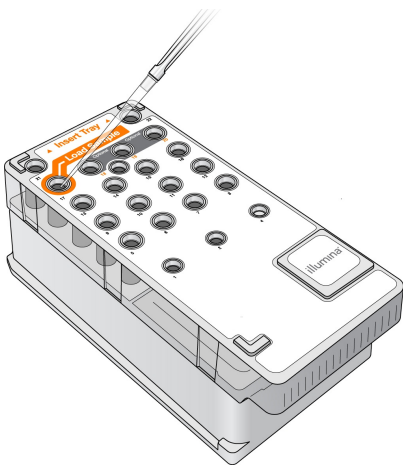

4. Pereikite tiesiai prie vykdymo nustatymo veiksmų, naudodami „MiSeq“ operacinę programinę įrangą (MOS) sąsają.

Vykdyimo nustatymas

Išsamias vykdymo sąrankos instrukcijas žr. „MiSeqDx“ prietaiso informacinis vadovas, skirtas 4 v. MOS sistemai (dokumento Nr. 200010452).

1. Prisijunkite prie „MiSeqDx“ naudodami savo „Local Run Manager“ programinės įrangos slaptažodį.
2. Pagrindiniame MOS programinės įrangos ekrane pasirinkite **Sequence** (seka).
3. Sąrašė pasirinkite vykdymą, tada – **Next** (pirmyn).
Atsidarys nurodyta tvarka pateikta vykdymo sąrankos ekranų serija: Įdėkite pratekamąją ląstelę, įkelkite reagentus, peržiūrėkite ir prieš paleidimą patikrinkite.
4. Pasirodžius ekranui „Load Flow Cell“ (pratekamosios kiuvetės įdėjimas), išvalykite ir įdėkite pratekamąją kiuvetę.
5. Užspauskite pratekamosios kiuvetės skląstį ir uždarykite pratekamosios kiuvetės skyriaus dureles.

Prieš pradėdant vykdymą, skląstis turi būti užspaustas, o skyriaus durelės – uždarytos. Įdėjus pratekamąją kiuvetę, programinė įranga nuskaity ir įrašo RFID. Apatiniame dešiniajame ekrano kampe pasirodo patvirtinimas, kad RFID buvo sėkmingai nuskaitytas.

6. Vadovaudamiesi programinės įrangos raginimais, įdėkite „MiSeqDx“ SBS tirpalo (PR2) buteliuką, įsitikinkite, kad atliekų butelis tuščias, ir įdėkite reagentų kasetę.
Įdėjus „MiSeqDx“ SBS tirpalo (PR2) buteliuką ir reagentų kasetę, programinė įranga nuskaity bei įrašo RFID. Apatiniame dešiniajame ekrano kampe pasirodo patvirtinimas, kad RFID buvo sėkmingai nuskaitytas.
7. Prasidėjus vykdymui atsiradys sekoskaitos langas. Šiame lange matysite proceso vizualizaciją, įskaitant intensyvumą ir kokybės įverčius.

Rezultatai

Analizė realiuoju laiku (RTA) programinė įranga atlieka vaizdo analizę ir bazių priskyrimą bei kiekvienai kiekvieno sekos nustatymo ciklo bazei priskiria kokybės įvertį. Pasibaigus pirminei analizei, „MiSeqDx“ prietaiso modulis, pasirinktas atliekant veiksmą [Sukurti vykdymą su „Local Run Manager“ 7 psl.](#), pradeda antrinę analizę. Kitos darbo eigos nurodytos konkrečiau tyrimo dokumentuose.

Kokybės kontrolės procedūros

MiSeqDx programinė įranga kiekvieną vykdymą, mėginio ir bazės priskyrimą įvertina pagal kokybės kontrolės metriką. Kai reikia, taip pat būtina įvertinti teigiamas ir neigiamas kontrolines medžiagas, naudojamas ruošiant bibliotekas.

Veikimo charakteristikos

Visi tyrimai buvo atlikti „MiSeqDx“ prietaisu.

Atliekant „Germline“ tyrimus, bibliotekoms paruošti buvo naudojami „MiSeqDx“ cistinės fibrozės 139 variantų tyrimas arba „TruSeq Custom Amplicon Kit Dx“ reagentai. Šiuose dviejuose rinkiniuose naudojami tokie patys bibliotekų paruošimo reagentai, o jų darbo eigos skiriasi tik vienu aspektu: polimerazės grandininės reakcijos (PGR) ciklų skaičiumi (atitinkamai 25 ir 28). Papildomi PGR ciklai suteikia galimybę naudoti mažesnę DNR įvestį su „TruSeq Custom Amplicon Kit Dx“ (50 ng), palyginti su „MiSeqDx“ cistinės fibrozės 139 variantų tyrimu (250 ng), kaip parodyta DNR įvesties tyrime naudojant „TruSeq Custom Amplicon Kit Dx“. Bibliotekų, paruoštų naudojant „MiSeqDx“ cistinės fibrozės 139 variantų tyrimą, sekos nustatymas buvo atliktas naudojant rinkinyje pridėtus sekos nustatymo reagentus. Bibliotekų, paruoštų naudojant „TruSeq Custom Amplicon Kit Dx“, sekos nustatymas buvo atliktas naudojant „MiSeqDx“ 3 v. reagentų rinkinį. Pastarųjų sekos nustatymo reagentų išvestis yra didesnė nei „MiSeqDx“ cistinės fibrozės 139 variantų tyrimo reagentų.

Bandytas apima mėginių pralaidumo diapazonus, palaikomus „MiSeqDx“ reagentų rinkinys „v3 Micro“[™]. Priklausomai nuo tyrimo, „MiSeqDx“ gali palaikyti 1–96 mėginius per paleidimą. „MiSeqDx“ reagentų rinkinys „v3 Micro“[™] sukurtas taip, kad būtų palaikomas mažesnis mėginių pralaidumas šiame diapazone, atliekant pasirinktus tyrimus.

Atliekant somatinių variantų tyrimus, buvo naudojami „TruSeq Custom Amplicon Kit Dx“ ir „MiSeqDx“ 3 v. reagentų rinkinys“.

Buvo vadovojamasi gonocitų linijos arba somatinių variantų darbo eigomis, kuriose aprašyta, kaip, naudojant „TruSeq Custom Amplicon Kit Dx“, bibliotekas paruošti sekai nustatyti, ir atlikta analizė atitinkamai naudojant „Germline“ variantų modulį arba „Somatic“ variantų modulį, išskyrus du atvejus. Atliekant tyrimus, kuriuose kaip reprezentatyvios mutacijų grupės buvo naudojamas vienas genas („Germline“ veikimo charakteristikos; „MiSeqDx“ cistinės fibrozės 139 variantų tyrimas) arba du genai („Somatic“ veikimo charakteristikos), buvo naudojamos konkreitiems tyrimams skirtos darbo eigos ir analizės moduliai.

PASTABA Amplikonų genomo turinys apibendrintas palyginti su nuskaitytos sekos genomo gija. Amplikonų, sukurtų pagal minusinę giją, referentinio genomo turinys yra atvirkštinis komplementas (pavyzdžiui, PolyA sritys minusinės gijos amplikonuose atitinka PolyT sritis referentiniame genome).

Skaičiavimų, naudojamų veikimo charakteristikose, apibrėžtys

- Teigiama procentinė atitiktis (PPA) apskaičiuojama kaip lokusų, kurie referentiniu metodu klasifikuojami kaip variantai, dalis, tiksliai pateikiama tyrime.
 - (tiksliai tyrime nurodomų variantų padėčių kiekis) / (bendrasis variantų padėčių kiekis)
Tyrime pateikiami variantų lokusai, atitinkantys referentinio metodo reikalavimus, yra tikrosios teigiamos reikšmės (TP). Variantų lokusai, tyrime pateikiami kaip referencijos priskyrimai arba skirtingi variantų priskyrimai, yra klaidingi neigiamieji (FN)
- Neigiama procentinė atitiktis (NPA) apskaičiuojama kaip lokusų, kurie referentiniu metodu klasifikuojami kaip nemutantinio tipo, dalis, tiksliai pateikiama tyrime.
 - (Nemutantinio tipo lokusų, kurie tiksliai pateikiami tyrime, sk.) / (bendrasis nemutantinio tipo lokusų sk.)
Tyrime pateikiami nemutantinio tipo lokusai, atitinkantys referentinio metodo reikalavimus, yra tikrosios neigiamos reikšmės (TN). Nemutantinio tipo lokusai, tyrime pateikiami kaip variantai, yra klaidingi teigiamieji (FP).
- Bendroji procentinė atitiktis (OPA) apskaičiuojama kaip lokusų, kurie tiksliai pateikiami tyrime, dalis, referentinio metodo atžvilgiu.
 - ((tyrime tiksliai nurodytų variantų lokusų kiekis) + (tyrime tiksliai nurodytų nemutantinio tipo lokusų kiekis)) / (bendrasis variantų lokusų kiekis) / (bendrasis nemutantinio tipo lokusų kiekis))

- Kai naudojant siekiama priskirti variantus, skaičiuojant PPA, NPA ir OPA neįtraukiami nepriskyrimai (variantų ar referentinių lokusų, neatitinkančių vieno ar kelių kokybės filtrų sąlygų). Dviejuose tyrimuose nepriskyrimai konkrečiai įtraukti į metriką „Teisingų priskyrimų procentas“, o apie šį įtraukimą pažymima taikomose lentelėse.
- Priskyrimo dažnis apskaičiuojamas bendrąjį filtrų sąlygas atitinkančių lokusų skaičių padalijus iš bendrojo 1–22 chromosomų nuskaitytos sekos padėčių skaičiaus. Neįtraukiamos X ir Y chromosomos. Ši metrika neatsižvelgia į priskyrimų atitikimą referentiniam metodui.

Norėdami sužinoti veikimo charakteristikas, susijusias su prieš analizę galiojančiais veiksniais (pvz., išskyrimo metodais ar DNR įvestimi), žr. taikomo bibliotekų paruošimo metodo pakuotės lapelį.

Mėginių indeksavimas

Mėginių indekso pradmenys, pridėti ruošiant bibliotekas, kiekvienai mėginio DNR priskiria unikalią seką, todėl kelis mėginius galima sukaupti į vieną sekos nustatymo vykdymą. Mėginių indeksavimo funkcija ištirta su gonocitų linijos ir su somatinių variantų darbo eigomis.

Buvo iširti iš viso 96 mėginių indeksai atliekant reprezentatyvų tyrimą, skirtą įvairiems genams analizuoti ir apimantį 12 588 kiekvienos gijos bazes visose 23 žmogaus chromosomose, siekiant patikrinti, ar tyrimu galima nuosekliai priskirti konkretaus mėginio genotipus, kai taikomi skirtingi indeksavimo pradmenų deriniai. Y chromosomoje nėra didelio pasiklovimo sričių, todėl ji nebuvo vertinama. Buvo iširti aštuoni unikalūs mėginiai, kiekvienam iš jų taikant 12 skirtingų indeksavimo pradmenų derinių. Mėginių rezultatai, gauti iš „Germline“ analizės modulio, buvo palyginti su „Platinum Genomes“ 2016-01 versija. Kiekvieno iš 96 indeksų derinių PPA (SNV variantai ir intarpai / iškritos) viršijo 97 % (teisingai teigiamų SNV priskyrimų buvo mažiausiai 70, intarpų – 38, iškritų – 36), o NPA buvo 100 % (mažiausiai 23 440 referentinių padėčių kiekviename indeksų derinyje). Atskirai buvo išbandytas vienas indeksas siekiant patvirtinti, kad, naudojant „MiSeqDx“ 3 v. reagentų rinkinys“ sekos nustatymo chemines medžiagas, galima iširti mažiau nei aštuonis mėginius (naudojant ankstesnes „MiSeqDx“ 1.0 v. universaliojo rinkinio chemines medžiagas, buvo galima tirti mažiausiai aštuonis mėginius). Vieno indekso SNV PPA vertė buvo 98,9 % (180 / 182), intarpų – 100 % (38 / 38), o iškritų – 100 % (46 / 46). NPA buvo 100 % (23 856 / 23 856).

Buvo ištirta dvylika mėginio replikatų (24 bibliotekos), siekiant išmatuoti indeksų tikslumą, naudojant 0,05–0,10 dažnio somatinius variantus ir „Somatic“ variantų modulį (somatiniams priskyrimams atlikti kiekvienam replikatui naudojami du indeksų deriniai). SNV (64 / 64), intarpų (11 / 11) ir iškritų (19 / 19) PPA buvo 100 %. Visų indeksų derinių NPA buvo 100 % (mažiausiai 11 590 referentinių padėčių kiekvienam indeksų deriniui).

Mėginių pernaša

„MiSeqDx“ prietaiso darbo eiga apima bibliotekų paruošimą ir kelių mėginių sekos nustatymą bei vienu metu apdorojamus kontrolinius mėginius. Buvo atliktas mėginių pernašos tyrimas siekiant įvertinti, ar klaidingai teigiami rezultatai, gauti dėl pernašos ir šulinėlių užteršimo ruošiant mėginių bibliotekas bei dėl vykdymų užteršimo tarp vieno po kito vykdymų sekos nustatymų, turi įtakos tyrimų rezultatams. Buvo naudojami somatiniai variantai, nes juos galima aptikti esant mažesnio alelių dažnio įvykiams nei gonocitų linijos variantus.

Atliekant reprezentatyvųjį dviejų genų tyrimą, mėginius sudarė keturi genomo DNR mėginiai iš ląstelių linijų (kiekviename iš jų – skirtingos grupės mutacijos). Mėginiai buvo parinkti taip, kad kokioje nors vieno iš jų padėtyje esanti mutacija turėtų referentinę (nemutantinio tipo) seką kituose.

Pernaša iš vieno šulinėlio į kitą apibrėžiama kaip trikties tipas, sukurtas rankomis atliekant apdorojimo veiksmus (pipetavimą, mėginių maišymą ir kt.). Siekiant įvertinti pernašą iš vieno mėginių šulinėlio į kitą, buvo atlikti toliau nurodyti du tyrimų vykdymai:

- Šachmatų lentos principu išdėstytas didelės įvesties genomo DNR (gDNR) mėginys, kuriame yra 1 geno mutacija, jį keičiant mažos įvesties gDNR, kurioje yra 2 geno mutacija, mėginiu.
- Šachmatų lentos principu išdėstytas didelės įvesties gDNR mėginys, kuriame yra 2 geno mutacija, jį keičiant mažos įvesties gDNR, kurioje yra 1 geno mutacija, mėginiu.

Atliekant kiekvieną vykdymą buvo įvertinta, ar klaidingų teigiamųjų (pvz., šulinėlyje deklaruota 1 geno mutacija, nurodyta kaip 2 geno mutantinio tipo mėginys, arba atvirkščiai) nėra 12-oje replikatų.

Pernaša iš vieno vykdymo į kitą apibrėžiama kaip trikties tipas, galbūt atsiradęs dėl ankstesnio sekos nustatymo vykdymo nuosėdų. Siekiant nustatyti, ar yra pernaša tarp sekos nustatymo vykdymų, buvo paruoštos dvi plokštelės; kiekvienoje iš jų buvo 11 vieno unikalios didelės įvesties gDNR mėginio replikatų ir tuščiasis mėginys; taip pat „MiSeqDx“ prietaise buvo atliktas plokštelių sekos nustatymas ir patikrinta, ar jose nėra klaidingų teigiamųjų. Pirmąjį vykdymą sudarė 11 2 geno mutantinio tipo mėginio replikatų ir vienas tuščiasis mėginys. Antrąjį vykdymą sudarė 11 1 geno mutantinio tipo mėginio replikatų ir 1 tuščiasis mėginys. Pirmiausia buvo atliktas 2 geno mutantinio tipo mėginių bibliotekos sekos nustatymas, tada – 1 geno mutantinio tipo mėginių bibliotekos sekos nustatymo vykdymas, tada – dar vienas 2 geno mutantinio tipo mėginių bibliotekos sekos nustatymo vykdymas. Jei, atliekant 1 geno tik mutantinio tipo mėginių vykdymą, pastebima bet kokių 2 geno mutacijų, ir atvirkščiai, tai nurodo pernašą.

Nebuvo deklaruota nė vieno klaidingo teigiamojo (0 / 24, 0 %), atsiradusio dėl pernašos iš vieno šulinėlio į kitą. Buvo aptiktos visos numatytos mutacijos. Nebuvo deklaruota nė vieno klaidingo teigiamojo (0 / 24, 0 %), atsiradusio dėl pernašos iš vieno vykdymo į kitą. Buvo aptiktos visos numatytos mutacijos. Nebuvo deklaruota nė vieno klaidingo teigiamojo (0 / 48, 0 %), atsiradusio dėl bendrosios pernašos (iš vieno šulinėlio į kitą ir iš vieno vykdymo į kitą).

„Germline“ veikimo charakteristikos

Čia aprašytuose tyrimuose naudojant „Germline“ variantų modulį buvo analizuojami sekos nustatymo duomenys, išskyrus tuos tyrimus, kuriuose buvo naudojama vieno geno grupė ir konkrečiam tyrimui skirtas modulis.

Tikslumas

Siekiant įvertinti „MiSeqDx“ prietaiso tikslumą, kai naudojamas „MiSeqDx“ 3 v. reagentų rinkinys“ rinkinys ir aukštos kokybės DNR, buvo atliktas tolesnis tyrimas. Tyrime buvo naudojamas reprezentatyvusis tyrimas, skirtas įvairiems genams analizuoti, apimantis 12 588 bazes iš 23 skirtingų chromosomų, naudojant 150 amplikonų. Y chromosomoje nėra didelio pasiklovimo sričių, todėl ji nebuvo vertinama. Šiame tyrime naudoti 12 unikalių mėginių yra iš vienos šeimos – dviejų tėvų ir 10 vaikų – mėginių sekos nustatymas buvo dažnai atliekamas keliose laboratorijose ir taikant kelias sekos nustatymo metodologijas. Penki mėginiai yra moterų, o septyni – vyrų. Kiekvienas mėginys buvo tiriamas dviem egzemplioriais. SNV, intarpų ir iškritų tikslumas buvo nustatytas tyrimo duomenis palyginus su išsamiai apibūdinta referentine duomenų baze. Referentinė duomenų bazė („Platinum Genomes“ 2016-01 versija) buvo sukurta sujungus kelias sekos nustatymo metodologijas, viešai prieinamus duomenis ir informaciją apie paveldėjimą. Remiantis šiuo referentiniu metodu buvo apibrėžtos didelio pasiklovimo genomo sritys, nebent nurodyta kitaip. Iš viso buvo atlikti aštuoni mėginių vykdymai; tikslumui parodyti pateiktose lentelėse naudojami pirmojo vykdymo duomenys.

lentelė 1 pateikiami tyrimo duomenys su teigiama ir neigiama procentine atitiktimi kiekvieno mėginio atveju, o variantų rezultatai dėl PPA skaičiavimo palyginami su išsamiai apibūdintu kompozitiniu referentiniu metodu. Trys variantų tipai (SNV, intarpai ir iškritos) sujungiami. Kadangi taikant referentinį metodą rezultatai gaunami tik apie vieno nukleotido variantus ir intarpus / iškritas, dėl NPA skaičiavimo ne variantų bazių rezultatai palyginami su žmogaus genomo referentinės sekos hg19 versija.

lentelė 1 „MiSeqDx“ prietaiso kiekvieno mėginio bazių priskyrimo rezultatų atitiktis

Mėginys	Vidutinis priskyrimo dažnis	Iš viso variantų	Iš viso TP variantų	Iš viso FN variantų	Iš viso nepriskyrimų	Iš viso TN priskyrimų	PPA	NPA	OPA
NA12877	>99,9	152	152	0	4	24 024	100	100	100
NA12878	>99,9	270	266	0	4	23 856	100	100	100
NA12879	>99,9	192	190	1	1	24 054	99,5	100	>99,9

Mėginys	Vidutinis priskyrimo dažnis	Iš viso variantų	Iš viso TP variantų	Iš viso FN variantų	Iš viso nepriskyrimų	Iš viso TN priskyrimų	PPA	NPA	OPA
NA12880	>99,9	222	220	0	6	24 052	100	100	100
NA12881	>99,9	250	247	1	2	23 862	99,6	100	>99,9
NA12882	>99,9	200	196	2	2	23 962	99,0	100	>99,9
NA12883	>99,9	226	224	0	6	23 870	100	100	100
NA12884	>99,9	228	226	1	1	23 942	99,6	100	>99,9
NA12885	>99,9	244	240	2	2	23 942	99,2	100	>99,9
NA12886	>99,9	230	228	1	1	23 888	99,6	100	>99,9
NA12888	>99,9	216	216	0	4	24 002	100	100	100
NA12893	>99,9	236	234	0	2	23 810	100	100	100

Reprezentatyvų tyrimą sudarė 150 amplikonų, skirtų įvairiam genomo turiniui apimti. Amplikonų GC turinio intervalas – 26–87 %. Be amplikonų, taip pat pasitaikė įvairių vienkartinų pasikartojančių nukleotidų (pvz., PolyA, PolyT), dinukleotidų ir trinukleotidų. Duomenys buvo kaupiami apie kiekvieną amplikoną ([lentelė 2](#)) siekiant nustatyti genomo turinio poveikį tinkamų priskyrimų procentui. Tinkamų priskyrimų procentą sudaro variantų ir referencijos priskyrimai; jei yra klaidingų priskyrimų arba kažkas nepriskiriama, šis procentas yra mažesnis už 100 %. Kai, priskiriant variantus, neįvykdomos vieno ar kelių filtrų sąlygos (pvz., nepakankama aprėptis), niekas nepriskiriama.

Iš aštuonių [lentelė 2](#) pateiktų FN variantų septyniuose į 111 amplikoną, kurio sudėtyje taip pat yra PolyA homopolimeras ir kurio GC turinys – 0,29, įterpta 1 bp. Likęs 1 FN (neteisingas priskyrimas) atsirado dėl numatyto heterozigotinio SNV 125 amplikone, kurio GC turinys – 0,68, vadinamame homozigotiniu variantu. SNV variantų dažnis buvo 0,71, kuris yra didesnis nei 0,70 – klasifikavimo homozigotiniais variantais slenkstinė vertė. Amplikonas, kurio teisingų priskyrimų procentas buvo mažiausias (98,2 %), buvo 17-asis – 40 nepriskyrimo atvejų, AT pakartojimai ir 27 % GC turinys.

lentelė 2 „MiSeqDx“ prietaiso ampliconų lygio tikslumas

Amplikonas	Chromosoma	Amplikono pradžia	Amplikono pabaiga	Analizuoto fragmento dydis	Bazės didelio pasiklovimo srityse	Amplikonų geno turinys	GC turinys	Iš viso teisingų priskyrimų	Iš viso neteisingų priskyrimų	Iš viso nepriskyrimų	Teisingų priskyrimų proc.
1	1	36450499	36450591	93	93	Intarpas / iškrita	0,22	2232	0	0	100
2	1	109465122	109465200	79	79	PolyA (5), PolyC (5), intarpas / iškrita	0,38	1896	0	0	100
3	1	218353867	218353957	91	91	Intarpas / iškrita	0,4	2184	0	0	100
4	1	223906657	223906748	92	92	Intarpas / iškrita	0,49	2208	0	0	100
5	1	228526602	228526682	81	81	PolyG (5)	0,69	1944	0	0	100
6	1	236372039	236372108	70	70	PolyT (10), intarpas / iškrita	0,39	1680	0	0	100
7	1	247812041	247812128	88	88	PolyA (5), CT(3), TAA(3), intarpas / iškrita	0,27	2112	0	0	100
8	2	55862774	55862863	90	90	Intarpas / iškrita	0,28	2160	0	0	100
9	2	87003930	87004009	80	80	Intarpas / iškrita	0,38	1920	0	0	100
10	2	177016721	177016805	85	81	Netaikoma	0,65	1944	0	0	100
11	2	186625727	186625801	75	75	PolyA (8)	0,35	1800	0	0	100
12	2	190323504	190323591	88	88	PolyT (5)	0,42	2112	0	0	100
13	2	200796740	200796826	87	87	PolyT (5), intarpas / iškrita	0,31	2088	0	0	100
14	2	212245049	212245139	91	91	PolyT (5), PolyA (6), intarpas / iškrita	0,3	2184	0	0	100
15	2	228147052	228147144	93	93	Netaikoma	0,43	2232	0	0	100
16	2	235016350	235016422	73	73	PolyT (5), intarpas / iškrita	0,42	1752	0	0	100
17	3	4466229	4466321	93	93	AT(3), intarpas / iškrita	0,27	2192	0	40	98,2
18	3	46620561	46620643	83	83	Netaikoma	0,43	1992	0	0	100
19	3	49851331	49851400	70	70	CT(3), intarpas / iškrita	0,49	1680	0	0	100
20	3	189713161	189713248	88	88	PolyA (5), PolyT (5), PolyA (9), TG (3)	0,41	2112	0	0	100
21	3	190106030	190106104	75	74	Intarpas / iškrita	0,57	1774	0	2	99,9
22	4	2233667	2233744	78	78	PolyA (6)	0,26	1872	0	0	100
23	4	7780541	7780637	97	97	PolyG (6), PolyT (5), PolyA (5)	0,42	2328	0	0	100

Amplikonas	Chromosoma	Amplikono pradžia	Amplikono pabaiga	Analizuoto fragmento dydis	Bazės didelio pasiklovimo srityse	Amplikonų genomo turinys	GC turinys	Iš viso teisingų priskyrimų	Iš viso neteisingų priskyrimų	Iš viso nepriskyrimų	Teisingų priskyrimų proc.
24	4	15688604	15688681	78	78	Netaikoma	0,29	1872	0	0	100
25	4	56236521	56236586	66	62	PolyA (5), intarpas / iškrita	0,36	1488	0	0	100
26	4	102839244	102839314	71	69	PolyA (5)	0,46	1656	0	0	100
27	4	164446743	164446804	62	62	PolyA (7), intarpas / iškrita	0,27	1488	0	0	100
28	5	1882081	1882158	78	75	Netaikoma	0,78	1800	0	0	100
29	5	14769061	14769144	84	84	GT(3), CCA(3)	0,62	2016	0	0	100
30	5	41069808	41069871	64	64	Netaikoma	0,39	1536	0	0	100
31	5	74077114	74077196	83	83	PolyA (6), intarpas / iškrita	0,3	1992	0	0	100
32	5	147475343	147475409	67	67	PolyT (5)	0,37	1608	0	0	100
33	5	149323731	149323821	91	91	CT(4), AG(3)	0,55	2184	0	0	100
34	5	155662213	155662287	75	75	Intarpas / iškrita	0,43	1800	0	0	100
35	6	6318713	6318814	10	10	PolyG (6)	0,68	2448	0	0	100
36	6	24949983	24950074	92	92	Intarpas / iškrita	0,63	2208	0	0	100
37	6	31084900	31084999	100	94	GCT(5), intarpas / iškrita	0,61	2244	0	12	99,5
38	6	32147987	32148084	98	98	PolyT (5), TCT (3), CTT (3)	0,55	2352	0	0	100
39	6	32986864	32986958	95	95	Intarpas / iškrita	0,53	2280	0	0	100
40	6	33408498	33408583	86	86	PolyC (6)	0,7	2064	0	0	100
41	6	41647401	41647495	95	94	PolyG (5), intarpas / iškrita	0,61	2256	0	0	100
42	6	112435865	112435955	91	91	PolyA (5)	0,44	2184	0	0	100
43	7	22202076	22202148	73	73	Netaikoma	0,44	1752	0	0	100
44	7	66276100	66276187	88	88	Intarpas / iškrita	0,35	2112	0	0	100
45	7	77365735	77365821	87	87	PolyA (7), AG (4)	0,26	2088	0	0	100
46	7	110939946	110940030	85	85	Intarpas / iškrita	0,38	2040	0	0	100
47	7	128533468	128533557	90	90	PolyG (5), intarpas / iškrita	0,62	2160	0	0	100
48	7	149503875	149503965	91	91	PolyG (6), PolyC (6), intarpas / iškrita	0,71	2184	0	0	100
49	7	154404519	154404599	81	66	Netaikoma	0,31	1584	0	0	100
50	7	156476507	156476599	93	93	Intarpas / iškrita	0,35	2232	0	0	100

Amplikonas	Chromosoma	Amplikono pradžia	Amplikono pabaiga	Analizuoto fragmento dydis	Bazės didelio pasiklovimo srityse	Amplikonų genomo turinys	GC turinys	Iš viso teisingų priskyrimų	Iš viso neteisingų priskyrimų	Iš viso nepriskyrimų	Teisingų priskyrimų proc.
51	8	1817312	1817394	83	83	Netaikoma	0,42	1992	0	0	100
52	8	24811020	24811109	90	89	PolyG (7), CTC(4), intarpas / iškrita	0,61	2113	0	23	98,9
53	8	76518625	76518691	67	67	Intarpas / iškrita	0,3	1608	0	0	100
54	9	103054909	103055006	98	98	PolyG (6)	0,67	2352	0	0	100
55	9	105586150	105586214	65	65	Intarpas / iškrita	0,32	1560	0	0	100
56	9	107620823	107620918	96	96	Netaikoma	0,49	2304	0	0	100
57	9	123769149	123769231	83	83	AT(3)	0,37	1992	0	0	100
58	9	138995345	138995441	97	97	PolyC (6), intarpas / iškrita	0,68	2328	0	0	100
59	10	5987120	5987198	79	78	PolyG (5), intarpas / iškrita	0,47	1872	0	0	100
60	10	11784629	11784726	98	91	GC(3)	0,87	2184	0	0	100
61	10	27317777	27317855	79	79	PolyT (5)	0,3	1896	0	0	100
62	10	33018351	33018440	90	90	PolyA (5), PolyT (5)	0,2	2160	0	0	100
63	10	45084159	45084253	95	95	Intarpas / iškrita	0,35	2280	0	0	100
64	10	55892599	55892687	89	88	AC(11), intarpas / iškrita	0,42	2102	0	10	99,5
65	10	101611250	101611329	80	80	Netaikoma	0,49	1920	0	0	100
66	10	118351373	118351453	81	81	Netaikoma	0,51	1944	0	0	100
67	11	8159816	8159912	97	96	Netaikoma	0,45	2304	0	0	100
68	11	30177648	30177717	70	70	Intarpas / iškrita	0,46	1680	0	0	100
69	11	47470345	47470444	100	100	Netaikoma	0,65	2400	0	0	100
70	11	59837679	59837740	62	62	Intarpas / iškrita	0,37	1488	0	0	100
71	11	64418856	64418957	102	102	Netaikoma	0,59	2448	0	0	100
72	11	93529612	93529684	73	73	PolyA (5)	0,4	1752	0	0	100
73	11	101347052	101347136	85	85	Netaikoma	0,42	2040	0	0	100
74	11	102477336	102477426	91	91	PolyG (6)	0,55	2184	0	0	100
75	11	118406285	118406369	85	85	Intarpas / iškrita	0,53	2040	0	0	100
76	11	120357801	120357885	85	85	PolyA (5), CA(3), intarpas / iškrita	0,34	2040	0	0	100
77	11	125769313	125769397	85	85	GA(3)	0,52	2040	0	0	100

Amplikonas	Chromosoma	Amplikono pradžia	Amplikono pabaiga	Analizuoto fragmento dydis	Bazės didelio pasiklovimo srityse	Amplikonų geno turinys	GC turinys	Iš viso teisingų priskyrimų	Iš viso neteisingų priskyrimų	Iš viso nepriskyrimų	Teisingų priskyrimų proc.
78	12	2834770	2834853	84	84	PolyC (5), intarpas / iškrita	0,52	2016	0	0	100
79	12	26811004	26811096	93	93	PolyA (7), AC (4)	0,33	2232	0	0	100
80	12	30881766	30881846	81	81	Netaikoma	0,49	1944	0	0	100
81	12	88474105	88474175	71	71	PolyA (6)	0,35	1704	0	0	100
82	12	120966872	120966966	95	95	PolyG (5)	0,68	2280	0	0	100
83	13	24167504	24167576	73	73	Netaikoma	0,52	1752	0	0	100
84	13	25816961	25817049	89	88	PolyA (5), PolyT (7), PolyA (7), intarpas / iškrita	0,22	2112	0	0	100
85	13	44880112	44880200	89	89	Intarpas / iškrita	0,49	2136	0	0	100
86	13	77665218	77665294	77	77	Intarpas / iškrita	0,39	1848	0	0	100
87	14	31619327	31619393	67	67	GA(3), TA(3)	0,39	1608	0	0	100
88	14	39517884	39517966	83	83	Netaikoma	0,25	1992	0	0	100
89	14	46958962	46959034	73	72	PolyT (5), intarpas / iškrita	0,19	1727	0	1	99,9
90	14	58050030	58050110	81	81	Intarpas / iškrita	0,38	1944	0	0	100
91	14	82390559	82390649	91	91	Intarpas / iškrita	0,35	2184	0	0	100
92	14	92549544	92549609	66	66	PolyA (5)	0,41	1584	0	0	100
93	14	102808496	102808589	94	94	Intarpas / iškrita	0,62	2256	0	0	100
94	15	43170751	43170848	98	96	PolyC (5)	0,45	2304	0	0	100
95	15	63446149	63446216	68	68	Intarpas / iškrita	0,25	1632	0	0	100
96	15	77879807	77879901	95	93	PolyG (5), intarpas / iškrita	0,68	2232	0	0	100
97	15	81625334	81625428	95	95	PolyT (6)	0,43	2280	0	0	100
98	15	85438263	85438334	72	71	Intarpas / iškrita	0,65	1704	0	0	100
99	15	89817413	89817503	91	91	Netaikoma	0,36	2184	0	0	100
100	15	89864274	89864343	70	70	Intarpas / iškrita	0,56	1680	0	0	100
101	16	1894910	1894972	63	63	Netaikoma	0,27	1512	0	0	100
102	16	28997904	28997998	95	95	PolyC (5)	0,67	2280	0	0	100
103	16	53682908	53682994	87	87	TA(3)	0,41	2088	0	0	100
104	16	57954406	57954509	104	104	PolyC (5)	0,67	2496	0	0	100
105	16	85706375	85706465	91	91	Poly T (5), intarpas / iškrita	0,37	2184	0	0	100

Amplikonas	Chromosoma	Amplikono pradžia	Amplikono pabaiga	Analizuoto fragmento dydis	Bazės didelio pasiklovimo srityse	Amplikonų geno turinys	GC turinys	Iš viso teisingų priskyrimų	Iš viso neteisingų priskyrimų	Iš viso nepriskyrimų	Teisingų priskyrimų proc.
106	17	3563920	3564008	89	89	GC(3)	0,64	2136	0	0	100
107	17	3594191	3594277	87	87	PolyC (5), intarpas / iškrita	0,67	2088	0	0	100
108	17	3970090	3970180	91	91	Intarpas / iškrita	0,46	2184	0	0	100
109	17	16084945	16085037	93	93	Intarpas / iškrita	0,26	2232	0	0	100
110	17	33998759	33998849	91	89	PolyT (5)	0,54	2136	0	0	100
111	17	39589691	39589774	84	82	PolyA (13), intarpas / iškrita (x2)	0,29	1944	7	17	98,8
112	17	41244394	41244484	91	91	PolyA (5)	0,34	2184	0	0	100
113	17	45438866	45438957	92	92	PolyA (7), AT(3), AT(4), AT(4), intarpas / iškrita	0,26	2208	0	0	100
114	17	61502432	61502510	79	79	Intarpas / iškrita	0,41	1887	0	9	99,5
115	17	64023582	64023667	86	86	PolyT (7)	0,22	2064	0	0	100
116	17	72308237	72308320	84	84	GAG(3)	0,62	2016	0	0	100
117	18	2616456	2616522	67	67	GA(3)	0,31	1608	0	0	100
118	18	6980478	6980568	91	91	Netaikoma	0,37	2184	0	0	100
119	18	9888026	9888094	69	69	PolyA (6), TG (3)	0,43	1656	0	0	100
120	18	38836999	38837073	75	75	PolyA (5), intarpas / iškrita	0,37	1800	0	0	100
121	18	47405382	47405462	81	81	CTC(3), intarpas / iškrita	0,47	1944	0	0	100
122	18	54815665	54815749	85	85	CT(3), intarpas / iškrita	0,45	2040	0	0	100
123	18	59773996	59774060	65	65	Netaikoma	0,48	1560	0	0	100
124	19	625143	625241	99	99	Netaikoma	0,59	2376	0	0	100
125	19	18121418	18121491	74	74	Netaikoma	0,68	1775	1	0	99,9
126	19	18186574	18186643	70	70	Netaikoma	0,64	1680	0	0	100
127	20	746056	746149	94	94	Netaikoma	0,61	2256	0	0	100
128	20	10633195	10633276	82	82	AC(3)	0,59	1968	0	0	100
129	20	17705633	17705708	76	76	CT(3)	0,58	1824	0	0	100
130	20	21766821	21766890	70	70	GT(3),TG(4), intarpas / iškrita	0,46	1680	0	0	100
131	20	25278421	25278521	101	101	Intarpas / iškrita	0,63	2424	0	0	100

Amplikonas	Chromosoma	Amplikono pradžia	Amplikono pabaiga	Analizuoto fragmento dydis	Bazės didelio pasiklovimo srityse	Amplikonų genomo turinys	GC turinys	Iš viso teisingų priskyrimų	Iš viso neteisingų priskyrimų	Iš viso nepriskyrimų	Teisingų priskyrimų proc.
132	20	50897302	50897368	67	67	Intarpas / iškrita	0,36	1608	0	0	100
133	20	62331904	62331994	91	88	PolyG (6)	0,73	2112	0	0	100
134	20	62690860	62690946	87	87	Intarpas / iškrita	0,57	2088	0	0	100
135	21	30300823	30300888	66	66	Intarpas / iškrita	0,35	1584	0	0	100
136	21	33694176	33694273	98	98	PolyT (6), CA (3)	0,54	2352	0	0	100
137	21	36710706	36710792	87	87	GT(3), intarpas / iškrita	0,39	2088	0	0	100
138	21	46644924	46644992	69	69	PolyA (6), AG(3), intarpas / iškrita	0,32	1656	0	0	100
139	21	46705575	46705664	90	90	PolyT (5), PolyA (6)	0,5	2160	0	0	100
140	22	25750774	25750873	100	100	Intarpas / iškrita	0,63	2400	0	0	100
141	22	32439233	32439329	97	97	Netaikoma	0,68	2328	0	0	100
142	22	37409844	37409940	97	97	Intarpas / iškrita	0,46	2328	0	0	100
143	22	37637596	37637694	99	99	Netaikoma	0,6	2376	0	0	100
144	22	47081347	47081438	92	92	Intarpas / iškrita	0,66	2208	0	0	100
145	X	15870424	15870492	69	69	PolyT (5)	0,26	1656	0	0	100
146	X	135288543	135288611	69	69	PolyC (5)	0,62	1656	0	0	100
147	X	135290777	135290847	71	71	Netaikoma	0,52	1704	0	0	100
148	Y	2655397	2655461	65	0	Netaikoma	0,55	0	0	0	Netaikoma
149	Y	2655519	2655609	91	0	Netaikoma	0,48	0	0	0	Netaikoma
150	Y	2655609	2655679	71	0	PolyA (5)	0,37	0	0	0	Netaikoma

Nepriskirtų variantų suvestinė pateikta [lentelė 3](#) Lentelėje išvardyti konkretūs filtrai, kuriuos naudojant nieko nepriskirta. Intarpas 111 amplikone buvo filtruotas devyniais iš 16 atvejų, o likę septyni atvejai buvo priskirti kaip referencijos, todėl jie yra FN.

lentelė 3 Variantų nepriskyrimų suvestinė

Amplikono nr.	Chr.:pad.	Variantas	Atitinkamo amplikono turinys	Filtrai	Praleisti variantai	Numatomi variantai	FN priskyrimai
64	10:55892600	TAC > T	AC(11), 42 % GC	R5x9 ¹	10	10	0
111	17:39589692	C > CA	PolyA (13), 29 % GC	R5x9	9	16	7

¹ R5x9: Pakartokite filtravimą. Variantas filtruojamas, jei visas variantas ar jo dalis pakartotinai matomi referentiniame genome šalia varianto padėties. Reikia, kad referencijoje būtų bent devyni pakartojimai, o atsižvelgiama tik į tuos pakartojimus, kurių ilgis yra iki 5 bp.

Mėginio NA12878 sekos nustatymo rezultatai buvo palyginti su didelio pasiklovimo lygio NA12878 genotipu, kurį nustatė Nacionaliniai standartų ir technologijų institutai (NIST) (2.19 v.). Iš 150 amplikonų 92 amplikonai buvo didelio pasiklovimo lygio genomo sričių ribose, 41 amplikonas su NIST seka persidengė iš dalies, o 17 amplikonų visiškai nepersidengė. Palyginimui buvo gauta 10 000 vieno replikato koordinatų. Ne variantų bazių priskyrimai buvo palyginti su žmogaus genomo referentinės sekos 19 versija. Tikslumo rezultatai parodyti [lentelė 4](#).

lentelė 4 „MiSeqDx“ prietaiso mėginio NA12878 bazių priskyrimo atitikties NIST duomenų bazei rezultatai

Mėginys	Amplikonų kiekis	Vidutinis priskyrimo dažnis	Iš viso TP variantų	Iš viso FN variantų	Iš viso TN priskyrimų	Iš viso FP priskyrimų	PPA	NPA	OPA
NA12878	133	99,98	208	0	19 380	0	100	100	100

Buvo atlikta papildoma mėginių analizė, susijusi su mažų intarpų ir iškritų (intarpų / iškritų) priskyrimu ([lentelė 5](#)). Kai kuriais atvejais intarpas / iškrita dažnai pasitaikydavo dviejuose ar daugiau mėginių, kaip matyti stulpelyje „Iš viso mėginių replikatų su intarpu / iškrita“. 12 tinkamų mėginių abiejų replikatų rezultatai pateikti [lentelė 5](#) Iš viso buvo 71 intarpas / iškrita, kurių dydis intarpų atveju buvo 1–24 bp, o iškritų atveju – 1–25 bp. Kiekvienas iš 69 intarpų / iškritų buvo aptikti esant teigiamai procentinei 100 proc. atitiktčiai. Viena iškrita (64 amplikonas; 2 bp iškrita (chr10 55892600 TAC>T) neturėjo tinkamų priskyrimų, nes kiekvienas iš šių variantų buvo be priskyrimo dėl R5x9 filtro. Todėl PPA, kuri neįtraukia jokių priskyrimų, negalėjo būti apskaičiuotas. Kitas indelis, 1 bp intarpas (chr17 39589692 C>CA amplikone 111), taip pat neturėjo tinkamų priskyrimų, nes devyni variantai buvo be priskyrimo dėl R5x9 filtro ir septyni buvo FN priskyrimai.

lentelė 5 Intarpų / iškritų aptikimo „MiSeqDx“ prietaisu suvestinė

Amplikonas	Chromosoma	Padėtis	Analizuoto fragmento dydis	Amplikono intarpo / iškritos tipas ir ilgis	Intarpas / iškrita	Iš viso mėginių replikatų su intarpu / iškrita	Nepriskyrimų sk.	Iš viso neteisingų intarpo / iškritos priskyrimų	Iš viso teisingų intarpo / iškritos priskyrimų	PPA
1	1	36450544	93	25 bp iškrita	GAAAATTTAATGAAACACATTGTCCT>G	2	0	0	2	100
2	1	109465165	79	3 bp iškrita	ACTT>A	12	0	0	12	100
3	1	218353908	91	23 bp intarpas	T>TTTTAATAGCAAAAAGAGGCTAGA	24	0	0	24	100
4	1	223906701	92	17 bp iškrita	GACAGACTGTGAGGAAGA>G	10	0	0	10	100
6	1	236372081	70	5 bp intarpas	C>CTTAAG	10	0	0	10	100
7	1	247812083	88	3 bp intarpas	C>CATG	10	0	0	10	100
8	2	55862804	90	7 bp intarpas	T>TTTGGTAA	14	0	0	14	100
9	2	87003972	80	6 bp iškrita	TTATCTC>T	6	0	0	6	100
13	2	200796749	87	5 bp intarpas	T>TTAAAA	24	0	0	24	100
14	2	212245090	91	12 bp intarpas	C>CTGAAAATAGGAT	14	0	0	14	100
16	2	235016388	73	2 bp intarpas	A>ATG	12	0	0	12	100
17	3	4466274	93	23 bp iškrita	TAACTTAAAATTACAAAATAACCC>T	2	0	0	2	100
19	3	49851375	70	9 bp intarpas	C>CCTGGCTCCT	4	0	0	4	100
21	3	190106071	75	1 bp iškrita	AG>A	20	0	0	20	100
25	4	56236567	66	8 bp iškrita	TAACCGAAA>T	12	0	0	12	100
27	4	164446785	62	11 bp intarpas	T>TTATGGTATTGA	12	0	0	12	100
31	5	74077155	83	4 bp iškrita	TAGTA>T	10	0	0	10	100
34	5	155662255	75	8 bp intarpas	G>GCCTACTGA	20	0	0	20	100
36	6	24950035	92	21 bp iškrita	CCCTGGGTGCTATAGCCCACCA>C	10	0	0	10	100
37	6	31084942	100	3 bp iškrita	GCTT>G	14	0	0	14	100
39	6	32986905	95	25 bp iškrita	CTTTCACITTTCCCGTCTCATGCAAAG>C	12	0	0	12	100
41	6	41647442	95	23 bp iškrita	GGCATGAGGCTTGGTGACATGGCA>G	8	0	0	8	100
44	7	66276142	88	1 bp intarpas	C>CT	16	0	0	16	100
46	7	110939983	85	4 bp iškrita	CAAGT>C	12	0	0	12	100
47	7	128533514	90	1 bp intarpas	T>TC	24	0	0	24	100
48	7	149503916	91	4 bp iškrita	GGATA>G	8	0	0	8	100
50	7	156476548	93	11 bp iškrita	GAATCTGCACTT>G	12	0	0	12	100

Amplikonas	Chromosoma	Padėtis	Analizuoto fragmento dydis	Amplikono intarpo / iškritos tipas ir ilgis	Intarpas / iškrita	Iš viso mėginių replikatų su intarpu / iškrita	Nepriskyrimų sk.	Iš viso neteisingų intarpo / iškritos priskyrimų	Iš viso teisingų intarpo / iškritos priskyrimų	PPA
52	8	24811064	90	1 bp iškrita	AG>A	24	0	0	24	100
53	8	76518677	67	4 bp intarpas	T>TACTG	14	0	0	14	100
55	9	105586193	65	4 bp intarpas	C>CAATT	2	0	0	2	100
58	9	138995370	97	21 bp iškrita	TCTGGGGGGCAGCCCCTGAGGG>T	14	0	0	14	100
59	10	5987158	79	3 bp iškrita	TAAC>T	10	0	0	10	100
63	10	45084202	95	16 bp iškrita	AGCGTCTATAACCAAAT>A	12	0	0	12	100
64	10	55892600	89	2 bp iškrita	TAC>T	10	10	0	0	Netaikoma
68	11	30177690	70	2 bp intarpas	C>CTG	10	0	0	10	100
70	11	59837721	62	8 bp intarpas	T>TTATGAAAA	12	0	0	12	100
75	11	118406328	85	8 bp iškrita	CAGTGTGGA>C	10	0	0	10	100
76	11	120357842	85	2 bp iškrita	CTT>C	10	0	0	10	100
78	12	2834814	84	21 bp intarpas	T>TTCTCAGTACGGTGAACCCAG	24	0	0	24	100
84	13	25817002	89	19 bp intarpas	C>CAAAATATAAAAAGCTCCCT	24	0	0	24	100
85	13	44880152	89	4 bp intarpas	C>CCTGT	12	0	0	12	100
86	13	77665265	77	20 bp iškrita	ATCTATTTCTAATAGACGGC>A	14	0	0	14	100
89	14	46958967	73	22 bp iškrita	TTTAAATTTGAATGTGATAAAA>T	24	0	0	24	100
90	14	58050081	81	4 bp intarpas	C>CTGAT	20	0	0	20	100
91	14	82390602	91	16 bp iškrita	CTTGCTCTATAAACCGT>C	10	0	0	10	100
93	14	102808554	94	5 bp iškrita	CGTGGA>C	10	0	0	10	100
95	15	63446199	68	6 bp iškrita	CAAAATT>C	12	0	0	12	100
96	15	77879862	95	25 bp iškrita	GCCCCTGAGCCAGCCTCCCCTCTTA>G	14	0	0	14	100
98	15	85438311	72	3 bp intarpas	C>CTTG	8	0	0	8	100
100	15	89864316	70	4 bp intarpas	G>GCTAC	8	0	0	8	100
105	16	85706416	91	7 bp iškrita	ATTATTTTC>A	16	0	0	16	100
107	17	3594276	87	1 bp iškrita	TG>T	2	0	0	2	100
108	17	3970133	91	18 bp intarpas	A>ATCCTATTCTACTCTGAAT	10	0	0	10	100
109	17	16084985	93	4 bp intarpas	A>AACAC	10	0	0	10	100
111	17	39589692	84	1 bp intarpas	C>CA	16	9	7	0	0

Amplikonas	Chromosoma	Padėtis	Analizuoto fragmento dydis	Amplikono intarpo / iškritos tipas ir ilgis	Intarpas / iškrita	Iš viso mėginių replikatų su intarpu / iškrita	Nepriskyrimų sk.	Iš viso neteisingų intarpo / iškritos priskyrimų	Iš viso teisingų intarpo / iškritos priskyrimų	PPA
112	17	39589739	84	24 bp intarpas	T>TTCTGAAGGTC AAGTCTATCCCTGA	24	0	0	24	100
113	17	45438886	92	4 bp iškrita	CAGTG>C	12	0	0	12	100
114	17	61502459	79	12 bp iškrita	TTTGTATCTGCTG>T	20	0	0	20	100
120	18	38837054	75	22 bp intarpas	T>TGTATCTTAGCAAAGTTTCTCA	24	0	0	24	100
121	18	47405425	81	3 bp intarpas	T>TGAG	20	0	0	20	100
122	18	54815706	85	2 bp iškrita	ACT>A	20	0	0	20	100
130	20	21766863	70	15 bp iškrita	TACTTGAGA ACTGAGG>T	4	0	0	4	100
131	20	25278464	101	5 bp intarpas	A>AGTGGG	20	0	0	20	100
132	20	50897361	67	11 bp intarpas	G>GGAATGTCAGCC	24	0	0	24	100
134	20	62690925	87	16 bp iškrita	TCCTGGCTGGCCTGTGG>T	10	0	0	10	100
135	21	30300873	66	11 bp intarpas	G>GATAAACTTTA	10	0	0	10	100
137	21	36710749	87	21 bp iškrita	ACTCAAGATAACTCATGTTATC>A	16	0	0	16	100
138	21	46644985	69	5 bp iškrita	GTTGTT>G	8	0	0	8	100
140	22	25750814	100	6 bp intarpas	C>CAGGGCA	20	0	0	20	100
142	22	37409885	97	5 bp intarpas	C>CTGTTT	2	0	0	2	100
144	22	47081407	92	10 bp iškrita	GGGCACAGGCA>G	12	0	0	12	100

Atkuriamumas

Buvo atlikti du tyrimai, siekiant įvertinti „MiSeqDx“ prietaiso atkuriamumą, kai jis naudojamas su ląstelių linijomis (1-asis ir 2-asis tyrimai) arba su mažai leukocitų turinčiu krauju, į kurį įmaišyta ląstelių linijų (2-asis tyrimas). 1-ajame tyrime buvo naudojami keli prietaisai. 2-asis tyrimas atliktas keliose vietose.

1 tyrimas

„MiSeqDx“ prietaiso atkuriamumas buvo nustatytas naudojant du prietaisus, du operatorius ir dvi reagentų partijas (iš viso atlikti aštuoni vykdymai). Reprezentatyvusis tyrimas, mėginiai ir referentinis metodas yra tokie patys, kaip aprašyta tikslumo tyrimo atveju.

Pateikiami kiekvieno prietaiso kiekvieno amplikono rezultatai (lentelė 6), siekiant parodyti priskyrimo atkuriamumą visuose prietaisuose. Į tinkamų priskyrimų procentą įtraukti ir klaidingi priskyrimai, ir nepriskyrimai (neįvykdytos vieno ar kelių variantų priskyrimo filtrų sąlygos). Prietaisai generavo panašų nepriskyrimų ir neteisingų priskyrimų skaičių, priklausantį nuo konkretaus amplikono.

lentelė 6 Skirtingų „MiSeqDx“ prietaisų atkuriamumo tyrimo rezultatai (amplikonų lygis)

Amplikonas	Chromosoma	Amplikono pradžia	Amplikono pabaiga	Analizuoto fragmento dydis	Bazės didelio pasiklovimo srityse	Amplikonų genomo turinys	GC turinys	1-asis „MiSeqDx“			2-asis „MiSeqDx“		
								Iš viso teisingų priskyrimų	Iš viso neteisingų priskyrimų	Iš viso nepriskyrimų	Iš viso teisingų priskyrimų	Iš viso neteisingų priskyrimų	Iš viso nepriskyrimų
1	1	36450499	36450591	93	93	Intarpas / iškrita	0,22	8928	0	0	8928	0	0
2	1	109465122	109465200	79	79	PolyA (5), PolyC (5), intarpas / iškrita	0,38	7584	0	0	7584	0	0
3	1	218353867	218353957	91	91	Intarpas / iškrita	0,4	8736	0	0	8736	0	0
4	1	223906657	223906748	92	92	Intarpas / iškrita	0,49	8832	0	0	8832	0	0
5	1	228526602	228526682	81	81	PolyG (5)	0,69	7776	0	0	7776	0	0
6	1	236372039	236372108	70	70	PolyT (10), intarpas / iškrita	0,39	6720	0	0	6720	0	0
7	1	247812041	247812128	88	88	PolyA (5), CT (3), TAA(3), intarpas / iškrita	0,27	8448	0	0	8448	0	0
8	2	55862774	55862863	90	90	Intarpas / iškrita	0,28	8640	0	0	8640	0	0
9	2	87003930	87004009	80	80	Intarpas / iškrita	0,38	7680	0	0	7680	0	0
10	2	177016721	177016805	85	81	Netaikoma	0,65	7775	1	0	7775	1	0
11	2	186625727	186625801	75	75	PolyA (8)	0,35	7200	0	0	7200	0	0
12	2	190323504	190323591	88	88	PolyT (5)	0,42	8448	0	0	8448	0	0
13	2	200796740	200796826	87	87	PolyT (5), intarpas / iškrita	0,31	8352	0	0	8352	0	0
14	2	212245049	212245139	91	91	PolyT (5), PolyA (6), intarpas / iškrita	0,3	8736	0	0	8736	0	0
15	2	228147052	228147144	93	93	Netaikoma	0,43	8928	0	0	8928	0	0
16	2	235016350	235016422	73	73	PolyT (5), intarpas / iškrita	0,42	7008	0	0	7008	0	0

Amplikonas	Chromosoma	Amplikono pradžia	Amplikono pabaiga	Analizuoto fragmento dydis	Bazės didelio pasiklovimo srityse	Amplikonų geno turinys	GC turinys	1-asis „MiSeqDx“			2-asis „MiSeqDx“		
								Iš viso teisingų priskyrimų	Iš viso neteisingų priskyrimų	Iš viso nepriskyrimų	Iš viso teisingų priskyrimų	Iš viso neteisingų priskyrimų	Iš viso nepriskyrimų
17	3	4466229	4466321	93	93	AT(3), intarpas / iškrita	0,27	8761	0	167	8760	0	168
18	3	46620561	46620643	83	83	Netaikoma	0,43	7968	0	0	7968	0	0
19	3	49851331	49851400	70	70	CT(3), intarpas / iškrita	0,49	6720	0	0	6720	0	0
20	3	189713161	189713248	88	88	PolyA (5), PolyT (5), PolyA (9), TG (3)	0,41	8448	0	0	8448	0	0
21	3	190106030	190106104	75	74	Intarpas / iškrita	0,57	7096	0	8	7096	0	8
22	4	2233667	2233744	78	78	PolyA (6)	0,26	7488	0	0	7488	0	0
23	4	7780541	7780637	97	97	PolyG (6), PolyT (5), PolyA (5)	0,42	9312	0	0	9312	0	0
24	4	15688604	15688681	78	78	Netaikoma	0,29	7488	0	0	7488	0	0
25	4	56236521	56236586	66	62	PolyA (5), intarpas / iškrita	0,36	5952	0	0	5952	0	0
26	4	102839244	102839314	71	69	PolyA (5)	0,46	6624	0	0	6624	0	0
27	4	164446743	164446804	62	62	PolyA (7), intarpas / iškrita	0,27	5952	0	0	5952	0	0
28	5	1882081	1882158	78	75	Netaikoma	0,78	7200	0	0	7200	0	0
29	5	14769061	14769144	84	84	GT(3), CCA(3)	0,62	8064	0	0	8064	0	0
30	5	41069808	41069871	64	64	Netaikoma	0,39	6144	0	0	6144	0	0
31	5	74077114	74077196	83	83	PolyA (6), intarpas / iškrita	0,3	7968	0	0	7968	0	0
32	5	147475343	147475409	67	67	PolyT (5)	0,37	6432	0	0	6432	0	0
33	5	149323731	149323821	91	91	CT(4), AG(3)	0,55	8736	0	0	8736	0	0
34	5	155662213	155662287	75	75	Intarpas / iškrita	0,43	7200	0	0	7200	0	0
35	6	6318713	6318814	102	102	PolyG (6)	0,68	9792	0	0	9792	0	0
36	6	24949983	24950074	92	92	Intarpas / iškrita	0,63	8832	0	0	8832	0	0

Amplikonas	Chromosoma	Amplikono pradžia	Amplikono pabaiga	Analizuoto fragmento dydis	Bazės didelio pasiklovimo srityse	Amplikonų geno turinys	GC turinys	1-asis „MiSeqDx“			2-asis „MiSeqDx“		
								Iš viso teisingų priskyrimų	Iš viso neteisingų priskyrimų	Iš viso nepriskyrimų	Iš viso teisingų priskyrimų	Iš viso neteisingų priskyrimų	Iš viso nepriskyrimų
37	6	31084900	31084999	100	94	GCT(5), intarpas / iškrita	0,61	8979	0	45	8979	0	45
38	6	32147987	32148084	98	98	PolyT (5), TCT (3), CTT (3)	0,55	9408	0	0	9408	0	0
39	6	32986864	32986958	95	95	Intarpas / iškrita	0,53	9120	0	0	9120	0	0
40	6	33408498	33408583	86	86	PolyC (6)	0,7	8256	0	0	8256	0	0
41	6	41647401	41647495	95	94	PolyG (5), intarpas / iškrita	0,61	9024	0	0	9024	0	0
42	6	112435865	112435955	91	91	PolyA (5)	0,44	8736	0	0	8736	0	0
43	7	22202076	22202148	73	73	Netaikoma	0,44	7008	0	0	7008	0	0
44	7	66276100	66276187	88	88	Intarpas / iškrita	0,35	8448	0	0	8448	0	0
45	7	77365735	77365821	87	87	PolyA (7), AG (4)	0,26	8352	0	0	8352	0	0
46	7	110939946	110940030	85	85	Intarpas / iškrita	0,38	8160	0	0	8160	0	0
47	7	128533468	128533557	90	90	PolyG (5), intarpas / iškrita	0,62	8550	0	90	8550	0	90
48	7	149503875	149503965	91	91	PolyG (6), PolyC (6), intarpas / iškrita	0,71	8736	0	0	8736	0	0
49	7	154404519	154404599	81	66	Netaikoma	0,31	6336	0	0	6336	0	0
50	7	156476507	156476599	93	93	Intarpas / iškrita	0,35	8928	0	0	8928	0	0
51	8	1817312	1817394	83	83	Netaikoma	0,42	7968	0	0	7968	0	0
52	8	24811020	24811109	90	89	PolyG (7), CTC (4), intarpas / iškrita	0,61	8452	0	92	8449	0	95
53	8	76518625	76518691	67	67	Intarpas / iškrita	0,3	6432	0	0	6432	0	0
54	9	103054909	103055006	98	98	PolyG (6)	0,67	9408	0	0	9408	0	0
55	9	105586150	105586214	65	65	Intarpas / iškrita	0,32	6240	0	0	6240	0	0
56	9	107620823	107620918	96	96	Netaikoma	0,49	9216	0	0	9216	0	0
57	9	123769149	123769231	83	83	AT(3)	0,37	7968	0	0	7968	0	0

Amplikonas	Chromosoma	Amplikono pradžia	Amplikono pabaiga	Analizuoto fragmento dydis	Bazės didelio pasiklovimo srityse	Amplikonų geno turinys	GC turinys	1-asis „MiSeqDx“			2-asis „MiSeqDx“		
								Iš viso teisingų priskyrimų	Iš viso neteisingų priskyrimų	Iš viso nepriskyrimų	Iš viso teisingų priskyrimų	Iš viso neteisingų priskyrimų	Iš viso nepriskyrimų
58	9	138995345	138995441	97	97	PolyC (6), intarpas / iškrita	0,68	9312	0	0	9312	0	0
59	10	5987120	5987198	79	78	PolyG (5), intarpas / iškrita	0,47	7488	0	0	7488	0	0
60	10	11784629	11784726	98	91	GC(3)	0,87	8644	1	91	8644	1	91
61	10	27317777	27317855	79	79	PolyT (5)	0,3	7584	0	0	7584	0	0
62	10	33018351	33018440	90	90	PolyA (5), PolyT (5)	0,2	8640	0	0	8640	0	0
63	10	45084159	45084253	95	95	Intarpas / iškrita	0,35	9120	0	0	9120	0	0
64	10	55892599	55892687	89	88	AC(11), intarpas / iškrita	0,42	8408	0	40	8407	0	41
65	10	101611250	101611329	80	80	Netaikoma	0,49	7680	0	0	7680	0	0
66	10	118351373	118351453	81	81	Netaikoma	0,51	7776	0	0	7776	0	0
67	11	8159816	8159912	97	96	Netaikoma	0,45	9216	0	0	9216	0	0
68	11	30177648	30177717	70	70	Intarpas / iškrita	0,46	6720	0	0	6720	0	0
69	11	47470345	47470444	100	100	Netaikoma	0,65	9600	0	0	9600	0	0
70	11	59837679	59837740	62	62	Intarpas / iškrita	0,37	5952	0	0	5952	0	0
71	11	64418856	64418957	102	102	Netaikoma	0,59	9792	0	0	9792	0	0
72	11	93529612	93529684	73	73	PolyA (5)	0,4	7008	0	0	7008	0	0
73	11	101347052	101347136	85	85	Netaikoma	0,42	8160	0	0	8160	0	0
74	11	102477336	102477426	91	91	PolyG (6)	0,55	8736	0	0	8736	0	0
75	11	118406285	118406369	85	85	Intarpas / iškrita	0,53	8160	0	0	8160	0	0
76	11	120357801	120357885	85	85	PolyA (5), CA (3), intarpas / iškrita	0,34	8160	0	0	8160	0	0
77	11	125769313	125769397	85	85	GA(3)	0,52	8160	0	0	8160	0	0
78	12	2834770	2834853	84	84	PolyC (5), intarpas / iškrita	0,52	8064	0	0	8064	0	0
79	12	26811004	26811096	93	93	PolyA (7), AC (4)	0,33	8928	0	0	8928	0	0

Amplikonas	Chromosoma	Amplikono pradžia	Amplikono pabaiga	Analizuoto fragmento dydis	Bazės didelio pasiklovimo srityse	Amplikonų genomo turinys	GC turinys	1-asis „MiSeqDx“			2-asis „MiSeqDx“		
								Iš viso teisingų priskyrimų	Iš viso neteisingų priskyrimų	Iš viso nepriskyrimų	Iš viso teisingų priskyrimų	Iš viso neteisingų priskyrimų	Iš viso nepriskyrimų
80	12	30881766	30881846	81	81	Netaikoma	0,49	7776	0	0	7776	0	0
81	12	88474105	88474175	71	71	PolyA (6)	0,35	6816	0	0	6816	0	0
82	12	120966872	120966966	95	95	PolyG (5)	0,68	9117	3	0	9119	1	0
83	13	24167504	24167576	73	73	Netaikoma	0,52	7008	0	0	7008	0	0
84	13	25816961	25817049	89	88	PolyA (5), PolyT (7), PolyA (7), intarpas / iškrita	0,22	8448	0	0	8448	0	0
85	13	44880112	44880200	89	89	Intarpas / iškrita	0,49	8544	0	0	8544	0	0
86	13	77665218	77665294	77	77	Intarpas / iškrita	0,39	7392	0	0	7392	0	0
87	14	31619327	31619393	67	67	GA(3),TA(3)	0,39	6432	0	0	6432	0	0
88	14	39517884	39517966	83	83	Netaikoma	0,25	7968	0	0	7968	0	0
89	14	46958962	46959034	73	72	PolyT (5), intarpas / iškrita	0,19	6830	0	82	6835	0	77
90	14	58050030	58050110	81	81	Intarpas / iškrita	0,38	7776	0	0	7776	0	0
91	14	82390559	82390649	91	91	Intarpas / iškrita	0,35	8736	0	0	8736	0	0
92	14	92549544	92549609	66	66	PolyA (5)	0,41	6336	0	0	6336	0	0
93	14	102808496	102808589	94	94	Intarpas / iškrita	0,62	9024	0	0	9024	0	0
94	15	43170751	43170848	98	96	PolyC (5)	0,45	9216	0	0	9216	0	0
95	15	63446149	63446216	68	68	Intarpas / iškrita	0,25	6528	0	0	6528	0	0
96	15	77879807	77879901	95	93	PolyG (5), intarpas / iškrita	0,68	8928	0	0	8926	2	0
97	15	81625334	81625428	95	95	PolyT (6)	0,43	9120	0	0	9120	0	0
98	15	85438263	85438334	72	71	Intarpas / iškrita	0,65	6816	0	0	6816	0	0
99	15	89817413	89817503	91	91	Netaikoma	0,36	8736	0	0	8736	0	0
100	15	89864274	89864343	70	70	Intarpas / iškrita	0,56	6720	0	0	6720	0	0
101	16	1894910	1894972	63	63	Netaikoma	0,27	6048	0	0	6048	0	0
102	16	28997904	28997998	95	95	PolyC (5)	0,67	9120	0	0	9120	0	0
103	16	53682908	53682994	87	87	TA(3)	0,41	8352	0	0	8352	0	0

Amplikonas	Chromosoma	Amplikono pradžia	Amplikono pabaiga	Analizuoto fragmento dydis	Bazės didelio pasiklovimo srityse	Amplikonų geno turinys	GC turinys	1-asis „MiSeqDx“			2-asis „MiSeqDx“		
								Iš viso teisingų priskyrimų	Iš viso neteisingų priskyrimų	Iš viso nepriskyrimų	Iš viso teisingų priskyrimų	Iš viso neteisingų priskyrimų	Iš viso nepriskyrimų
104	16	57954406	57954509	104	104	PolyC (5)	0,67	9984	0	0	9984	0	0
105	16	85706375	85706465	91	91	PolyT (5), intarpas / iškrita	0,37	8736	0	0	8736	0	0
106	17	3563920	3564008	89	89	GC(3)	0,64	8544	0	0	8544	0	0
107	17	3594191	3594277	87	87	PolyC (5), intarpas / iškrita	0,67	8347	0	5	8347	0	5
108	17	3970090	3970180	91	91	Intarpas / iškrita	0,46	8736	0	0	8736	0	0
109	17	16084945	16085037	93	93	Intarpas / iškrita	0,26	8928	0	0	8928	0	0
110	17	33998759	33998849	91	89	PolyT (5)	0,54	8544	0	0	8544	0	0
111	17	39589691	39589774	84	82	PolyA (13), intarpas / iškrita (x2)	0,29	7776	7	89	7777	12	83
112	17	41244394	41244484	91	91	PolyA (5)	0,34	8736	0	0	8736	0	0
113	17	45438866	45438957	92	92	PolyA (7), AT (3), AT(4), AT (4), intarpas / iškrita	0,26	8832	0	0	8832	0	0
114	17	61502432	61502510	79	79	Intarpas / iškrita	0,41	7546	0	38	7547	0	37
115	17	64023582	64023667	86	86	PolyT (7)	0,22	8256	0	0	8256	0	0
116	17	72308237	72308320	84	84	GAG(3)	0,62	8064	0	0	8064	0	0
117	18	2616456	2616522	67	67	GA(3)	0,31	6432	0	0	6432	0	0
118	18	6980478	6980568	91	91	Netaikoma	0,37	8736	0	0	8736	0	0
119	18	9888026	9888094	69	69	PolyA (6), TG (3)	0,43	6624	0	0	6624	0	0
120	18	38836999	38837073	75	75	PolyA (5), intarpas / iškrita	0,37	7200	0	0	7200	0	0
121	18	47405382	47405462	81	81	CTC(3), intarpas / iškrita	0,47	7776	0	0	7776	0	0
122	18	54815665	54815749	85	85	CT(3), intarpas / iškrita	0,45	8160	0	0	8160	0	0
123	18	59773996	59774060	65	65	Netaikoma	0,48	6240	0	0	6240	0	0

Amplikonas	Chromosoma	Amplikono pradžia	Amplikono pabaiga	Analizuoto fragmento dydis	Bazės didelio pasiklovimo srityse	Amplikonų genomo turinys	GC turinys	1-asis „MiSeqDx“			2-asis „MiSeqDx“		
								Iš viso teisingų priskyrimų	Iš viso neteisingų priskyrimų	Iš viso nepriskyrimų	Iš viso teisingų priskyrimų	Iš viso neteisingų priskyrimų	Iš viso nepriskyrimų
124	19	625143	625241	99	99	Netaikoma	0,59	9504	0	0	9504	0	0
125	19	18121418	18121491	74	74	Netaikoma	0,68	7102	2	0	7104	0	0
126	19	18186574	18186643	70	70	Netaikoma	0,64	6718	2	0	6718	2	0
127	20	746056	746149	94	94	Netaikoma	0,61	9024	0	0	9024	0	0
128	20	10633195	10633276	82	82	AC(3)	0,59	7872	0	0	7872	0	0
129	20	17705633	17705708	76	76	CT(3)	0,58	7296	0	0	7296	0	0
130	20	21766821	21766890	70	70	GT(3),TG(4), intarpas / iškrita	0,46	6720	0	0	6720	0	0
131	20	25278421	25278521	101	101	Intarpas / iškrita	0,63	9696	0	0	9696	0	0
132	20	50897302	50897368	67	67	Intarpas / iškrita	0,36	6432	0	0	6432	0	0
133	20	62331904	62331994	91	88	PolyG (6)	0,73	8360	0	88	8360	0	88
134	20	62690860	62690946	87	87	Intarpas / iškrita	0,57	8352	0	0	8352	0	0
135	21	30300823	30300888	66	66	Intarpas / iškrita	0,35	6336	0	0	6336	0	0
136	21	33694176	33694273	98	98	PolyT (6), CA (3)	0,54	9408	0	0	9408	0	0
137	21	36710706	36710792	87	87	GT(3), intarpas / iškrita	0,39	8352	0	0	8352	0	0
138	21	46644924	46644992	69	69	PolyA (6), AG (3), intarpas / iškrita	0,32	6603	0	21	6601	0	23
139	21	46705575	46705664	90	90	PolyT (5), PolyA (6)	0,5	8640	0	0	8640	0	0
140	22	25750774	25750873	100	100	Intarpas / iškrita	0,63	9600	0	0	9600	0	0
141	22	32439233	32439329	97	97	Netaikoma	0,68	9312	0	0	9312	0	0
142	22	37409844	37409940	97	97	Intarpas / iškrita	0,46	9312	0	0	9312	0	0
143	22	37637596	37637694	99	99	Netaikoma	0,6	9504	0	0	9504	0	0
144	22	47081347	47081438	92	92	Intarpas / iškrita	0,66	8832	0	0	8832	0	0
145	X	15870424	15870492	69	69	PolyT (5)	0,26	6624	0	0	6624	0	0
146	X	135288543	135288611	69	69	PolyC (5)	0,62	6624	0	0	6624	0	0

Amplikonas	Chromosoma	Amplikono pradžia	Amplikono pabaiga	Analizuoto fragmento dydis	Bazės didelio pasiklovimo srityse	Amplikonų genomo turinys	GC turinys	1-asis „MiSeqDx“			2-asis „MiSeqDx“		
								Iš viso teisingų priskyrimų	Iš viso neteisingų priskyrimų	Iš viso nepriskyrimų	Iš viso teisingų priskyrimų	Iš viso neteisingų priskyrimų	Iš viso nepriskyrimų
147	X	135290777	135290847	71	71	Netaikoma	0,52	6816	0	0	6816	0	0
148	Y	2655397	2655461	65	0	Netaikoma	0,55	0	0	0	0	0	0
149	Y	2655519	2655609	91	0	Netaikoma	0,48	0	0	0	0	0	0
150	Y	2655609	2655679	71	0	PolyA (5)	0,37	0	0	0	0	0	0

Atkuriamumo tyrimo rezultatai buvo analizuojami kiekvieno operatoriaus atžvilgiu, naudojant variantų dažnį (lentelė 7). Šia analize parodyta, kad visų operatorių variantų dažniai buvo nuoseklūs. Pateikiami vidutiniai variantų dažniai +/- 1 standartinis nuokrypis.

lentelė 7 „MiSeqDx“ prietaiso skirtingų operatorių rezultatai

Variantų dažnių diapazonas	Unikalių variantų sk.	Iš viso išanalizuotų 1 operatoriaus variantų	Iš viso išanalizuotų 2 operatoriaus variantų	1 operatoriaus vidutinis (SD) deklaruotas variantų dažnis	2 operatoriaus vidutinis (SD) deklaruotas variantų dažnis
Homozigotiniai (0,70–1,00)	2424	2424	2422	0,94 +/- 0,07	0,96 +/- 0,05
Heterozigotiniai (0,20–0,70)	8240	8132	8128	0,48 +/- 0,04	0,49 +/- 0,04

Kiekvieno mėginio atkuriamumo tyrimo rezultatai rodomi sujungti iš visų aštuonių vykdymų lentelė 8. Kiekvieno varianto tipo – SNV, intarpų ir iškritų – aptikimas įvertinamas atskirai. Referentinės padėtys neįtraukiamos. Šia analize parodyta, kad variantų rezultatai atkuriami pasirinkus visus mėginius.

lentelė 8 „MiSeqDx“ prietaiso kiekvieno mėginio bazių priskyrimo rezultatų atitiktis

Mėginys	SNVs				Intarpai				Iškritos			
	Iš viso	Iš viso TP	Iš viso FP	Iš viso FN	Iš viso	Iš viso TP	Iš viso FP	Iš viso FN	Iš viso	Iš viso TP	Iš viso FP	Iš viso FN
NA12877	592	592	0	0	336	336	0	0	288	288	0	0
NA12878	1456	1456	0	0	320	304	0	0	384	368	0	0
NA12879	912	912	0	0	336	320	0	2	288	288	0	0

Mėginys	SNVs				Intarpai				Iškritos			
	Iš viso	Iš viso TP	Iš viso FP	Iš viso FN	Iš viso	Iš viso TP	Iš viso FP	Iš viso FN	Iš viso	Iš viso TP	Iš viso FP	Iš viso FN
NA12880	1072	1071	0	1	384	384	0	0	320	304	0	0
NA12881	1248	1247	0	1	384	368	0	0	368	368	0	0
NA12882	944	943	0	1	352	336	0	4	304	288	0	0
NA12883	1088	1087	0	1	368	368	0	0	352	335	0	1
NA12884	1088	1088	0	0	400	384	0	5	336	336	0	0
NA12885	1200	1189	0	7	400	382	0	4	352	336	0	0
NA12886	1104	1102	0	2	368	352	0	3	368	368	0	0
NA12888	1056	1054	0	2	368	368	0	0	304	304	0	0
NA12893	1168	1168	0	0	352	336	0	1	368	368	0	0

Aštuoniais šio atkuriamumo tyrimo vykdymais gauti duomenys pagrindžia teiginį, kad „MiSeqDx“ prietaisas gali nuosekliai atlikti sekos nustatymą toliau nurodytais atvejais:

- GC turinys $\geq 19\%$ (visos priskirtos bazės 192 iš 192 nuskaitytos sekos amplikonuose: 19 % GC turinio priskirta teisingai, o nepriskyrimo dažnis – 1,1 %)
- GC turinys $\leq 78\%$ (visos priskirtos bazės 192 iš 192 nuskaitytos sekos amplikonuose: 78 % GC turinio priskirta teisingai, o nepriskyrimų nebuvo)
- PolyA ilgis ≤ 8 (8 nukleotidų PolyA pakartojimas buvo teisingai priskirtas 192 iš 192 nuskaitytos sekos amplikonų, kurių sudėtyje buvo PolyA = 8)
- PolyT ilgis ≤ 10 (10 nukleotidų PolyT pakartojimas buvo teisingai priskirtas 192 iš 192 nuskaitytos sekos amplikonų, kurių sudėtyje buvo PolyT = 10)
- PolyG ilgis ≤ 7 (7 nukleotidų PolyG pakartojimas buvo teisingai priskirtas 192 iš 192 nuskaitytos sekos amplikonų, kurių sudėtyje buvo PolyG = 7)
- PolyC ilgis ≤ 6 (6 nukleotidų PolyC pakartojimas buvo teisingai priskirtas 576 iš 576 nuskaitytos sekos amplikonų, kurių sudėtyje buvo PolyC = 6)
- Pasikartojančių dinukleotidų ilgis $\leq 11x$ (visos priskirtos bazės 192 iš 192 nuskaitytos sekos amplikonų su 11x pasikartojančių dinukleotidų buvo priskirtos tinkamai, o nepriskyrimo dažnis – 0,5 %)
- Pasikartojančių trinukleotidų ilgis $\leq 5x$ (visos priskirtos bazės 192 iš 192 nuskaitytos sekos amplikonų su 5x pasikartojančių trinukleotidų buvo priskirtos tinkamai, o nepriskyrimo dažnis – 0,5 %)

- 24 arba mažiau bazių intarpų ir 25 arba mažiau bazių iškritų
 - 24 bazių intarpai teisingai priskirti 192 iš 192 mėginių
 - 25 bazių iškritos teisingai priskirtos 223 mėginiuose, o netinkamai priskirtos 1 mėginyje iš 224 mėginių

2 tyrimas

Atkuriamumo skirtingose tyrimų vietose tyrimas, atliktas naudojant reprezentatyvų tyrimą – Illumina MiSeqDx cistinės fibrozės 139 variantų tyrimą, apėmė *CFTR* klinikinį požiūriu reikšmingų genetinių variacijų, išanalizuotų „MiSeq“ ataskaitų priemonės programine įranga naudojant „MiSeqDx“ tikslingą DNR sekos nustatymo darbo eigą, pogrųpį. Šiame aklame tyrime buvo naudojamos 3 bandomosios tyrimų vietos, o kiekvienoje iš jų – 2 operatoriai. Kiekvienas operatorius kiekvienoje tyrimų vietoje ištyrė dvi išsamiai apibūdintas grupes, kurių kiekvieną sudarė 46 mėginiai: kiekvienoje tyrimų vietoje iš viso atlikta 810 priskyrimų. Grupes sudarė genomo DNR iš ląstelių linijų su žinomais *CFTR* geno variantais bei mažai leukocitų turinčio kraujo, į kurį įmaišyta ląstelių linijų su žinomais *CFTR* geno variantais, mišinys. Kraujo mėginiai buvo pateikti, kad būtų galima įtraukti išskyrimo veiksmus, kuriais paruošiama gDNR – pirminė tyrimo darbo eigos įvestis. Sėkmingai ištirtų mėginių procentas, apibrėžiamas kaip mėginių, pirmuoju bandymu praėjusių KK metriką, skaičius, buvo 99,88 %. Visi tyrimų rezultatai grindžiami pradiniais tyrimų duomenimis.

lentelė 9 Atkuriamumo tyrimo, atlikto naudojant reprezentatyvų „MiSeqDx“ cistinės fibrozės 139 variantų tyrimą, rezultatų suvestinė

Skydelis	Mėginio nr.	Mėginio genotipas	Variantai	Iš viso priskyrimų vienoje tyrimų vietoje	Teigiami atitinkantys priskyrimai (variantai)			Neigiami atitinkantys priskyrimai (nemutantinio tipo)			Netinkamų priskyrimų sk.	Nepriskyrimų sk.	Teigiama atitiktis (%)	Neigiama atitiktis (%)	Bendroji atitiktis (%)
					1	2	3	1	2	3					
					tyrimų vieta	tyrimų vieta	tyrimų vieta	tyrimų vieta	tyrimų vieta	tyrimų vieta					
A	1	S549N (HET)		810	6	6	6	804	804	804	0	0	100	100	100
A	2	1812-1G>A (HET)		810	6	6	6	804	804	804	0	0	100	100	100
A	3	Q493X / F508del (HET)		810	12	12	12	798	798	798	0	0	100	100	100
A	4 ¹	F508del / 2184delA (HET)		810	12	12	12	797	798	798	0	1 ¹	100	100	100

Skydelis	Mėginio nr.	Mėginio genotipas	Variantai	Iš viso priskyrimų vienoje tyrimų vietoje	Teigiami atitinkantys priskyrimai (variantai)			Neigiami atitinkantys priskyrimai (nemutantinio tipo)			Netinkamų priskyrimų sk.	Nepriskyrimų sk.	Teigiama atitiktis (%)	Neigiama atitiktis (%)	Bendroji atitiktis (%)
					1 tyrimų vieta	2 tyrimų vieta	3 tyrimų vieta	1 tyrimų vieta	2 tyrimų vieta	3 tyrimų vieta					
A	5 ²	Y122X / R1158X (HET)		810	12	10	12	798	665	798	0	135 ²	94,44	94,44	94,44
A	6	F508del / 2183AA>G (HET)		810	12	12	12	798	798	798	0	0	100	100	100
A	7	R75X (HET)		810	6	6	6	804	804	804	0	0	100	100	100
A	8	I507del / F508del (HET)		810	12	12	12	798	798	798	0	0	100	100	100
A	9 ³	F508del / W1282X (HET)		810	12	11	12	798	797	798	2 ³	0	97,22	99,96	99,92
A	10 ³	F508del / 3272-26A>G (HET)		810	12	11	12	798	797	798	2 ³	0	97,22	99,96	99,92
A	11	F508del / 3849 + 10kbC>T (HET)		810	12	12	12	798	798	798	0	0	100	100	100
A	12	621 + 1G>T / 3120 + 1G>A (HET)		810	12	12	12	798	798	798	0	0	100	100	100
A	13	E60X / F508del (HET)		810	12	12	12	798	798	798	0	0	100	100	100
A	14	M1101K (HET)		810	6	6	6	804	804	804	0	0	100	100	100
A	15	M1101K (HOM)		810	6	6	6	804	804	804	0	0	100	100	100

Skydelis	Mėginio nr.	Mėginio genotipas	Variantai	Iš viso priskyrimų vienoje tyrimų vietoje	Teigiami atitinkantys priskyrimai (variantai)			Neigiami atitinkantys priskyrimai (nemutantinio tipo)			Netinkamų priskyrimų sk.	Nepriskyrimų sk.	Teigiama atitiktis (%)	Neigiama atitiktis (%)	Bendroji atitiktis (%)
					1 tyrimų vieta	2 tyrimų vieta	3 tyrimų vieta	1 tyrimų vieta	2 tyrimų vieta	3 tyrimų vieta					
A	16	F508del (HOM)	I506V, I507V, F508C nėra	828	6	6	6	822	822	822	0	0	100	100	100
A	17	F508del / 3659delC (HET)		810	12	12	12	798	798	798	0	0	100	100	100
A	18	R117H / F508del (HET)	(TG)10(T)9 / (TG)12(T)5	816	18	18	18	798	798	798	0	0	100	100	100
A	19	621 + 1G>T / 711 + 1G>T (HET)		810	12	12	12	798	798	798	0	0	100	100	100
A	20	G85E / 621 + 1G>T (HET)		810	12	12	12	798	798	798	0	0	100	100	100
A	21	A455E / F508del (HET)		810	12	12	12	798	798	798	0	0	100	100	100
A	22	F508del / R560T (HET)		810	12	12	12	798	798	798	0	0	100	100	100
A	23	F508del / Y1092X (C>A) (HET)		810	12	12	12	798	798	798	0	0	100	100	100
A	24	N1303K (HET)		810	6	6	6	804	804	804	0	0	100	100	100
A	25	G542X (HOM)		810	6	6	6	804	804	804	0	0	100	100	100
A	26	G542X (HET)		810	6	6	6	804	804	804	0	0	100	100	100

Skydelis	Mėginio nr.	Mėginio genotipas	Variantai	Iš viso priskyrimų vienoje tyrimų vietoje	Teigiami atitinkantys priskyrimai (variantai)			Neigiami atitinkantys priskyrimai (nemutantinio tipo)			Netinkamų priskyrimų sk.	Nepriskyrimų sk.	Teigiama atitiktis (%)	Neigiama atitiktis (%)	Bendroji atitiktis (%)
					1 tyrimų vieta	2 tyrimų vieta	3 tyrimų vieta	1 tyrimų vieta	2 tyrimų vieta	3 tyrimų vieta					
A	27	G551D / R553X (HET)		810	12	12	12	798	798	798	0	0	100	100	100
A	28	3849 + 10kbC>T (HOM)		810	6	6	6	804	804	804	0	0	100	100	100
A	29	WT		810	0	0	0	810	810	810	0	0	Netaikoma	100	100
A	30	F508del (HET)		810	6	6	6	804	804	804	0	0	100	100	100
A	31	1717-1G>A (HET)		810	6	6	6	804	804	804	0	0	100	100	100
A	32	R1162X (HET)		810	6	6	6	804	804	804	0	0	100	100	100
A	33	R347P / G551D (HET)		810	12	12	12	798	798	798	0	0	100	100	100
A	34	R334W (HET)		810	6	6	6	804	804	804	0	0	100	100	100
A	35	WT		810	0	0	0	810	810	810	0	0	Netaikoma	100	100
A	36	G85E (HET)		810	6	6	6	804	804	804	0	0	100	100	100
A	37	I336K (HET)		810	6	6	6	804	804	804	0	0	100	100	100
A	38	WT		810	0	0	0	810	810	810	0	0	Netaikoma	100	100
A	39	F508del / 3849 + 10kbC>T (HET)		810	12	12	12	798	798	798	0	0	100	100	100

Skydelis	Mėginio nr.	Mėginio genotipas	Variantai	Iš viso priskyrimų vienoje tyrimų vietoje	Teigiami atitinkantys priskyrimai (variantai)			Neigiami atitinkantys priskyrimai (nemutantinio tipo)			Netinkamų priskyrimų sk.	Nepriskyrimų sk.	Teigiama atitiktis (%)	Neigiama atitiktis (%)	Bendroji atitiktis (%)
					1	2	3	1	2	3					
					tyrimų vieta	tyrimų vieta	tyrimų vieta	tyrimų vieta	tyrimų vieta	tyrimų vieta					
A	40	621 + 1G>T / 3120 + 1G>A (HET)		810	12	12	12	798	798	798	0	0	100	100	100
A	41	F508del / 3659delC (HET)		810	12	12	12	798	798	798	0	0	100	100	100
A	42	R117H / F508del (HET)	(TG)10(T)9 / (TG)12(T)5	816	18	18	18	798	798	798	0	0	100	100	100
A	43	G85E / 621 + 1G>T (HET)		810	12	12	12	798	798	798	0	0	100	100	100
A	44	A455E / F508del (HET)		810	12	12	12	798	798	798	0	0	100	100	100
A	45	N1303K (HET)		810	6	6	6	804	804	804	0	0	100	100	100
A	46	G551D / R553X (HET)		810	12	12	12	798	798	798	0	0	100	100	100
B	47	2789 + 5G>A (HOM)		810	6	6	6	804	804	804	0	0	100	100	100
B	48	CFTR dele2, 3 / F508del (HET)		810	12	12	12	798	798	798	0	0	100	100	100
B	49	F508del / 1898 + 1G>A (HET)		810	12	12	12	798	798	798	0	0	100	100	100
B	50	WT		810	0	0	0	810	810	810	0	0	Netaikoma	100	100

Skydelis	Mėginio nr.	Mėginio genotipas	Variantai	Iš viso priskyrimų vienoje tyrimų vietoje	Teigiami atitinkantys priskyrimai (variantai)			Neigiami atitinkantys priskyrimai (nemutantinio tipo)			Netinkamų priskyrimų sk.	Nepriskyrimų sk.	Teigiama atitiktis (%)	Neigiama atitiktis (%)	Bendroji atitiktis (%)
					1 tyrimų vieta	2 tyrimų vieta	3 tyrimų vieta	1 tyrimų vieta	2 tyrimų vieta	3 tyrimų vieta					
B	51	F508del / 2143delT (HET)		810	12	12	12	798	798	798	0	0	100	100	100
B	52	3876delA (HET)		810	6	6	6	804	804	804	0	0	100	100	100
B	53	3905insT (HET)		810	6	6	6	804	804	804	0	0	100	100	100
B	54	394delTT (HET)		810	6	6	6	804	804	804	0	0	100	100	100
B	55	F508del (HET)		810	6	6	6	804	804	804	0	0	100	100	100
B	56	WT		810	0	0	0	810	810	810	0	0	Netaikoma	100	100
B	57	WT		810	0	0	0	810	810	810	0	0	Netaikoma	100	100
B	58	F508del (HET)		810	6	6	6	804	804	804	0	0	100	100	100
B	59	WT		810	0	0	0	810	810	810	0	0	Netaikoma	100	100
B	60	L206W (HET)		810	6	6	6	804	804	804	0	0	100	100	100
B	61	WT		810	0	0	0	810	810	810	0	0	Netaikoma	100	100
B	62	G330X (HET)		810	6	6	6	804	804	804	0	0	100	100	100
B	63	WT		810	0	0	0	810	810	810	0	0	Netaikoma	100	100
B	64	R347H (HET)		810	6	6	6	804	804	804	0	0	100	100	100
B	65	1078delT (HET)		810	6	6	6	804	804	804	0	0	100	100	100

Skydelis	Mėginio nr.	Mėginio genotipas	Variantai	Iš viso priskyrimų vienoje tyrimų vietoje	Teigiami atitinkantys priskyrimai (variantai)			Neigiami atitinkantys priskyrimai (nemutantinio tipo)			Netinkamų priskyrimų sk.	Nepriskyrimų sk.	Teigiama atitiktis (%)	Neigiama atitiktis (%)	Bendroji atitiktis (%)
					1	2	3	1	2	3					
					tyrimų vieta	tyrimų vieta	tyrimų vieta	tyrimų vieta	tyrimų vieta	tyrimų vieta					
B	66	G178R / F508del (HET)		810	12	12	12	798	798	798	0	0	100	100	100
B	67	S549R (c.1647T>G) (HET)		810	6	6	6	804	804	804	0	0	100	100	100
B	68	S549N (HET)		810	6	6	6	804	804	804	0	0	100	100	100
B	69	W846X (HET)		810	6	6	6	804	804	804	0	0	100	100	100
B	70	WT		810	0	0	0	810	810	810	0	0	Netaikoma	100	100
B	71	E92X / F508del (HET)		810	12	12	12	798	798	798	0	0	100	100	100
B	72 ⁴	621 + 1G>T / 1154insTC (HET)		810	12	12	12	798	798	797	0	1 ⁴	100	99,96	99,96
B	73	G542X (HET)		810	6	6	6	804	804	804	0	0	100	100	100
B	74	F508del (HET)		810	6	6	6	804	804	804	0	0	100	100	100
B	75 ²	F508del (HET)		810	6	5	6	804	670	804	0	135 ²	94,44	94,44	94,44
B	76	F508del (HET)		810	6	6	6	804	804	804	0	0	100	100	100
B	77	621 + 1G>T / A455E (HET)		810	12	12	12	798	798	798	0	0	100	100	100
B	78	1812-1G>A (HET)		810	6	6	6	804	804	804	0	0	100	100	100

Skydelis	Mėginio nr.	Mėginio genotipas	Variantai	Iš viso priskyrimų vienoje tyrimų vietoje	Teigiami atitinkantys priskyrimai (variantai)			Neigiami atitinkantys priskyrimai (nemutantinio tipo)			Netinkamų priskyrimų sk.	Nepriskyrimų sk.	Teigiama atitiktis (%)	Neigiama atitiktis (%)	Bendroji atitiktis (%)
					1	2	3	1	2	3					
					tyrimų vieta	tyrimų vieta	tyrimų vieta	tyrimų vieta	tyrimų vieta	tyrimų vieta					
B	79	WT		810	0	0	0	810	810	810	0	0	Netaikoma	100	100
B	80	F508del / R553X (HET)		810	12	12	12	798	798	798	0	0	100	100	100
B	81	F508del / G551D (HET)		810	12	12	12	798	798	798	0	0	100	100	100
B	82	R347P / F508del (HET)		810	12	12	12	798	798	798	0	0	100	100	100
B	83	R117H / F508del (HET)	(TG)10(T)9 / (TG)12(T)5	816	18	18	18	798	798	798	0	0	100	100	100
B	84	I507del (HET)		810	6	6	6	804	804	804	0	0	100	100	100
B	85	2789 + 5G>A (HOM)		810	6	6	6	804	804	804	0	0	100	100	100
B	86 ⁴	CFTR dele2, 3 / F508del (HET)		810	12	12	12	798	797	798	0	1 ⁴	100	99,96	99,96
B	87	F508del / 1898 + 1G>A (HET)		810	12	12	12	798	798	798	0	0	100	100	100
B	88	WT		810	0	0	0	810	810	810	0	0	Netaikoma	100	100
B	89	F508del / 2143delT (HET)		810	12	12	12	798	798	798	0	0	100	100	100
B	90	3905insT (HET)		810	6	6	6	804	804	804	0	0	100	100	100

Skydelis	Mėginio nr.	Mėginio genotipas	Variantai	Iš viso priskyrimų vienoje tyrimų vietoje	Teigiami atitinkantys priskyrimai (variantai)			Neigiami atitinkantys priskyrimai (nemutantinio tipo)			Netinkamų priskyrimų sk.	Nepriskyrimų sk.	Teigiama atitiktis (%)	Neigiama atitiktis (%)	Bendroji atitiktis (%)
					1 tyrimų vieta	2 tyrimų vieta	3 tyrimų vieta	1 tyrimų vieta	2 tyrimų vieta	3 tyrimų vieta					
B	91	394delTT (HET)		810	6	6	6	804	804	804	0	0	100	100	100
B	92	F508del (HET)		810	6	6	6	804	804	804	0	0	100	100	100
Iš viso				74 556	2 209			221 182			4	273	99,77	99,88	99,88

¹ Nemutantinio tipo vietoje, atitinkančioje vieno replikato variantą N1303K, užfiksuotas nepriskyrimas dėl nepakankamos aprėpties.

² Vieno 5 ir 75 mėginių replikato priskyrimo dažnis buvo 0 %. Atlikus papildomų tyrimų matyti, kad mėginiai galėjo būti neįdėti į mėginių plokštelę prieš ruošiant bibliotekas, nes mėgintuvėliuose likęs mėginių kiekis atitiko skaičių, kuris būtų teisingas nepašalinus tūrio.

³ Remiantis įrodymais galima teigti, kad, prieš ruošdamas bibliotekas, operatorius sukeitė 9 ir 10 mėginius.

⁴ Nemutantinio tipo vietoje, atitinkančioje kiekvieno iš dviejų mėginių vieno replikato variantą M1V, užfiksuotas nepriskyrimas dėl nepakankamos aprėpties.

„Somatic“ veikimo charakteristikos

Čia aprašytuose tyrimuose naudojant „Somatic“ variantų modulį buvo analizuojami sekos nustatymo duomenys, išskyrus tuos tyrimus, kuriuose buvo naudojama dviejų genų grupė ir konkrečiam tyrimui skirtas modulis.

Tikslumas

Siekiant įvertinti „MiSeqDx“ prietaiso DNR išskyrimo iš FFPE mėginių tikslumą, buvo atlikti trys tyrimai.

1 tyrimas

Tyrimo buvo naudojamas reprezentatyvusis tyrimas, skirtas įvairiems genams analizuoti, apimantis 12 588 bazes iš 23 skirtingų chromosomų, naudojant 150 amplikonų. Y chromosomoje nėra didelio pasiklojimo sričių, todėl ji nebuvo vertinama. Šiame tyrime naudoti penki unikalūs mėginiai yra iš vienos šeimos – dviejų tėvų ir trijų vaikų – mėginių sekos nustatymas buvo dažnai atliekamas keliose laboratorijose ir taikant kelias sekos nustatymo metodologijas. Trys mėginiai yra moterų, o du – vyrų. Prieš tyrimui išskiriant DNR, visi mėginiai buvo fiksuoti formalinu ir įlieti į parafiną. Mėginys GM12877 DNR lygiu buvo atskiestas su mėginiu GM12878, siekiant sukurti GM12877-D ir variantų, kurių dažnis būtų artimas 5 proc. ir 10 proc., rinkinį. Kiekvienas mėginys buvo ištirtas dviem

egzemplioriais, išskyrus GM12877-D, kuris buvo tiriamas naudojant penkis replikatus. SNV, intarpų ir iškritų tikslumas buvo nustatytas tyrimo duomenis palyginus su išsamiai apibūdinta referentine duomenų baze. Referentinė duomenų bazė („Platinum Genomes“ 2016-01 versija) buvo sukurta sujungus kelias sekos nustatymo metodologijas, viešai prieinamus duomenis ir informaciją apie paveldėjimą. Remiantis šiuo referentiniu metodu buvo apibrėžtos didelio pasiklovimo genomo sritys, nebent nurodyta kitaip. Iš viso buvo atlikti aštuoni mėginių vykdymai. Tikslumui parodyti pateiktose lentelėse naudojami pirmojo vykdymo duomenys.

lentelė 10 pateikiami tyrimo duomenys su teigiama ir neigiama procentine atitiktimi kiekvieno mėginio atveju, o variantų rezultatai dėl PPA skaičiavimo palyginami su išsamiai apibūdintu kompozitiniu referentiniu metodu. Trys variantų tipai (SNV, intarpai ir iškritos) sujungiami. Kadangi taikant referentinį metodą rezultatai gaunami tik apie vieno nukleotido variantus ir intarpus / iškritas, dėl NPA skaičiavimo ne variantų bazių rezultatai palyginami su žmogaus genomo referentinės sekos hg19 versija.

lentelė 10 „MiSeqDx“ prietaiso bazių priskyrimo rezultatų atitiktis 6 išsamiai apibūdintų mėginių referentiniams duomenims

Mėginys	Vidutinis priskyrimo dažnis	Iš viso variantų	Iš viso TP variantų	Iš viso FN variantų	Iš viso TN priskyrimų	PPA	NPA	OPA
GM12877	98,7	152	147	0	23 719	100	100	100
GM12878	98,4	270	260	0	23 482	100	100	100
GM12879	98,7	192	186	0	23 744	100	100	100
GM12885	99,1	244	236	0	23 713	100	100	100
GM12886	98,7	230	226	0	23 652	100	100	100
GM12877-D ¹		675	650	0		100	100	100
GM12877-D ²	98,4	155	155	0	57 608	100	100	100

¹ Variantai, kurių dažnis didesnis nei 20 %.

² Variantas, kurio dažnis mažesnis nei 20 %.

150 amplikonų buvo skirta įvairiam genomo turiniui apimti. Amplikonų GC turinio intervalas – 26–87 %. Be amplikonų, taip pat pasitaikė įvairių vienkartinį pasikartojančių nukleotidų (pvz., PolyA, PolyT), dinukleotidų ir trinukleotidų. Tyrime buvo naudojami 6 unikalūs mėginiai. Duomenys buvo kaupiami apie kiekvieną amplikoną (**lentelė 11**) siekiant nustatyti genomo turinio poveikį tinkamų priskyrimų procentui. Tinkamų priskyrimų procentą sudaro variantų ir referencijos priskyrimai; jei yra klaidingų priskyrimų arba kažkas nepriskiriama, šis procentas yra mažesnis už 100 %. Kai, priskiriant variantus, neįvykdomos vieno ar kelių filtrų sąlygos (pvz., nepakankama aprėptis), niekas nepriskiriama. Neteisingų priskyrimų nebuvo. Įvairių amplikonų nepriskyrimų skaičius daug skyrėsi. GC turinys ir keli sąveikos su GC turiniu atvejai buvo žymiausi nepriskyrimų prognozavimo rodikliai. 2040 / 2580 (79 %) nepriskyrimų įvyko dėl neįvykdytos aprėpties specifikacijos. Daugiausia nepriskyrimų pasitaikė tarp amplikonų, kurių GC turinys didesnis nei 78 %. Su

reprezentatyviuoju amplikonu, kurio GC turinys – 78 %, pasitaikė iš viso 675 nepriskyrimai. Su reprezentatyviuoju amplikonu, kurio GC turinys – 87 %, pasitaikė iš viso 1365 nepriskyrimai. Aprėptį galima padidinti sumažinant į pratekamąją kiuvetę dedamų mėginių skaičių – taip galima aptikti amplikonus, kurių GC turinio procentas yra didelis.

lentelė 11 Amplikonų lygio tikslumo duomenys

Amplikonas	Chromosoma	Amplikono pradžia	Amplikono pabaiga	Analizuoto fragmento dydis	Bazės didelio pasiklovimo srityse	Amplikonų genomo turinys	GC turinys	Iš viso teisingų priskyrimų	Iš viso neteisingų priskyrimų	Iš viso nepriskyrimų	Teisingų priskyrimų proc.
1	1	36450499	36450591	93	93	Intarpas / iškrita	0,22	1395	0	0	100
2	1	109465122	109465200	79	79	PolyA (5), PolyC (5), intarpas / iškrita	0,38	1185	0	0	100
3	1	218353867	218353957	91	91	Intarpas / iškrita	0,4	1364	0	1	99,9
4	1	223906657	223906748	92	92	Intarpas / iškrita	0,49	1380	0	0	100
5	1	228526602	228526682	81	81	PolyG (5)	0,69	1215	0	0	100
6	1	236372039	236372108	70	70	PolyT (10), intarpas / iškrita	0,39	1050	0	0	100
7	1	247812041	247812128	88	88	PolyA (5), CT(3), TAA(3), intarpas / iškrita	0,27	1320	0	0	100
8	2	55862774	55862863	90	90	Intarpas / iškrita	0,28	1350	0	0	100
9	2	87003930	87004009	80	80	Intarpas / iškrita	0,38	1200	0	0	100
10	2	177016721	177016805	85	81	Netaikoma	0,65	1215	0	0	100
11	2	186625727	186625801	75	75	PolyA (8)	0,35	1117	0	10	99,1
12	2	190323504	190323591	88	88	PolyT (5)	0,42	1320	0	0	100
13	2	200796740	200796826	87	87	PolyT (5), intarpas / iškrita	0,31	1302	0	8	99,4
14	2	212245049	212245139	91	91	PolyT (5), PolyA (6), intarpas / iškrita	0,3	1365	0	0	100
15	2	228147052	228147144	93	93	Netaikoma	0,43	1395	0	0	100
16	2	235016350	235016422	73	73	PolyT (5), intarpas / iškrita	0,42	1095	0	0	100
17	3	4466229	4466321	93	93	AT(3), intarpas / iškrita	0,27	1349	0	46	96,7
18	3	46620561	46620643	83	83	Netaikoma	0,43	1245	0	0	100
19	3	49851331	49851400	70	70	CT(3), intarpas / iškrita	0,49	1050	0	0	100
20	3	189713161	189713248	88	88	PolyA (5), PolyT (5), PolyA (9), TG (3)	0,41	1305	0	30	97,8
21	3	190106030	190106104	75	74	Intarpas / iškrita	0,57	1108	0	2	99,8
22	4	2233667	2233744	78	78	PolyA (6)	0,26	1170	0	0	100

Amplikonas	Chromosoma	Amplikono pradžia	Amplikono pabaiga	Analizuoto fragmento dydis	Bazės didelio pasiklovimo srityse	Amplikonų genomo turinys	GC turinys	Iš viso teisingų priskyrimų	Iš viso neteisingų priskyrimų	Iš viso nepriskyrimų	Teisingų priskyrimų proc.
23	4	7780541	7780637	97	97	PolyG (6), PolyT (5), PolyA (5)	0,42	1455	0	0	100
24	4	15688604	15688681	78	78	Netaikoma	0,29	1169	0	1	99,9
25	4	56236521	56236586	66	62	PolyA (5), intarpas / iškrita	0,36	930	0	0	100
26	4	102839244	102839314	71	69	PolyA (5)	0,46	1035	0	0	100
27	4	164446743	164446804	62	62	PolyA (7), intarpas / iškrita	0,27	920	0	10	98,9
28	5	1882081	1882158	78	75	Netaikoma	0,78	450	0	675	40,0
29	5	14769061	14769144	84	84	GT(3), CCA(3)	0,62	1260	0	0	100
30	5	41069808	41069871	64	64	Netaikoma	0,39	960	0	0	100
31	5	74077114	74077196	83	83	PolyA (6), intarpas / iškrita	0,3	1245	0	0	100
32	5	147475343	147475409	67	67	PolyT (5)	0,37	1005	0	0	100
33	5	149323731	149323821	91	91	CT(4), AG(3)	0,55	1365	0	0	100
34	5	155662213	155662287	75	75	Intarpas / iškrita	0,43	1125	0	0	100
35	6	6318713	6318814	102	102	PolyG (6)	0,68	1530	0	0	100
36	6	24949983	24950074	92	92	Intarpas / iškrita	0,63	1380	0	0	100
37	6	31084900	31084999	100	94	GCT(5), intarpas / iškrita	0,61	1383	0	27	98,1
38	6	32147987	32148084	98	98	PolyT (5), TCT (3), CTT (3)	0,55	1455	0	15	99,0
39	6	32986864	32986958	95	95	Intarpas / iškrita	0,53	1425	0	0	100
40	6	33408498	33408583	86	86	PolyC (6)	0,7	1290	0	0	100
41	6	41647401	41647495	95	94	PolyG (5), intarpas / iškrita	0,61	1410	0	0	100
42	6	112435865	112435955	91	91	PolyA (5)	0,44	1365	0	0	100
43	7	22202076	22202148	73	73	Netaikoma	0,44	1095	0	0	100
44	7	66276100	66276187	88	88	Intarpas / iškrita	0,35	1320	0	0	100
45	7	77365735	77365821	87	87	PolyA (7), AG (4)	0,26	1299	0	6	99,5
46	7	110939946	110940030	85	85	Intarpas / iškrita	0,38	1275	0	0	100
47	7	128533468	128533557	90	90	PolyG (5), intarpas / iškrita	0,62	1350	0	0	100
48	7	149503875	149503965	91	91	PolyG (6), PolyC (6), intarpas / iškrita	0,71	1365	0	0	100
49	7	154404519	154404599	81	66	Netaikoma	0,31	990	0	0	100
50	7	156476507	156476599	93	93	Intarpas / iškrita	0,35	1395	0	0	100

Amplikonas	Chromosoma	Amplikono pradžia	Amplikono pabaiga	Analizuoto fragmento dydis	Bazės didelio pasiklovimo srityse	Amplikonų geno turinys	GC turinys	Iš viso teisingų priskyrimų	Iš viso neteisingų priskyrimų	Iš viso nepriskyrimų	Teisingų priskyrimų proc.
51	8	1817312	1817394	83	83	Netaikoma	0,42	1245	0	0	100
52	8	24811020	24811109	90	89	PolyG (7), CTC(4), intarpas / iškrita	0,61	1305	0	30	97,8
53	8	76518625	76518691	67	67	Intarpas / iškrita	0,3	1005	0	0	100
54	9	103054909	103055006	98	98	PolyG (6)	0,67	1470	0	0	100
55	9	105586150	105586214	65	65	Intarpas / iškrita	0,32	973	0	2	99,8
56	9	107620823	107620918	96	96	Netaikoma	0,49	1440	0	0	100
57	9	123769149	123769231	83	83	AT(3)	0,37	1242	0	3	99,8
58	9	138995345	138995441	97	97	PolyC (6), intarpas / iškrita	0,68	1455	0	0	100
59	10	5987120	5987198	79	78	PolyG (5), intarpas / iškrita	0,47	1170	0	0	100
60	10	11784629	11784726	98	91	GC(3)	0,87	0	0	1365	0
61	10	27317777	27317855	79	79	PolyT (5)	0,3	1185	0	0	100
62	10	33018351	33018440	90	90	PolyA (5), PolyT (5)	0,2	1350	0	0	100
63	10	45084159	45084253	95	95	Intarpas / iškrita	0,35	1425	0	0	100
64	10	55892599	55892687	89	88	AC(11), intarpas / iškrita	0,42	1290	0	69	94,9
65	10	101611250	101611329	80	80	Netaikoma	0,49	1200	0	0	100
66	10	118351373	118351453	81	81	Netaikoma	0,51	1215	0	0	100
67	11	8159816	8159912	97	96	Netaikoma	0,45	1440	0	0	100
68	11	30177648	30177717	70	70	Intarpas / iškrita	0,46	1050	0	0	100
69	11	47470345	47470444	100	100	Netaikoma	0,65	1500	0	0	100
70	11	59837679	59837740	62	62	Intarpas / iškrita	0,37	930	0	0	100
71	11	64418856	64418957	102	102	Netaikoma	0,59	1530	0	0	100
72	11	93529612	93529684	73	73	PolyA (5)	0,4	1095	0	0	100
73	11	101347052	101347136	85	85	Netaikoma	0,42	1275	0	0	100
74	11	102477336	102477426	91	91	PolyG (6)	0,55	1365	0	0	100
75	11	118406285	118406369	85	85	Intarpas / iškrita	0,53	1275	0	0	100
76	11	120357801	120357885	85	85	PolyA (5), CA(3), intarpas / iškrita	0,34	1275	0	0	100
77	11	125769313	125769397	85	85	GA(3)	0,52	1275	0	0	100

Amplikonas	Chromosoma	Amplikono pradžia	Amplikono pabaiga	Analizuoto fragmento dydis	Bazės didelio pasiklovimo srityse	Amplikonų genomo turinys	GC turinys	Iš viso teisingų priskyrimų	Iš viso neteisingų priskyrimų	Iš viso nepriskyrimų	Teisingų priskyrimų proc.
78	12	2834770	2834853	84	84	PolyC (5), intarpas / iškrita	0,52	1260	0	14	98,9
79	12	26811004	26811096	93	93	PolyA (7), AC (4)	0,33	1395	0	0	100
80	12	30881766	30881846	81	81	Netaikoma	0,49	1215	0	0	100
81	12	88474105	88474175	71	71	PolyA (6)	0,35	1065	0	0	100
82	12	120966872	120966966	95	95	PolyG (5)	0,68	1425	0	0	100
83	12	24167504	24167576	73	73	Netaikoma	0,52	1095	0	0	100
84	13	25816961	25817049	89	88	PolyA (5), PolyT (7), PolyA (7), intarpas / iškrita	0,22	1305	0	15	98,9
85	13	44880112	44880200	89	89	Intarpas / iškrita	0,49	1335	0	0	100
86	13	77665218	77665294	77	77	Intarpas / iškrita	0,39	1155	0	0	100
87	14	31619327	31619393	67	67	GA(3), TA(3)	0,39	1005	0	0	100
88	14	39517884	39517966	83	83	Netaikoma	0,25	1245	0	0	100
89	14	46958962	46959034	73	72	PolyT (5), intarpas / iškrita	0,19	1038	0	42	96,1
90	14	58050030	58050110	81	81	Intarpas / iškrita	0,38	1215	0	0	100
91	14	82390559	82390649	91	91	Intarpas / iškrita	0,35	1365	0	0	100
92	14	92549544	92549609	66	66	PolyA (5)	0,41	975	0	60	94,2
93	14	102808496	102808589	94	94	Intarpas / iškrita	0,62	1410	0	0	100
94	15	43170751	43170848	98	96	PolyC (5)	0,45	1440	0	0	100
95	15	63446149	63446216	68	68	Intarpas / iškrita	0,25	1020	0	0	100
96	15	77879807	77879901	95	93	PolyG (5), intarpas / iškrita	0,68	1395	0	0	100
97	15	81625334	81625428	95	95	PolyT (6)	0,43	1425	0	0	100
98	15	85438263	85438334	72	71	Intarpas / iškrita	0,65	1065	0	0	100
99	15	89817413	89817503	91	91	Netaikoma	0,36	1365	0	0	100
100	15	89864274	89864343	70	70	Intarpas / iškrita	0,56	1050	0	0	100
101	16	1894910	1894972	63	63	Netaikoma	0,27	945	0	0	100
102	16	28997904	28997998	95	95	PolyC (5)	0,67	1425	0	0	100
103	16	3682908	53682994	87	87	TA(3)	0,41	1305	0	0	100
104	16	57954406	57954509	104	104	PolyC (5)	0,67	1560	0	0	100
105	16	85706375	85706465	91	91	Poly T (5), intarpas / iškrita	0,37	1362	0	3	99,8

Amplikonas	Chromosoma	Amplikono pradžia	Amplikono pabaiga	Analizuoto fragmento dydis	Bazės didelio pasiklovimo srityse	Amplikonų genomo turinys	GC turinys	Iš viso teisingų priskyrimų	Iš viso neteisingų priskyrimų	Iš viso nepriskyrimų	Teisingų priskyrimų proc.
106	17	3563920	3564008	89	89	GC(3)	0,64	1335	0	0	100
107	17	3594191	3594277	87	87	PolyC (5), intarpas / iškrita	0,67	1303	0	2	99,8
108	17	3970090	3970180	91	91	Intarpas / iškrita	0,46	1365	0	0	100
109	17	16084945	16085037	93	93	Intarpas / iškrita	0,26	1395	0	0	100
110	17	33998759	33998849	91	89	PolyT (5)	0,54	1335	0	0	100
111	17	39589691	39589774	84	82	PolyA (13), intarpas / iškrita (x2)	0,29	1215	0	78	94,0
112	17	41244394	41244484	91	91	PolyA (5)	0,34	1365	0	0	100
113	17	45438866	45438957	92	92	PolyA (7), AT(3), AT(4), AT(4), intarpas / iškrita	0,26	1365	0	15	98,9
114	17	61502432	61502510	79	79	Intarpas / iškrita	0,41	1175	0	10	99,2
115	17	64023582	64023667	86	86	PolyT (7)	0,22	1289	0	1	99,9
116	17	72308237	72308320	84	84	GAG(3)	0,62	1260	0	0	100
117	18	2616456	2616522	67	67	GA(3)	0,31	1005	0	0	100
118	18	6980478	6980568	91	91	Netaikoma	0,37	1365	0	0	100
119	18	9888026	9888094	69	69	PolyA (6), TG (3)	0,43	1035	0	0	100
120	18	38836999	38837073	75	75	PolyA (5), intarpas / iškrita	0,37	1121	0	19	98,3
121	18	47405382	47405462	81	81	CTC(3), intarpas / iškrita	0,47	1215	0	0	100
122	18	54815665	54815749	85	85	CT(3), intarpas / iškrita	0,45	1275	0	0	100
123	18	59773996	59774060	65	65	Netaikoma	0,48	975	0	0	100
124	19	625143	625241	99	99	Netaikoma	0,59	1478	0	7	99,5
125	19	18121418	18121491	74	74	Netaikoma	0,68	1110	0	0	100
126	19	18186574	18186643	70	70	Netaikoma	0,64	1050	0	0	100
127	20	746056	746149	94	94	Netaikoma	0,61	1410	0	0	100
128	20	10633195	10633276	82	82	AC(3)	0,59	1230	0	0	100
129	20	17705633	17705708	76	76	CT(3)	0,58	1140	0	0	100
130	20	21766821	21766890	70	70	GT(3),TG(4), intarpas / iškrita	0,46	1050	0	0	100
131	20	25278421	25278521	101	101	Intarpas / iškrita	0,63	1515	0	0	100
132	20	50897302	50897368	67	67	Intarpas / iškrita	0,36	1005	0	6	99,4

Amplikonas	Chromosoma	Amplikono pradžia	Amplikono pabaiga	Analizuoto fragmento dydis	Bazės didelio pasiklovimo srityse	Amplikonų genomo turinys	GC turinys	Iš viso teisingų priskyrimų	Iš viso neteisingų priskyrimų	Iš viso nepriskyrimų	Teisingų priskyrimų proc.
133	20	62331904	62331994	91	88	Poly G (6)	0,73	1320	0	0	100
134	20	62690860	62690946	87	87	Intarpas / iškrita	0,57	1305	0	0	100
135	21	30300823	30300888	66	66	Intarpas / iškrita	0,35	990	0	0	100
136	21	33694176	33694273	98	98	PolyT (6), CA (3)	0,54	1470	0	0	100
137	21	36710706	36710792	87	87	GT(3), intarpas / iškrita	0,39	1305	0	0	100
138	21	46644924	46644992	69	69	PolyA (6), AG(3), intarpas / iškrita	0,32	1029	0	7	99,3
139	21	46705575	46705664	90	90	PolyT (5), PolyA (6)	0,5	1350	0	0	100
140	22	25750774	25750873	100	100	Intarpas / iškrita	0,63	1500	0	1	99,9
141	22	32439233	32439329	97	97	Netaikoma	0,68	1455	0	0	100
142	22	37409844	37409940	97	97	Intarpas / iškrita	0,46	1455	0	0	100
143	22	37637596	37637694	99	99	Netaikoma	0,6	1485	0	0	100
144	22	47081347	47081438	92	92	Intarpas / iškrita	0,66	1380	0	0	100
145	X	15870424	15870492	69	69	PolyT (5)	0,26	1035	0	0	100
146	X	135288543	135288611	69	69	PolyC (5)	0,62	1035	0	0	100
147	X	135290777	135290847	71	71	Netaikoma	0,52	1065	0	0	100
148	Y	2655397	2655461	65	0	Netaikoma	0,55	0	0	0	Netaikoma
149	Y	2655519	2655609	91	0	Netaikoma	0,48	0	0	0	Netaikoma
150	Y	2655609	2655679	71	0	PolyA (5)	0,37	0	0	0	Netaikoma

Nepriskirtų variantų suvestinė pateikta [lentelė 12](#) Lentelėje išvardyti konkretūs filtrai, kuriuos naudojant nieko nepriskirta.

lentelė 12 Variantų nepriskyrimų suvestinė

Amplikono nr.	Chr.:pad.	Variantas	Atitinkamo amplikono turinys	Filtras	Praleisti variantai	Numatomi variantai
28	5:1882129	T > G	78 % GC	LowDP ¹ (maža DP)	8	13
52	8:24811064	AG > A	PolyG (7), CTC(4), 61 % GC	R3x6 ²	15	15
60	10:11784633	C > T	PolyGC (3), 87 % GC	LowDP (maža DP)	13	13
64	10:55892600	TAC > T	AC(11), 42 % GC	R3x6	9	9
111	17:39589692	C > CA	PolyA (13), 29 % GC	R3x6	13	13

¹ MažasDP: Žema aprėptis. Variantas filtruojamas, jei bent vieno iš telkinių gylis šioje konkrečioje padėtyje yra mažesnis nei 900.

² R3x6: Pakartokite filtravimą. Variantas filtruojamas, jei visas variantas ar jo dalis pakartotinai matomi referentiniame genome šalia varianto padėties. Reikia, kad referencijoje būtų bent šeši pakartojimai, o atsižvelgiama tik į tuos pakartojimus, kurių ilgis yra iki 3 bp.

Mėginio sekos nustatymo rezultatai buvo palyginti su didelio pasiklovimo lygio NA12878 genotipu, kurį nustatė Nacionaliniai standartų ir technologijų institutai (NIST) (2.19 v.). Iš 150 amplikonų 92 amplikonai buvo didelio pasiklovimo lygio genomo sričių ribose, 41 amplikonas su NIST seka persidengė iš dalies, o 17 amplikonų visiškai nepersidengė. Palyginimui buvo gauta 10 000 vieno replikato koordinatų. Ne variantų bazių priskyrimai buvo palyginti su žmogaus genomo referentinės sekos hg19 versija. Tikslumo rezultatai parodyti [lentelė 13](#).

lentelė 13 „MiSeqDx“ prietaiso mėginio GM12878 bazių priskyrimo atitikties NIST referencijai rezultatai

Mėginys	Amplikonų kiekis	Vidutinis priskyrimo dažnis	Iš viso TP variantų priskyrimų	Iš viso FN variantų priskyrimų	Iš viso TN priskyrimų	Iš viso FP priskyrimų	PPA	NPA	OPA
GM12878	150	98,43	206	0	19 231	0	100	100	100

Buvo atlikta papildoma penkių neatskiestų mėginių analizė, susijusi su mažų intarpų ir iškritų (intarpų / iškritų) priskyrimu [lentelė 14](#). Kai kuriais atvejais intarpas / iškrita dažnai pasitaikydavo dviejuose ar daugiau mėginių, kaip matyti stulpelyje „Iš viso mėginių replikatų su intarpu / iškrita“. Penkių mėginių abiejų replikatų rezultatai pateikti [lentelė 14](#) Iš viso buvo 71 intarpas / iškrita, kurių dydis intarpų atveju buvo 1–24 bp, o iškritų atveju – 1–25 bp. Kiekvienas iš 68 intarpų / iškritų buvo aptikti su 1 teigiama procentine atitiktimi. Trys intarpai ir iškritos neturėjo tinkamų priskyrimų, nes kiekvienas iš šių variantų buvo be priskyrimo dėl R3x6 filtro. Todėl teigiama procentinė atitiktis (PPA), į kurią neįtraukti jokie priskyrimai, negalėjo būti apskaičiuota. Šie trys variantai – tai 1 bp iškrita (chr8 24811064 AG>A); 2 bp iškrita (chr10 55892600 TAC>T); ir 1 bp intarpas (chr17 39589692 C>CA).

lentelė 14 Intarpų / iškritų aptikimo „MiSeqDx“ prietaisu suvestinė

Amplikonas	Chromosoma	Padėtis	Analizuoto fragmento dydis	Amplikono intarpo / iškritos tipas ir ilgis	Intarpas / iškrita	Iš viso mėginių replikatų su intarpu / iškrita	Nepriskyrimų sk.	Iš viso neteisingų intarpo / iškritos priskyrimų	Iš viso teisingų intarpo / iškritos priskyrimų	PPA
1	1	36450544	93	25 bp iškrita	GAAAATTTAATGAAACACATTGTCCT>G	7	0	0	7	100
2	1	109465165	79	3 bp iškrita	ACTT>A	9	0	0	9	100
3	1	218353908	91	23 bp intarpas	T>TTTTAATAGCAAAAAGAGGCTAGA	15	0	0	15	100
4	1	223906701	92	17 bp iškrita	GACAGACTGTGAGGAAGA>G	11	0	0	11	100
6	1	236372081	70	5 bp intarpas	C>CTTAAG	9	0	0	9	100
7	1	247812083	88	3 bp intarpas	C>CATG	9	0	0	9	100

Amplikonas	Chromosoma	Padėtis	Analizuoto fragmento dydis	Amplikono intarpo / iškrito tipas ir ilgis	Intarpas / iškrita	Iš viso mėginių replikatų su intarpu / iškrita	Nepriškimų sk.	Iš viso neteisingų intarpo / iškrito priškimų	Iš viso teisingų intarpo / iškrito priškimų	PPA
8	2	55862804	90	7 bp intarpas	T>TTTGGTAA	13	0	0	13	100
9	2	87003972	80	6 bp iškrita	TTATCTC>T	11	0	0	11	100
13	2	200796749	87	5 bp intarpas	T>TTAAAA	15	0	0	15	100
14	2	212245090	91	12 bp intarpas	C>CTGAAAATAGGAT	11	0	0	11	100
16	2	235016388	73	2 bp intarpas	A>ATG	9	0	0	9	100
17	3	4466274	93	23 bp iškrita	TAACCTAAAATTACAAAATAACCC>T	13	0	0	13	100
19	3	49851375	70	9 bp intarpas	C>CCTGGCTCCT	7	0	0	7	100
21	3	190106071	75	1 bp iškrita	AG>A	13	0	0	13	100
25	4	56236567	66	8 bp iškrita	TAACCGAAA>T	9	0	0	9	100
27	4	164446785	62	11 bp intarpas	T>TTATGGTATTGA	9	0	0	9	100
31	5	74077155	83	4 bp iškrita	TAGTA>T	7	0	0	7	100
34	5	155662255	75	8 bp intarpas	G>GCCTACTGA	13	0	0	13	100
36	6	24950035	92	21 bp iškrita	CCCTGGGTGCTATAGCCCACCA>C	11	0	0	11	100
37	6	31084942	100	3 bp iškrita	GCTT>G	15	0	0	15	100
39	6	32986905	95	25 bp iškrita	CTTTCACCTTCCCCTCATGCAAAG>C	7	0	0	7	100
41	6	41647442	95	23 bp iškrita	GGCATGAGGCTTGGTGACATGGCA>G	11	0	0	11	100
44	7	66276142	88	1 bp intarpas	C>CT	13	0	0	13	100
46	7	110939983	85	4 bp iškrita	CAAGT>C	13	0	0	13	100
47	7	128533514	90	1 bp intarpas	T>TC	15	0	0	15	100
48	7	149503916	91	4 bp iškrita	GGATA>G	7	0	0	7	100
50	7	156476548	93	11 bp iškrita	GAATCTGCACTT>G	13	0	0	13	100
52	8	24811064	90	1 bp iškrita	AG>A	15	15	0	0	Netaikoma
53	8	76518677	67	4 bp intarpas	T>TACTG	9	0	0	9	100
55	9	105586193	65	4 bp intarpas	C>CAATT	13	0	0	13	100
58	9	138995370	97	21 bp iškrita	TCTGGGGGGCAGCCCCCTGAGGG>T	9	0	0	9	100
59	10	5987158	79	3 bp iškrita	TAAC>T	11	0	0	11	100
63	10	45084202	95	16 bp iškrita	AGCGTCTATAACCAAAT>A	11	0	0	11	100

Amplikonas	Chromosoma	Padėtis	Analizuoto fragmento dydis	Amplikono intarpo / iškritos tipas ir ilgis	Intarpas / iškrita	Iš viso mėginių replikatų su intarpu / iškrita	Nepriiskiriamų sk.	Iš viso neteisingų intarpo / iškritos priiskiriamų	Iš viso teisingų intarpo / iškritos priiskiriamų	PPA
64	10	55892600	89	2 bp iškrita	TAC>T	9	9	0	0	100
68	11	30177690	70	2 bp intarpas	C>CTG	7	0	0	7	100
70	11	59837721	62	8 bp intarpas	T>TTATGAAAA	11	0	0	11	100
75	11	118406328	85	8 bp iškrita	CAGTGTGGA>C	9	0	0	9	100
76	11	120357842	85	2 bp iškrita	CTT>C	11	0	0	11	100
78	12	2834814	84	21 bp intarpas	T>TTCTCAGTACGGTGAACCCAG	15	0	0	15	100
84	13	25817002	89	19 bp intarpas	C>CAAAATATAAAAAGCTCCCT	15	0	0	15	100
85	13	44880152	89	4 bp intarpas	C>CCTGT	11	0	0	11	100
86	13	77665265	77	20 bp iškrita	ATCTATTTTCTAATAGACGGC>A	9	0	0	9	100
89	14	46958967	73	22 bp iškrita	TTTAAAATTTGAATGTGATAAAA>T	15	0	0	15	100
90	14	58050081	81	4 bp intarpas	C>CTGAT	13	0	0	13	100
91	14	82390602	91	16 bp iškrita	CTTGCTCTATAAACCGT>C	11	0	0	11	100
93	14	102808554	94	5 bp iškrita	CGTGGA>C	9	0	0	9	100
95	15	63446199	68	6 bp iškrita	CAAAATT>C	11	0	0	11	100
96	15	77879862	95	25 bp iškrita	GCCCCTGAGCCAGCCTCCCGCTCTTA>G	9	0	0	9	100
98	15	85438311	72	3 bp intarpas	C>CTTG	9	0	0	9	100
100	15	89864316	70	4 bp intarpas	G>GCTAC	9	0	0	9	100
105	16	85706416	91	7 bp iškrita	ATTATTTC>A	11	0	0	11	100
107	17	3594276	87	1 bp iškrita	TG>T	13	0	0	13	100
108	17	3970133	91	18 bp intarpas	A>ATCCTATTCTACTCTGAAT	11	0	0	11	100
109	17	16084985	93	4 bp intarpas	A>AACAC	7	0	0	7	100
111	17	39589692	84	1 bp intarpas	C>CA	13	13	0	0	100
112	17	39589739	84	24 bp intarpas	T>TTCTGAAGGTCAAGTCTATCCCTGA	15	0	0	15	100
113	17	45438886	92	4 bp iškrita	CAGTG>C	7	0	0	7	100
114	17	61502459	79	12 bp iškrita	TTTGATCTGCTG>T	13	0	0	13	100
120	18	38837054	75	22 bp intarpas	T>TGTATCTTAGCAAAAGTTTCTCA	15	0	0	15	100
121	18	47405425	81	3 bp intarpas	T>TGAG	11	0	0	11	100

Amplikonas	Chromosoma	Padėtis	Analizuoto fragmento dydis	Amplikono intarpo / iškritos tipas ir ilgis	Intarpas / iškrita	Iš viso mėginių replikatų su intarpu / iškrita	Nepriskyrimų sk.	Iš viso neteisingų intarpo / iškritos priskyrimų	Iš viso teisingų intarpo / iškritos priskyrimų	PPA
122	18	54815706	85	2 bp iškrita	ACT>A	13	0	0	13	100
130	20	21766863	70	15 bp iškrita	TACTTGAGAACTGAGG>T	9	0	0	9	100
131	20	25278464	101	5 bp intarpas	A>AGTGGG	13	0	0	13	100
132	20	50897361	67	11 bp intarpas	G>GGAATGTCAGCC	15	0	0	15	100
134	20	62690925	87	16 bp iškrita	TCCTGGCTGGCCTGTGG>T	9	0	0	9	100
135	21	30300873	66	11 bp intarpas	G>GATAAACTTTA	9	0	0	9	100
137	21	36710749	87	21 bp iškrita	ACTCAAGATAACTCATGTTATC>A	9	0	0	9	100
138	21	46644985	69	5 bp iškrita	GTTGTT>G	13	0	0	13	100
140	22	25750814	100	6 bp intarpas	C>CAGGGCA	13	0	0	13	100
142	22	37409885	97	5 bp intarpas	C>CTGTTT	13	0	0	13	100
144	22	47081407	92	10 bp iškrita	GGGCACAGGCA>G	7	0	0	7	100

2 tyrimas

Šiame tyrime buvo naudojami biologiniame banke sukaupti kolorektalinio vėžio apimtų audinių FFPE mėginiai ir reprezentatyvusis dviejų genų tyrimas, kuris buvo palygintas su referentiniu metodu – dvikrypčiu Sangerio sekos nustatymu (Sangerio metodas). Iš 1183 tiriamųjų 441 tiriamojo Sangerio metodo ir reprezentatyviojo tyrimo rezultatai buvo tinkami. Įvertinus tiriamųjų lygiu (lentelė 15), iš 441 tiriamojo 230 rezultatai buvo teigiami naudojant Sangerio metodą (Sangerio metodu aptikta mutacija). Iš jų 227 buvo teigiami atlikus reprezentatyvųjį tyrimą. Taikant Sangerio metodą, iš 441 tiriamojo likę 211 buvo neigiami (taikant Sangerio metodą mutacijų neaptikta). Iš jų 206 buvo teigiami atlikus reprezentatyvųjį tyrimą. Todėl teigiama procentinė atitiktis (PPA) buvo 98,7 %, o neigiama procentinė atitiktis (NPA) – 97,6 % (lentelė 15).

lentelė 15 Tiriamųjų lygio rezultatų teigiama ir neigiama procentinė atitiktis

Reprezentatyvusis tyrimas	Sangerio metodas		Iš viso
	Teigiama	Neigiama	
Teigiama	227 ¹	5	232
Neigiama	3 ²	206	209
Iš viso	230	211	441

Našumas Santrauka		
Sutartis Statistika	Taškinis įvertis	Tikslus 95 % PI
PPA	227/230 = 98,7 %	[96,2 %, 99,7 %]
NPA	206/211 = 97,6 %	[94,6 %, 99,2 %]

¹Buvo gautos 224 tikslios vidinio tiriamųjų tyrimo visų mutacijų lygio rezultatų atitiktys. Tirdamas dviejų subjektų mėginius „MiSeqDx“ aptiko mutaciją Sangerio metodu, taip pat vieną papildomą mutaciją. Tiriant vieno subjekto mėginius, „MiSeqDx“ prietaisu ir Sangerio metodu aptiktos skirtingos mutacijos.

²Vieno subjekto mėginyje Sangerio metodu aptiktos dvi mutacijos. Dviejų subjektų mėginiuose Sangerio metodu aptikta viena mutacija.

3 tyrimas

Šiuo tyrimu buvo įvertintos DNR bibliotekos, paruoštos su kelių tipų audinių FFPE mėginiais. Iš viso – 109 FFPE mėginiai iš aštuonių skirtingų audinių (gaubtinės žarnos, kiaušidžių, kasos, antinksčio, šlapimo pūslės, kepenų, skydliaukės ir krūties); kiekvieno tipo audinys apima mažiausiai 11 FFPE mėginių. Antinksčio audinyje buvo stemplės, plaučių, gaubtinės žarnos navikų metastazijų. Kituose audiniuose buvo pirminių auglių. Šiame tyrime buvo naudojamas reprezentatyvusis tyrimas, skirtas 26 genams, apimantiems 21 577 bazes iš 17 skirtingų chromosomų, analizuoti. Buvo atlikta iš viso šešių skirtingų genų (*KRAS*, *NRAS*, *TP53*, *PIK3CA*, *EGFR* ir *BRAF*) Sangerio sekos nustatymas, jį atliekant kiekvieno naviko 1–3 genams, atsižvelgiant į numatomą somatinių to naviko mutacijų paplitimą. Sangerio sekos nustatymu nustatytos 39 SNV somatinės mutacijos 33 iš 109 FFPE mėginių. „MiSeqDx“ nustatė 36 SNV somatines mutacijas 32 iš 109 FFPE mėginių, vienas buvo klaidingas neigiamas, o du buvo variantų padėčių nepriskyrimai. PPA buvo 97,3 %. „MiSeqDx“ nustatė 78 975 referentines bazes 109 FFPE mėginiuose, 29 klaidingus teigiamuosius Sangerio sekos nustatymo atžvilgiu ir 3 416 nepriskyrimus. NPA buvo 99,9 %. Taikant šiuos du metodus, nustatyta sutampanti dviejų bazių iškrita. [lentelė 16](#) rezultatai apibendrinami pagal audinio tipą.

lentelė 16 Teigiami ir neigiami procentinės atitikties pagal audinio tipą

Audinio tipas	Mėginių sk.	Iš viso variantų	Iš viso TP variantų	Iš viso FN variantų	Iš viso TN priskyrimų	Iš viso FP priskyrimų	Iš viso nepriskyrimų	PPA	NPA
Antinkstis	16	6	4	1	11 823	2	607	80	>99,9
Šlapimo pūslė	12	4	4	0	7 070	3	273	100	>99,9
Krūtis	16	3	3	0	13 439	7	479	100	99,9
Gaubtinė žarna	11	6	5	0	8 720	2	133	100	>99,9
Kepenys	13	3	3	0	7 984	1	59	100	>99,9
Kiaušidės	13	7	7	0	10 581	1	724	100	>99,9
Kasa	17	7	7	0	11 929	12	489	100	99,9
Skydliaukė	11	3	3	0	7 429	1	652	100	>99,9
Iš viso	109	39	36	1	78 975	29	3 416	97,3	>99,9

Atkuriamumas

Siekiant įvertinti „MiSeqDx“ prietaiso atkuriamumą, kai jis naudojamas su DNR, išskirta iš FFPE mėginių, buvo atlikti du tyrimai. 1-ajame tyrime buvo naudojami keli prietaisai. 2-asis tyrimas atliktas keliose vietose.

1 tyrimas

„MiSeqDx“ prietaiso atkuriamumas buvo nustatytas naudojant du prietaisus ir du kvalifikuotus operatorius (iš viso atlikti aštuoni vykdymai). Reprezentatyvusis tyrimas, amplikonų genomo kontekstas, mėginiai ir referentinis metodas yra tokie patys, kaip aprašyta pirmiau nurodyto 1 tikslumo tyrimo atveju. Pateikiami kiekvieno prietaiso kiekvieno amplikono rezultatai (lentelė 17), siekiant parodyti priskyrimo atkuriamumą visuose prietaisuose. Į tinkamų priskyrimų procentą įtraukti ir klaidingi priskyrimai, ir nepriskyrimai (nejvykdytos vieno ar kelių variantų priskyrimo filtrų sąlygos). Prietaisai generavo panašų nepriskyrimų skaičių, priklausantį nuo konkretaus amplikono. „MiSeqDx 1“ buvo pastebėtas vienas klaidingas priskyrimas pasitikinčioje srityje, kaip apibrėžta „Platinum Genomes“ etaloniniame standarte. Klaidingas priskyrimas buvo klaidingai teigiamas 64 amplikono intarpo varianto priskyrimas, dėl kurio abejojama 10 chromosomos 55892599–55892687 padėtyse. Amplikone buvo 11 dinukleotido pasikartojimų.

lentelė 17 Skirtingų „MiSeqDx“ prietaisų atkuriamumo tyrimo rezultatai (amplikonų lygis)

Amplikonas	Chromosoma	Analizuoto fragmento dydis	Bazės didelio pasiklovimo srityse	Amplikonų genomo turinys	GC turinys	1-asis „MiSeqDx“			2-asis „MiSeqDx“		
						Iš viso teisingų priskyrimų	Iš viso neteisingų priskyrimų	Iš viso nepriskyrimų	Iš viso teisingų priskyrimų	Iš viso neteisingų priskyrimų	Iš viso nepriskyrimų
1	1	93	93	Intarpas / iškrita	0,22	5580	0	0	5580	0	0
2	1	79	79	PolyA (5), PolyC (5), intarpas / iškrita	0,38	4740	0	0	4740	0	0
3	1	91	91	Intarpas / iškrita	0,4	5448	0	12	5453	0	8
4	1	92	92	Intarpas / iškrita	0,49	5518	0	2	5518	0	2
5	1	81	81	PolyG (5)	0,69	4858	0	2	4860	0	0
6	1	70	70	PolyT (10), intarpas / iškrita	0,39	4200	0	0	4200	0	0
7	1	88	88	PolyA (5), CT (3), TAA(3), intarpas / iškrita	0,27	5279	0	1	5279	0	1
8	2	90	90	Intarpas / iškrita	0,28	5400	0	0	5400	0	0
9	2	80	80	Intarpas / iškrita	0,38	4800	0	0	4800	0	0
10	2	85	81	Netaikoma	0,65	4859	0	1	4859	0	1
11	2	75	75	PolyA (8)	0,35	4468	0	40	4468	0	40
12	2	88	88	PolyT (5)	0,42	5280	0	0	5280	0	0
13	2	87	87	PolyT (5), intarpas / iškrita	0,31	5211	0	43	5214	0	40
14	2	91	91	PolyT (5), PolyA (6), intarpas / iškrita	0,3	5453	0	7	5449	0	11
15	2	93	93	Netaikoma	0,43	5579	0	1	5579	0	1
16	2	73	73	PolyT (5), intarpas / iškrita	0,42	4378	0	2	4379	0	1
17	3	93	93	AT(3), intarpas / iškrita	0,27	5396	0	184	5396	0	184

Amplikonas	Chromosoma	Analizuoto fragmento dydis	Bazės didelio pasiklojimo srityse	Amplikonų geno turinys	GC turinys	1-asis „MiSeqDx“			2-asis „MiSeqDx“		
						Iš viso teisingų priskyrimų	Iš viso neteisingų priskyrimų	Iš viso nepriskyrimų	Iš viso teisingų priskyrimų	Iš viso neteisingų priskyrimų	Iš viso nepriskyrimų
18	3	83	83	Netaikoma	0,43	4980	0	0	4980	0	0
19	3	70	70	CT(3), intarpas / iškrita	0,49	4193	0	7	4194	0	6
20	3	88	88	PolyA (5), PolyT (5), PolyA (9), TG (3)	0,41	5220	0	120	5220	0	120
21	3	75	74	Intarpas / iškrita	0,57	4432	0	8	4432	0	8
22	4	78	78	PolyA (6)	0,26	4676	0	4	4676	0	4
23	4	97	97	PolyG (6), PolyT (5), PolyA (5)	0,42	5820	0	0	5820	0	0
24	4	78	78	Netaikoma	0,29	4679	0	1	4677	0	3
25	4	66	62	PolyA (5), intarpas / iškrita	0,36	3720	0	0	3720	0	0
26	4	71	69	PolyA (5)	0,46	4140	0	0	4140	0	0
27	4	62	62	PolyA (7), intarpas / iškrita	0,27	3676	0	45	3671	0	51
28	5	78	75	Netaikoma	0,78	3368	0	1132	3485	0	1015
29	5	84	84	GT(3), CCA(3)	0,62	5040	0	0	5040	0	0
30	5	64	64	Netaikoma	0,39	3840	0	0	3840	0	0
31	5	83	83	PolyA (6), intarpas / iškrita	0,3	4979	0	1	4980	0	0
32	5	67	67	PolyT (5)	0,37	4020	0	0	4020	0	0
33	5	91	91	CT(4), AG(3)	0,55	5460	0	0	5460	0	0
34	5	75	75	Intarpas / iškrita	0,43	4498	0	6	4500	0	1
35	6	102	102	PolyG (6)	0,68	6120	0	0	6120	0	0
36	6	92	92	Intarpas / iškrita	0,63	5520	0	0	5520	0	0

Amplikonas	Chromosoma	Analizuoto fragmento dydis	Bazės didelio pasiklovimio srityse	Amplikonų geno turinys	GC turinys	1-asis „MiSeqDx“			2-asis „MiSeqDx“		
						Iš viso teisingų priskyrimų	Iš viso neteisingų priskyrimų	Iš viso nepriskyrimų	Iš viso teisingų priskyrimų	Iš viso neteisingų priskyrimų	Iš viso nepriskyrimų
37	6	100	94	GCT(5), intarpas / iškrita	0,61	5532	0	108	5532	0	108
38	6	98	98	Poly T (5), TCT (3), CTT(3)	0,55	5820	0	60	5820	0	60
39	6	95	95	Intarpas / iškrita	0,53	5697	0	3	5698	0	2
40	6	86	86	PolyC (6)	0,7	5159	0	1	5160	0	0
41	6	95	94	PolyG (5), intarpas / iškrita	0,61	5638	0	2	5638	0	2
42	6	91	91	PolyA (5)	0,44	5460	0	0	5460	0	0
43	7	73	73	Netaikoma	0,44	4380	0	0	4380	0	0
44	7	88	88	Intarpas / iškrita	0,35	5279	0	1	5276	0	4
45	7	87	87	PolyA (7), AG (4)	0,26	5184	0	36	5181	0	39
46	7	85	85	Intarpas / iškrita	0,38	5100	0	0	5100	0	0
47	7	90	90	PolyG (5), intarpas / iškrita	0,62	5398	0	2	5399	0	1
48	7	91	91	PolyG (6), PolyC (6), intarpas / iškrita	0,71	5460	0	0	5459	0	1
49	7	81	66	Netaikoma	0,31	3960	0	0	3960	0	0
50	7	93	93	Intarpas / iškrita	0,35	5580	0	0	5579	0	1
51	8	83	83	Netaikoma	0,42	4980	0	0	4980	0	0
52	8	90	89	PolyG (7), CTC (4), intarpas / iškrita	0,61	5219	0	121	5220	0	120
53	8	67	67	Intarpas / iškrita	0,3	4020	0	0	4020	0	0
54	9	98	98	PolyG (6)	0,67	5879	0	1	5880	0	0
55	9	65	65	Intarpas / iškrita	0,32	3894	0	6	3895	0	5

Amplikonas	Chromosoma	Analizuoto fragmento dydis	Bazės didelio pasiklovimio srityse	Amplikonų geno turinys	GC turinys	1-asis „MiSeqDx“			2-asis „MiSeqDx“		
						Iš viso teisingų priskyrimų	Iš viso neteisingų priskyrimų	Iš viso nepriskyrimų	Iš viso teisingų priskyrimų	Iš viso neteisingų priskyrimų	Iš viso nepriskyrimų
56	9	96	96	Netaikoma	0,49	5760	0	0	5760	0	0
57	9	83	83	AT(3)	0,37	4973	0	7	4978	0	2
58	9	97	97	PolyC (6), intarpas / iškrita	0,68	5817	0	3	5818	0	2
59	10	79	78	PolyG (5), intarpas / iškrita	0,47	4679	0	1	4680	0	0
60	10	98	91	GC(3)	0,87	450	0	5010	632	0	4828
61	10	79	79	PolyT (5)	0,3	4740	0	0	4740	0	0
62	10	90	90	PolyA (5), PolyT (5)	0,2	5400	0	0	5400	0	0
63	10	95	95	Intarpas / iškrita	0,35	5699	0	1	5699	0	1
64	10	89	88	AC(11), intarpas / iškrita	0,42	5157	0	276	5153	2	273
65	10	80	80	Netaikoma	0,49	4800	0	0	4800	0	0
66	10	81	81	Netaikoma	0,51	4860	0	0	4860	0	0
67	11	97	96	Netaikoma	0,45	5760	0	0	5760	0	0
68	11	70	70	Intarpas / iškrita	0,46	4199	0	2	4200	0	1
69	11	100	100	Netaikoma	0,65	5999	0	1	5998	0	2
70	11	62	62	Intarpas / iškrita	0,37	3720	0	0	3720	0	0
71	11	102	102	Netaikoma	0,59	6120	0	0	6118	0	2
72	11	73	73	PolyA (5)	0,4	4380	0	0	4380	0	0
73	11	85	85	Netaikoma	0,42	5100	0	0	5100	0	0
74	11	91	91	PolyG (6)	0,55	5437	0	23	5441	0	19
75	11	85	85	Intarpas / iškrita	0,53	5100	0	0	5100	0	0
76	11	85	85	Poly A (5), CA (3), intarpas / iškrita	0,34	5100	0	0	5100	0	0

Amplikonas	Chromosoma	Analizuoto fragmento dydis	Bazės didelio pasiklojimo srityse	Amplikonų geno turinys	GC turinys	1-asis „MiSeqDx“			2-asis „MiSeqDx“		
						Iš viso teisingų priskyrimų	Iš viso neteisingų priskyrimų	Iš viso nepriskyrimų	Iš viso teisingų priskyrimų	Iš viso neteisingų priskyrimų	Iš viso nepriskyrimų
77	11	85	85	GA(3)	0,52	5100	0	0	5100	0	0
78	12	84	84	PolyC (5), intarpas / iškrita	0,52	5040	0	60	5038	0	63
79	12	93	93	PolyA (7), AC (4)	0,33	5577	0	3	5573	0	7
80	12	81	81	Netaikoma	0,49	4860	0	0	4860	0	0
81	12	71	71	PolyA (6)	0,35	4260	0	0	4260	0	0
82	2	95	95	PolyG (5)	0,68	5605	0	95	5605	0	95
83	13	73	73	Netaikoma	0,52	4380	0	0	4379	0	1
84	13	89	88	PolyA (5), PolyT (7), PolyA (7), intarpas / iškrita	0,22	5220	0	60	5220	0	60
85	13	89	89	Intarpas / iškrita	0,49	5340	0	0	5340	0	0
86	13	77	77	Intarpas / iškrita	0,39	4620	0	0	4620	0	0
87	14	67	67	GA(3),TA(3)	0,39	4020	0	0	4020	0	0
88	14	83	83	Netaikoma	0,25	4980	0	0	4980	0	0
89	14	73	72	PolyT (5), intarpas / iškrita	0,19	4173	0	147	4173	0	147
90	14	81	81	Intarpas / iškrita	0,38	4860	0	2	4860	0	0
91	14	91	91	Intarpas / iškrita	0,35	5459	0	1	5460	0	0
92	14	66	66	PolyA (5)	0,41	3900	0	240	3900	0	240
93	14	94	94	Intarpas / iškrita	0,62	5637	0	3	5637	0	3
94	15	98	96	PolyC (5)	0,45	5760	0	0	5760	0	0
95	15	68	68	Intarpas / iškrita	0,25	4079	0	1	4078	0	2
96	15	95	93	PolyG (5), intarpas / iškrita	0,68	5475	0	105	5487	0	93

Amplikonas	Chromosoma	Analizuoto fragmento dydis	Bazės didelio pasiklojimo srityse	Amplikonų geno turinys	GC turinys	1-asis „MiSeqDx“			2-asis „MiSeqDx“		
						Iš viso teisingų priskyrimų	Iš viso neteisingų priskyrimų	Iš viso nepriskyrimų	Iš viso teisingų priskyrimų	Iš viso neteisingų priskyrimų	Iš viso nepriskyrimų
97	15	95	95	PolyT (6)	0,43	5699	0	1	5700	0	0
98	15	72	71	Intarpas / iškrita	0,65	4260	0	0	4260	0	0
99	15	91	91	Netaikoma	0,36	5460	0	0	5460	0	0
100	15	70	70	Intarpas / iškrita	0,56	4200	0	0	4200	0	0
101	16	63	63	Netaikoma	0,27	3780	0	0	780	0	0
102	16	95	95	PolyC (5)	0,67	5700	0	0	5700	0	0
103	16	87	87	TA(3)	0,41	5220	0	0	5220	0	0
104	16	104	104	PolyC (5)	0,67	6238	0	3	6238	0	3
105	16	91	91	PolyT (5), intarpas / iškrita	0,37	5443	0	17	5444	0	16
106	17	89	89	GC(3)	0,64	5251	0	89	5339	0	1
107	17	87	87	PolyC (5), intarpas / iškrita	0,67	5212	0	8	5212	0	8
108	17	91	91	Intarpas / iškrita	0,46	5459	0	1	5459	0	1
109	17	93	93	Intarpas / iškrita	0,26	5580	0	0	5580	0	0
110	17	91	89	PolyT (5)	0,54	5340	0	0	5340	0	0
111	17	84	82	Poly A (13), intarpas / iškrita (x2)	0,29	4860	0	308	4860	0	07
112	17	91	91	PolyA (5)	0,34	5459	0	1	5459	0	1
113	17	92	92	PolyA (7), AT (3), AT(4), AT (4), intarpas / iškrita	0,26	5460	0	60	5460	0	60
114	17	79	79	Intarpas / iškrita	0,41	4699	0	41	4700	0	40
115	17	86	86	PolyT (7)	0,22	5153	0	7	5156	0	4
116	17	84	84	GAG(3)	0,62	5039	0	1	5039	0	1

Amplikonas	Chromosoma	Analizuoto fragmento dydis	Bazės didelio pasiklojimo srityse	Amplikonų geno turinys	GC turinys	1-asis „MiSeqDx“			2-asis „MiSeqDx“		
						Iš viso teisingų priskyrimų	Iš viso neteisingų priskyrimų	Iš viso nepriskyrimų	Iš viso teisingų priskyrimų	Iš viso neteisingų priskyrimų	Iš viso nepriskyrimų
117	18	67	67	GA(3)	0,31	4020	0	0	4020	0	0
118	18	91	91	Netaikoma	0,37	5460	0	0	5460	0	0
119	18	69	69	PolyA (6), TG (3)	0,43	4132	0	8	4131	0	9
120	18	75	75	PolyA (5), intarpas / iškrita	0,37	4475	0	85	4480	0	79
121	18	81	81	CTC(3), intarpas / iškrita	0,47	4860	0	0	4860	0	0
122	18	85	85	CT(3), intarpas / iškrita	0,45	5098	0	2	5098	0	2
123	18	65	65	Netaikoma	0,48	3900	0	0	3900	0	0
124	19	99	99	Netaikoma	0,59	5926	0	14	5924	0	16
125	19	74	74	Netaikoma	0,68	4440	0	0	4438	0	2
126	19	70	70	Netaikoma	0,64	4199	0	1	4200	0	0
127	20	94	94	Netaikoma	0,61	5640	0	1	5638	0	3
128	20	82	82	AC(3)	0,59	4920	0	0	4920	0	0
129	20	76	76	CT(3)	0,58	4559	0	1	4558	0	2
130	20	70	70	GT(3),TG(4), intarpas / iškrita	0,46	4200	0	0	4200	0	0
131	20	101	101	Intarpas / iškrita	0,63	6060	0	0	6060	0	0
132	20	67	67	Intarpas / iškrita	0,36	4020	0	31	4020	0	25
133	20	91	88	PolyG (6)	0,73	5277	0	3	5274	0	6
134	20	87	87	Intarpas / iškrita	0,57	5218	0	2	5218	0	2
135	21	66	66	Intarpas / iškrita	0,35	3959	0	1	3957	0	3
136	21	98	98	PolyT (6), CA (3)	0,54	5880	0	0	5880	0	0

Amplikonas	Chromosoma	Analizuoto fragmento dydis	Bazės didelio pasiklojimo srityse	Amplikonų geno turinys	GC turinys	1-asis „MiSeqDx“			2-asis „MiSeqDx“		
						Iš viso teisingų priskyrimų	Iš viso neteisingų priskyrimų	Iš viso nepriskyrimų	Iš viso teisingų priskyrimų	Iš viso neteisingų priskyrimų	Iš viso nepriskyrimų
137	21	87	87	GT(3), intarpas / iškrita	0,39	5220	0	0	5220	0	0
138	21	69	69	PolyA (6), AG (3), intarpas / iškrita	0,32	4119	0	31	4113	0	37
139	21	90	90	PolyT (5), PolyA (6)	0,5	5399	0	1	5399	0	1
140	22	100	100	Intarpas / iškrita	0,63	5998	0	7	5997	0	5
141	22	97	97	Netaikoma	0,68	5819	0	1	5819	0	1
142	22	97	97	Intarpas / iškrita	0,46	5818	0	2	5816	0	4
143	22	99	99	Netaikoma	0,6	5940	0	0	5940	0	0
144	22	92	92	Intarpas / iškrita	0,66	5519	0	1	5519	0	1
145	X	69	69	PolyT (5)	0,26	4139	0	1	4140	0	0
146	X	69	69	PolyC (5)	0,62	4136	0	4	4137	0	3
147	X	71	71	Netaikoma	0,52	4260	0	0	4260	0	0
148	Y	65	0	Netaikoma	0,55	0	0	0	0	0	0
149	Y	91	0	Netaikoma	0,48	0	0	0	0	0	0
150	Y	71	0	PolyA (5)	0,37	0	0	0	0	0	0

Atkuriamumo tyrimo rezultatai buvo analizuojami kiekvieno operatoriaus atžvilgiu, naudojant variantų dažnį (lentelė 18). Šia analize parodyta, kad visų operatorių variantų dažniai buvo nuoseklūs. Pateikiami vidutiniai variantų dažniai +/- 1 standartinis nuokrypis.

lentelė 18 „MiSeqDx“ prietaiso skirtingų operatorių rezultatai

Variantų dažnių diapazonas	Unikalių variantų sk.	Iš viso išanalizuotų 1 operatoriaus variantų	Iš viso išanalizuotų 2 operatoriaus variantų	1 operatoriaus vidutinis (SD) deklaruotas variantų dažnis	2 operatoriaus vidutinis (SD) deklaruotas variantų dažnis
Didelis dažnis (~100 %)	1112	1072	1072	0,96 +/- 0,05	0,96 +/- 0,05
Vidutinis dažnis (~50 %)	3240	3151	3161	0,49 +/- 0,04	0,49 +/- 0,04
Mažas dažnis (3–7 %)	620	618	612	0,05 +/- 0,01	0,05 +/- 0,01

Kiekvieno mėginio atkuriamumo tyrimo rezultatai rodomi sujungti iš visų aštuonių vykdymų [lentelė 19](#). Kiekvieno varianto tipo – SNV, intarpų ir iškritų – aptikimas įvertinamas atskirai. Referentinės padėtys neįtraukiamos. Šia analize parodyta, kad variantų rezultatai atkuriami pasirinkus visus mėginius.

lentelė 19 „MiSeqDx“ prietaiso kiekvieno mėginio bazių priskyrimo rezultatų atitiktis

Mėginys	SNVs				Intarpai				Iškritis			
	Iš viso	Iš viso TP	Iš viso FP	Iš viso FN	Iš viso	Iš viso TP	Iš viso FP	Iš viso FN	Iš viso	Iš viso TP	Iš viso FP	Iš viso FN
GM12877	592	574	2	0	336	336	0	0	228	272	0	0
GM12878	1456	1432	0	0	320	304	0	0	384	352	0	0
GM12879	912	896	0	0	336	320	0	0	288	272	0	0
GM12885	1200	1192	0	0	400	384	0	0	352	320	0	0
GM12886	1104	1104	0	0	368	352	0	0	368	352	0	0
GM12877-D1 ¹	3640	3582	0	0	800	760	0	0	960	880	0	0
GM12877-D2 ²	400	398	0	0	520	516	0	0	560	556	0	0

¹ Variantai, kurių dažnis didesnis nei 20 %.

² Variantas, kurio dažnis mažesnis nei 20 %.

8-iais šio atkuriamumo tyrimo vykdymais gauti duomenys pagrindžia teiginį, kad „MiSeqDx“ prietaisas gali nuosekliai atlikti sekos nustatymą toliau nurodytais atvejais:

- GC turinys $\geq 19\%$ (visos priskirtos bazės 120 iš 120 nuskaitytos sekos amplikonuose: 19 % GC turinio priskirta teisingai, o nepriskyrimo dažnis – 3,4 %)
- GC turinys $\leq 73\%$ (visos priskirtos bazės 120 iš 120 nuskaitytos sekos amplikonuose: 73 % GC turinio priskirta teisingai, o nepriskyrimo dažnis – 0,1 %)
- PolyA ilgis ≤ 8 (8 nukleotidų PolyA pakartojimas buvo teisingai priskirtas 120 iš 120 nuskaitytos sekos amplikonų, kurių sudėtyje buvo PolyA = 8)
- PolyT ilgis ≤ 10 (10 nukleotidų PolyT pakartojimas buvo teisingai priskirtas 120 iš 120 nuskaitytos sekos amplikonų, kurių sudėtyje buvo PolyT = 10)
- PolyG ilgis ≤ 6 (6 nukleotidų PolyG pakartojimas buvo teisingai priskirtas 720 iš 720 nuskaitytos sekos amplikonų, kurių sudėtyje buvo PolyG = 6)

- PolyC ilgis ≤ 6 (6 nukleotidų PolyC pakartojimas buvo teisingai priskirtas 359 iš 360 nuskaitytos sekos amplikonų, kurių sudėtyje buvo PolyC = 6, 1 nepriskyrimas)
- Pasikartojančių dinukleotidų ilgis $\leq 4x$ (visos priskirtos bazės 600 iš 600 nuskaitytos sekos amplikonų su 4x pasikartojančių dinukleotidų buvo priskirtos tinkamai, o nepriskyrimo dažnis – 0,4 %)
- Pasikartojančių trinukleotidų ilgis $\leq 5x$ (visos priskirtos bazės 120 iš 120 nuskaitytos sekos amplikonų su 5x pasikartojančių trinukleotidų buvo priskirtos tinkamai, o nepriskyrimo dažnis – 1,9 %)
- 24 arba mažiau bazių intarpų ir 25 arba mažiau bazių iškritų
 - 24 bazių intarpai teisingai priskirti 120 iš 120 mėginių
 - 25 bazių iškritos teisingai priskirtos 182 mėginiuose, o deklaruotos kaip nepriskirtos 2 mėginiuose iš 184 mėginių

2 tyrimas

Siekiant įvertinti reprezentatyviojo dviejų genų tyrimo atkuriamumą, trijose išorinėse tyrimų vietose (vienoje vietoje du operatoriai), naudojant vieną reagentų partiją tris tyrimų dienas (ne iš eilės) buvo atliktas išorinis tyrimas, aprašytas 2-ajame tikslumo tyrime. Bandymai buvo vykdomi naudojant šešias išsamiai apibūdintas genomo DNR mėginių grupes iš klinikinių FFPE mėginių ar ląstelių linijų. Kiekvieną grupę sudarė 10 narių, visose grupėse iš viso buvo 60 narių.

60 grupių narių sudarė keturių unikalių nemutantinio tipo (grupių mutacijos) mėginių, 12 unikalių mutantinio tipo mėginių (su viena mutacija), paruoštų esant tiek dideliame, tiek mažame mutacijų dažniui, ir dviejų unikalių mutantinio tipo mėginių (su viena mutacija), paruoštų esant tik mažam mutacijų dažniui, dublikatai. Tiriant kiekvieną unikalų mėginį / mutacijų dažnio lygio mėginį (kiekvieno vykdymo metu bandytą dviem egzemplioriais), gauti 36 galimi rezultatai (2 replikatai \times 2 operatoriai \times 3 dienos \times 3 vietos) (jei visi rezultatai galiojo).

Procentinis numatomas visų teigiamų ir neigiamų variantų priskyrimas (PEC) buvo įvertintas reprezentatyviojo tyrimo rezultata palyginant su numatomu kiekvieno mėginio mutacijų rezultatu (aptikta ar neaptikta numatoma mutacija). PEC apskaičiuojamas numatomų priskyrimų skaičių padalijant iš bandytų priskyrimų skaičiaus ir rezultatą padauginus iš 100 %. Dvipusis 95 % pasiklivimo intervalas apskaičiuojamas naudojant Wilsono vertinimo metodą.

Apibendrinus duomenis visose tyrimų vietose, atliekant pirmąjį mėginio vykdymą arba bandant mėginius, galiojusius pirmojo tyrimo metu, sėkmingai ištirtų mėginių procentas buvo $\geq 94,7$ %. Visų mutantinio tipo mėginių mutacijų lygio PEC buvo 99,6 % (905 / 909) (95 % PI; 98,9, 99,8). Visų 56 grupės mutacijų bandytų priskyrimų skaičius tiriant visus galiojančius mėginius (neatsižvelgiant į tai, ar aptikta

mutacija buvo numatyta, ar ne) buvo 58 856 (56 × 1051). Iš šių 58 856 mutantinio lygio mėginių pastebėti tik šeši incidentai, o tikėtini rezultatai buvo prieštaringi. Mutacijų lygio PEC visų mutacinio bei nemutacinio tipo grupių narių visuose teigiamuose ir neigiamuose variantuose kartu sudarė 99,99 % (58 850 / 58 856).

Analitinis jautris (tuščiosios vertės riba (LoB) ir aptikimo riba (LoD))

Šiuo tyrimu patvirtinta tyrimo ribinė vertė ir nustatyta „MiSeqDx“ aptikimo riba (LoD) (naudojant reprezentatyviąją grupę). Glaustai: išsamiai apibūdintos „Platinum Genome“ ląstelių linijos GM12878 ir GM12877 buvo fiksuotos formalinu ir įlietos į parafiną, o tada buvo išskirta DNR. GM12878 buvo atskiesta linija GM12877, kad septyniasdešimties variantų (52 SNV, devynių intarpų ir devynių iškritų) dažniai būtų artimi 0,05. Du DNR mėginius tyrė du operatoriai, naudodami du prietaisus ir dvi reagentų partijas: iš viso buvo atlikta 10 „MiSeqDx“ sekos nustatymo vykdymų. Taip kiekvienoje reagentų partijoje gauta 40 kiekvieno GM12878 varianto replikatų ir 60 kiekvienos atitinkamos nemutacinio tipo GM12877 koordinatės replikatų. LoB ir LoD buvo apskaičiuotos įprastu metodu, nurodytu CLSI EP17-A2 dokumente, naudojant nparametrinę parinktį. SNV, intarpų ir iškritų LoB bei LoD buvo apskaičiuotos atskirai, kaupiant konkretaus varianto tipo dažnius. I tipo klaida buvo apibrėžta kaip 0,01, o II tipo – kaip 0,05.

LoB atveju sukaupti variantų dažniai buvo surikiuoti nuo žemiausio iki aukščiausio ir buvo apskaičiuota 99-oji kiekvieno varianto tipo kiekvienos reagentų partijos klasifikacijos padėtis (lentelė 20). Kokybiniam variantų aptikimui nustatyti „MiSeqDx“ programinė įranga naudoja 0,026 variantų dažnio ribinę vertę (tikrąją LoB). Apskaičiavus tuščiosios vertės ribas buvo patvirtinta, kad, taikant šią ribinę vertę, I tipo klaidos dažnis yra ne didesnis nei 0,01.

lentelė 20 Tuščiosios vertės riba

Varianto tipas	Iš viso variantų dažnių	1-osios reagentų partijos LoB (%)	2-osios reagentų partijos LoB (%)
SNV	3120	0,87	0,75
Intarpas	540	0,79	0,60
Iškrita	540	0,96	0,84

LoD atveju buvo apskaičiuota kiekvieno varianto tipo kiekvienos reagentų partijos atskiro mutacijos dažnio procentinė dalis, mažesnė nei ribinė 0,026 vertė (lentelė 21). Kadangi šios procentinės dalys buvo mažesnės už II tipo klaidos dažnį (5 %, 0,05), kaip LoD buvo apskaičiuota sujungtų variantų dažnių mediana (lentelė 21). Kaip kiekvieno varianto tipo LoD buvo paimta didesnioji iš apskaičiuotų dviejų reagentų partijų verčių: 5,45 % SNV atveju, 4,88 % – intarpų ir 5,44 % – iškritų.

lentelė 21 Aptikimo riba

Reagentų partija	Varianto tipas	Iš viso variantų dažnių	VF matavimų sk. < 2,6 %.	VF matavimų % < 2,6 %.	Aptikimo riba (%)
1	SNV	2080	4	0,20	5,45
	Intarpas	360	0	0,00	4,86
	Iškrita	360	2	0,60	5,44
2	SNV	2080	26	1,30	5,44
	Intarpas	360	0	0,00	4,88
	Iškrita	360	0	0,00	5,24

Toliau pateiktais tyrimais parodomas „MiSeqDx“ veikimo charakteristikos atliekant kitą reprezentatyvų tyrimą, orientuotą į 56 mutacijas dviejuose klinikiu požiūriu svarbiuose vėžio genuose (mutacijų grupė). Mutacijų grupė sukurta siekiant aptikti konkrečias 56 mutacijas dviejuose klinikiu požiūriu svarbiuose vėžio genuose (1 genas ir 2 genas). Atliekant tyrimą, tuo pačiu metu aptinkama, ar kiekviena iš 56 mutacijų kiekviename nuskaitytos sekos mėginyje yra, ar jos ten nėra. Šių tyrimų referentinis metodas buvo dvikryptis Sangerio sekos nustatymas.

Skirtingų partijų tikslumas

Buvo atliktas skirtingų partijų tikslumo tyrimas, siekiant įvertinti „MiSeqDx“ prietaiso veikimą naudojant skirtingas pagamintas reagentų rinkinio partijas (įskaitant mėginių kvalifikaciją, bibliotekų paruošimą ir sekos nustatymo reagentus); buvo atliekamas dviejų genų reprezentatyvusis tyrimas naudojant penkis sumaišytų FFPE mėginių, atitinkančių mėginių kvalifikacijos reikalavimus, grupę. Kiekviename FFPE mėginyje buvo dvi unikalios mutacijos: viena mažesnio (maždaug 8 %) dažnio lygio ir viena didesnio (maždaug 14 %) dažnio lygio. Per tris dienas (ne iš eilės), naudojant tris reagentų rinkinio partijas, buvo surinkta dvylika (12) kiekvieno iš penkių mėginių mišinio stebėjimo duomenų. Vykdamas tyrimą, naudojant visas reagentų partijas, iš viso atlikta 180 visų mėginių mišinių stebėjimų ir 360 visų mutacijų dažnių lygių stebėjimų. Naudojant visas partijas, o tyrimus atliekant visas dienas, 99,7 % (359 / 360) stebėjimų metu buvo matomas numatytas mutacijų rezultatas. Viena mažo dažnio mutacija buvo neteisingai priskirta kaip nemutantinio tipo. Siekiant apytikriai nustatyti sistemos kintamumą, buvo atlikta kiekvienos mutacijos / kiekvieno mutacijų dažnio lygio nuokrypio komponentų analizė. Bendrojo standartinio nuokrypio diapazonas buvo 0,011–0,029. Bendrojo standartinio nuokrypio reagentų partijos komponento diapazonas buvo 0–0,015.

Keitimo istorija

Dokumento Nr.	Data	Keitimo aprašymas
Dokumento Nr. 200006218 v02	2023 m. spalis	Atnaujintos nuorodos į „Local Run Manager“ 4 versijai. Atnaujintas ženklimas, kad būtų pateikta Australijos užsakovo informacija. Pataisyti neatitikimai, kai pakuotės lapelis skiriasi nuo „MiSeqDx“ prietaiso patikros tyrimo ataskaitos.
Dokumento Nr. 200006218 v01	2022 m. gegužė	Pridėtas „MiSeqDx Reagent Kit v3“ „Micro Package“ įdėklas CN prie pateiktos įrangos ir medžiagų, nebūtinai. Pridėta bandymų informacija „MiSeqDx Reagent Kit v3 Micro“ į „Veikimo charakteristikas“ Pašalintas JAV skirtas įspėjamasis pranešimas iš „Įspėjimai ir atsargumo priemonės“.
Dokumento Nr. 200006218 v00	2021 m. lapkritis	Pradinis leidimas, skirtas palaikyti MOS v4.0 ir „Local Run Manager“ v3.0.

Patentai ir prekės ženklai

Šis dokumentas ir jo turinys priklauso „Illumina, Inc.“ ir jos filialams („Illumina“), jis skirtas tik klientui naudoti pagal sutartį, kiek tai susiję su čia aprašyto (-ų) produkto (-ų) naudojimu, ir jokių kitų tikslu. Šio dokumento ir jo turinio negalima naudoti ar platinti jokių kitų tikslu ir (arba) kitaip negalima pateikti, atskleisti ar atkurti kokiu nors būdu be išankstinio rašytinio „Illumina“ sutikimo. „Illumina“ šiuo dokumentu neperduoda jokios trečiosios šalies licencijos pagal jos patentą, prekės ženklą, autorių ar kitas teises.

Kvalifikuotas ir tinkamai išmokytas personalas turi griežtai ir aiškiai vadovautis šiame dokumente pateiktomis instrukcijomis, kad būtų užtikrintas tinkamas ir saugus šiame dokumente aprašyto (-ų) produkto (-ų) naudojimas. Prieš naudojant tokį (-ius) produktą (-us), visas šis dokumentas turi būti įdėmiai perskaitytas ir suprastas.

JEI NEBUS PERSKAITYTOS VISOS ČIA PATEIKTOS INSTRUKCIJOS IR JOMIS NEBUS VADOVAUJAMASI, GALIMAS PRODUKTO (-Ų) PAŽEIDIMAS, NAUDOTOJO BEI KITŲ ASMENŲ SUŽEIDIMAS IR ŽALA KITAI NUOSAVYBEI, BE TO, TAI PANAIKINA PRODUKTUI (-AMS) TAIKOMOS GARANTIJOS GALIOJIMĄ.

„ILLUMINA“ NEPRISIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS, JEI ČIA APRAŠOMAS (-I) PRODUKTAS (-AI) (ĮSKAITANT DALIS IR PROGRAMINĘ ĮRANGĄ) NAUDOJAMAS (-I) NETINKAMAI.

© 2023 Illumina, Inc. Visos teisės saugomos.

Visi prekių ženklai priklauso „Illumina, Inc.“ arba jų atitinkamiems savininkams. Daugiau informacijos apie prekių ženklus žr. www.illumina.com/company/legal.html.

Kontaktinė informacija



Illumina, Inc.
5200 Illumina Way
San Diego, California 92122 JAV
+1.800.809.ILMN (4566)
+1.858.202.4566 (ne Šiaurės Amerikoje)
techsupport@illumina.com
www.illumina.com

CE



Illumina Netherlands B.V.
Steenoven 19
5626 DK Eindhoven
The Netherlands

Užsakovas Australijoje
Illumina Australia Pty Ltd
Nursing Association Building
Level 3, 535 Elizabeth Street
Melbourne, VIC 3000
Australija

Gaminio ženklimas

Visą informaciją apie gaminių pakuočių ir etikečių simbolius rasite simbolių paaiškinimo lentelėje, pateiktoje svetainės support.illumina.com skirtuke „*Documentation*“ (dokumentacija).